


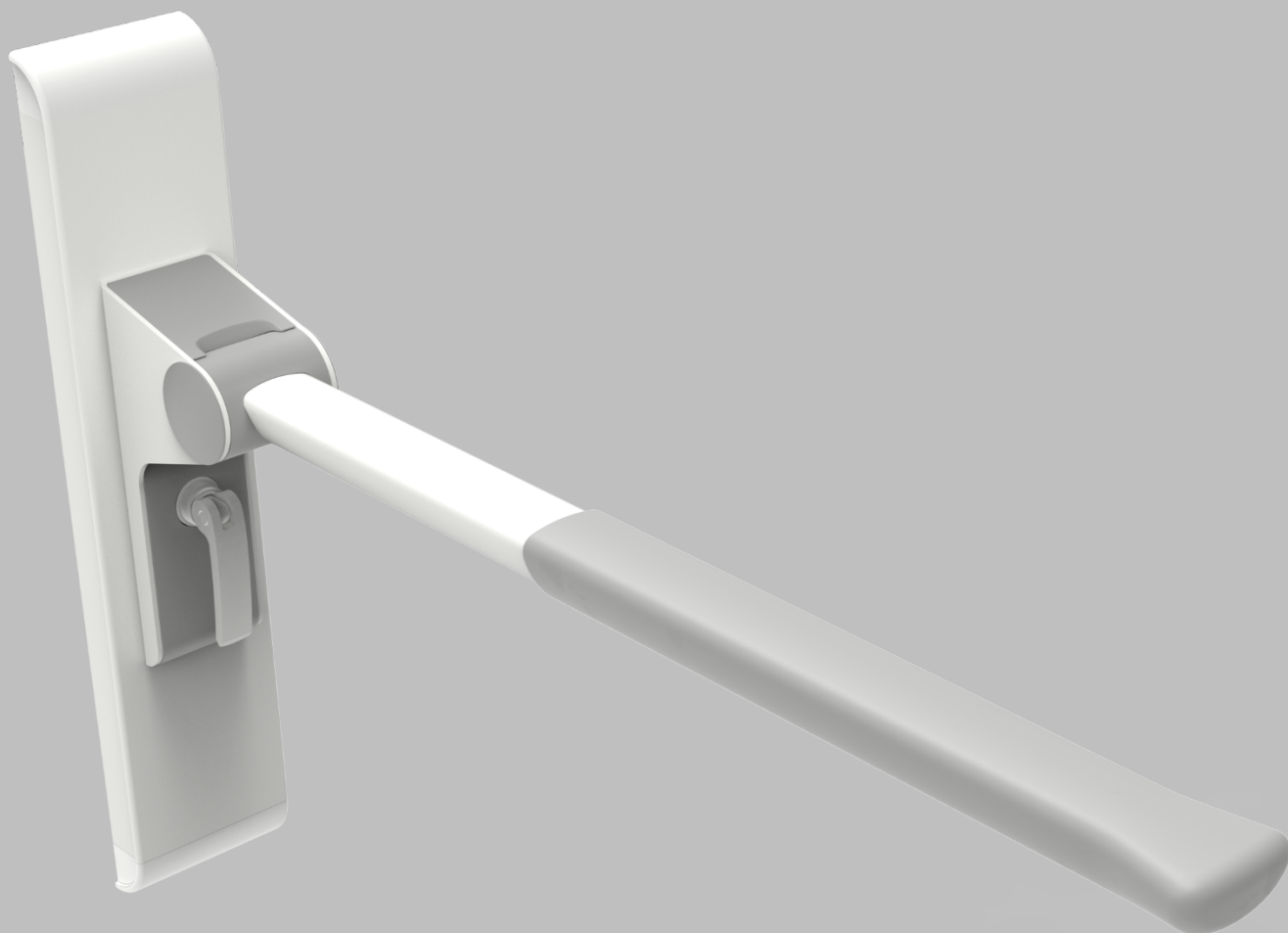

Korkeudensäätökisko Sense-tukikaiteisiin

Käyttöohjeet

Säilytä tämä käyttöohje aina tuotteen lähellä.

Sisällys

1. Symbolien selitykset.....	3
2. Turvallisuus	3
2.1 Tuotemerkinnät	5
3. Yleisvaatimukset	6
3.1 Tuotetiedot	6
3.2 Tuotteen kuvaus.....	7
3.3 Tarkoitettu käyttö.....	7
3.4 Tarkoitettu käyttäjä	7
3.5 Tuotteen mitat	7
4. Käyttöohjeet.....	8
4.1 Asennusrajapinnat	8
4.2 Tuotteen asentaminen	9
4.3 Tukikaiteen asennus	10
4.4 Tuotteen käyttö – pikalukitus.....	12
5. Puhdistus	13
5.1 Ennalta hyväksytyt desinfointiaineet	13
6. Huolto	13
7. Ympäristönäkökohdat.....	14
8. Onnettomuuksien/tapaturmien raportointi	14

1. Symbolien selitykset

Vaara Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen. Jos sitä ei vältetä, seurauksena voi olla vakava ruumiinvamma tai kuolema.	
Varoitus Ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen ruumiinvammaan. Symbolia käytetään myös varoittamaan vääränlaisesta käytöstä.	
Huomio Tämä symboli kiinnittää huomion tuotteen asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn.	

2. Turvallisuus

	Tämä käyttöohje on luettava ja ymmärrettävä ennen tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje aina tuotteen lähellä. Tämän tuotteen käyttö, asennus ja huolto on suoritettava tämän käyttöohjeen mukaisesti, jotta vältetään vaaratilanteet, jotka voivat johtaa henkilövahinkoihin. Älä koskaan käytä tuotetta millään muulla tavalla kuin tämän käyttöohjeen mukaisesti. Ohjeista poikkeaminen voi johtaa henkilövahinkoihin, vaaratilanteisiin ja/tai tuotteen vaurioitumiseen. Henkilön, joka asentaa ja käyttää tätä tuotetta joko käyttäjänä tai potilaana, on saatava pääsy tässä käyttöohjeessa oleviin välttämättömiin turvallisuustietoihin.



Älä tee tuotteeseen korjauksia, purku- tai kokoamistoimenpiteitä, lisäyksiä, säätöjä tai muutoksia, joita ei kuvailla tässä käyttöohjeessa. Tällaiset toimenpiteet voi suorittaa vain Korpisen valtuuttama henkilöstö. Älä huolla tuotetta, kun se on potilaan käytössä.

Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittävästi käyttökokemusta tai laitteen tuntemusta, jos heitä on valvottu ja ohjattu käyttämään laitetta turvallisesti ja jos he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Älä käytä tuotetta, jos se on viallinen tai vahingoittunut, ennen kuin se on korjattu tai vaihdettu.



Tämän käyttöohjeen tiedot perustuvat asianmukaiseen asennukseen, joka on suoritettu tämän tuotteen asennusohjeiden mukaisesti.

Korpinen ei ole vastuussa, jos tuotetta käytetään tässä käyttöohjeessa ja/tai asennusohjeissa esitetystä poikkeavalla tavalla.

Korpinen pidättää oikeuden muuttaa tätä käyttöohjetta ja viiteasiakirjoja ilman ennakkoilmoitusta.

2.1 Tuotemerkinnät

Ringstedgade 221, DK 4700 Næstved

ROPOX™ +45 55750500
Info@ropox.dk

Ropox Height Adjustment for Toilet Support Arms
Wall mounted, 20 cm stroke, quick release

ITEM NO: 40-40450-1
MAX LOAD: 250 kg
Serial No: N10-xxxx
01-01-25




ROPOX™

WEB.: www.ropox.dk



Ropox A/S,
Ringstedgade 221, DK- 4700 Næstved
TLF: +45 5575 0500, E-mail: Info@ropox.dk

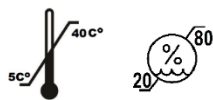

Transport & storage



	Tämä tuote on CE-merkitty seuraavien vaatimusten mukaisesti: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745 lääkinnällisistä laitteista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, RoHS
	Valmistajan nimi ja osoite
	Valmistuspäivä
REF	Luettelonumero
SN	Sarjanumero
	Tutustu käyttöohjeeseen ennen käyttöä.
	Katso käyttöohjeesta tärkeät turvallisuuteen liittyvät tiedot, varoitukset ja turvallisuusohjeet.
	Ei saa hävittää lajittelemattomana yhdyskuntajätteenä. Tuote on vietävä asianmukaiselle kierrätysasemalle.
	Käyttö- ja varastointilämpötilan on oltava 5–40 C°.
	Lue käyttöohjeet ennen käyttöä.

3. Yleisvaatimukset

3.1 Tuotetiedot

Valmistaja:	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Næstved Puh. +45 55 75 05 00 Sähköposti: Info@ropox.com		
Jakelija	Väinö Korpinen Oy, Sinikalliontie 3, FI-02630 Espoo Puh. +358 9 5491 4400 Sähköposti: korpinen@korpinen.com		
Vaihtoehdot	Tuotenro	Malli	UDI
	41200	Korkeudensäätökisko Sense-tukikaiteelle	05707581014802
Odotettu käyttöikä	5 vuotta		
MDR-luokka 2017/745	Luokka I		
Tarkoitettu käyttöympäristö	Tätä tuotetta saa käyttää vain seuraavissa: Ammatillinen terveydenhuolto Yksityiskodit		
Käyttäjän enimmäispaino DS/EN ISO 17966:2016 mukaisesti	250 kg		
Korkeudensäätö	200 mm		
Käyttölämpötila	Kuljetus ja varastointi: -5 °C - +40 °C Käyttö: +5 °C - +40 °C		
Potilaan kanssa kosketuksissa olevat materiaalit	Osat Lukitusvipu Etulevy Päätylevyt		Materiaalin kuvaus Valettu sinkki, jossa on antimikrobinen maali Alumiini, jossa on antimikrobinen maali ABS, jossa on antimikrobinen lisäaine

3.2 Tuotteen kuvaus

Korkeudensäätökisko mahdollistaa Sense-tukikaiteiden korkeuden helpon säädön, mikä tarjoaa optimaalisen käyttömukavuuden ja turvallisuuden.

3.3 Tarkoitettu käyttö

Tukikaiteet ovat toimiva apuväline pyörätuolin käyttäjille, jotka tarvitsevat tukea WC-istuin-siirtymissään. Liikuntarajoitteiset saavat tuen tukikaiteesta siirtyessään seisomasta istumaan ja WC-istuimelta noustessaan.


Korkeussäädön ansiosta tukikaiteen käyttökorkeus on helppo ja nopea mukauttaa eri käyttäjille ja erilaisiin tarpeisiin.

3.4 Tarkoitettu käyttäjä

Käyttäjäksi voidaan katsoa kuka tahansa, joka on lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöohjeen. Lapset tarvitsevat avustusta käytössä.

3.5 Tuotteen mitat

41200 – Korkeudensäätökisko, jossa on pikalukitus.

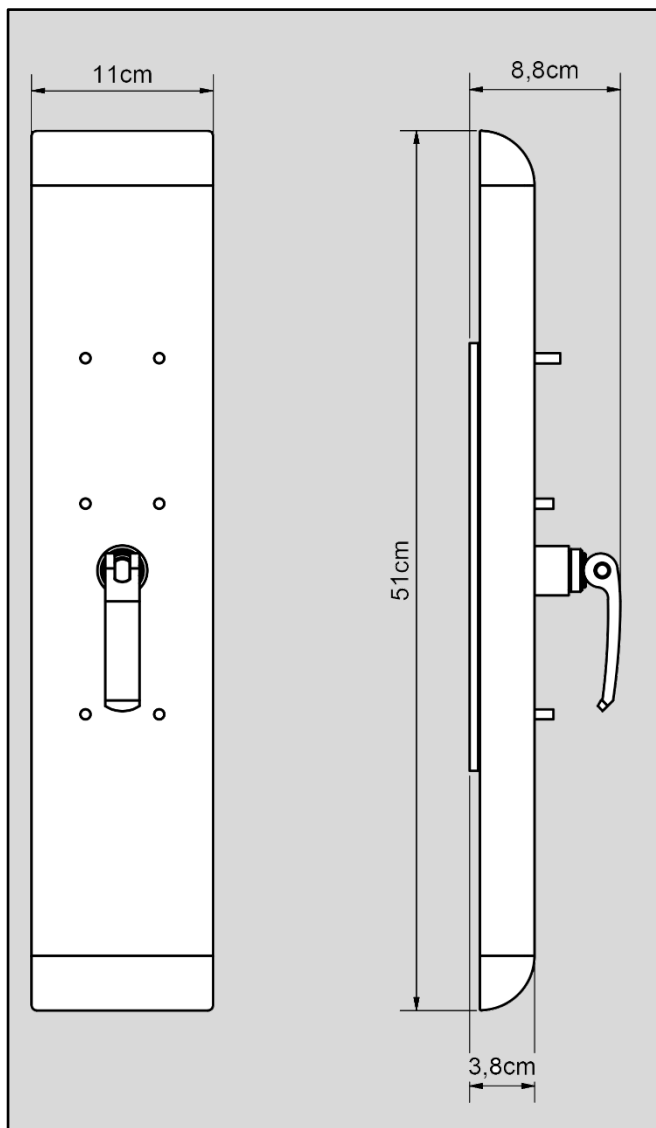

4. Käyttöohjeet

4.1 Asennusrajapinnat

Rakennustyöt

Seinän on oltava kosteisiin tiloihin hyväksyttyä ruuvinkestävää materiaalia.

Tummennettu alue osoittaa seinän vahvikkeiden vähimmäispinta-alan. Vahvikkeet on parasta asentaa lattiasta kattoon. On tärkeää, että korkeudensäätö voi liikkua 100 mm sekä ylös- että alaspäin.

Huomioi paikallisen rakennusvalvonnan antamat ohjeet mm. tukikaiteiden välisestä etäisyydestä. Ne saattavat poiketa oheisen piirroksen mitoista.

Korkeudensäätö on kuormitustestattu DS/ISO 17966 -standardin mukaisesti, ja käyttäjän enimmäispaino on asetettu seuraavasti:

Käyttäjän enimmäispaino DS/ISO 17966 -standardin mukaisesti

250 kg


Ylimpien ruuvien maksimiveto

125 kg

Ylimpien reikien sijainti

Sijainti riippuu siitä, mitä tukikaidetta asennetaan. Kaikki mitat on annettu millimetreinä, ja ne perustuvat tukikaitteen kiinteään korkeuteen 800 mm +/- 100 mm lattianrajasta. Jos tätä mittaä muutetaan, muita suositusmittoja on muutettava vastaavasti.

Yksikön mukana toimitetaan sarja (6 kpl) ruuveja ja seinätulppia, jotka on tarkoitettu asennettavaksi betoniseinään. Asentajan on aina arvioitava seinän materiaali, laatu ja lujuus sekä käytettävä kyseiselle seinätyypille sopivia ruuveja ja seinätulppia.

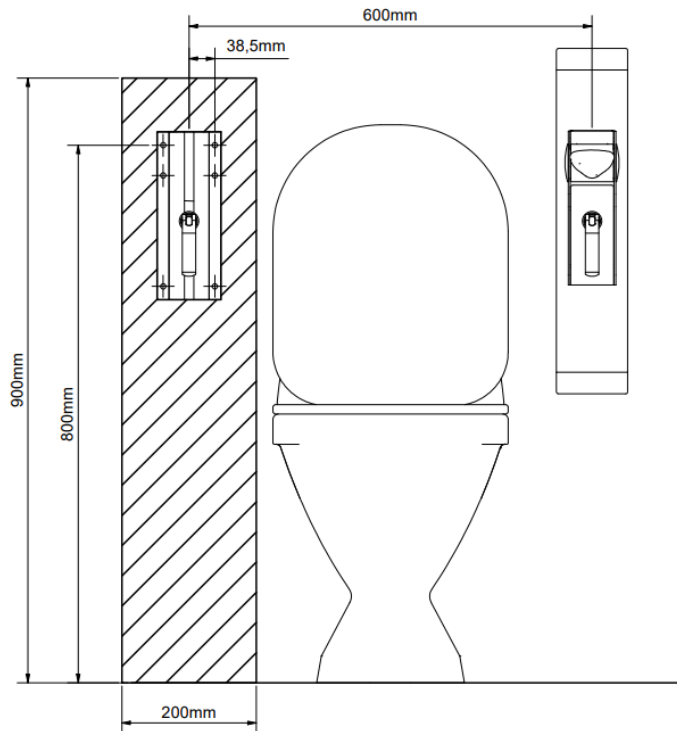



4.2 Tuotteen asentaminen

1. Poraa reiät tukikaiteiden halutun käyttökorkeuden ja niiden välisen etäisyyden mukaan (ks. kohta asennusraja-pinnat).
2. Ruuvaa seinäkannatin kiinni seinään ja varmista, että se on pystysuorassa.



3. Aseta etulevy seinäkannattimeen yläkautta.

Varmista, että lukitusvipu on löysällä ja siihen liitetty lukitusosa on suunnattu siten, että se sopii seinäkannattimen aukkoon.

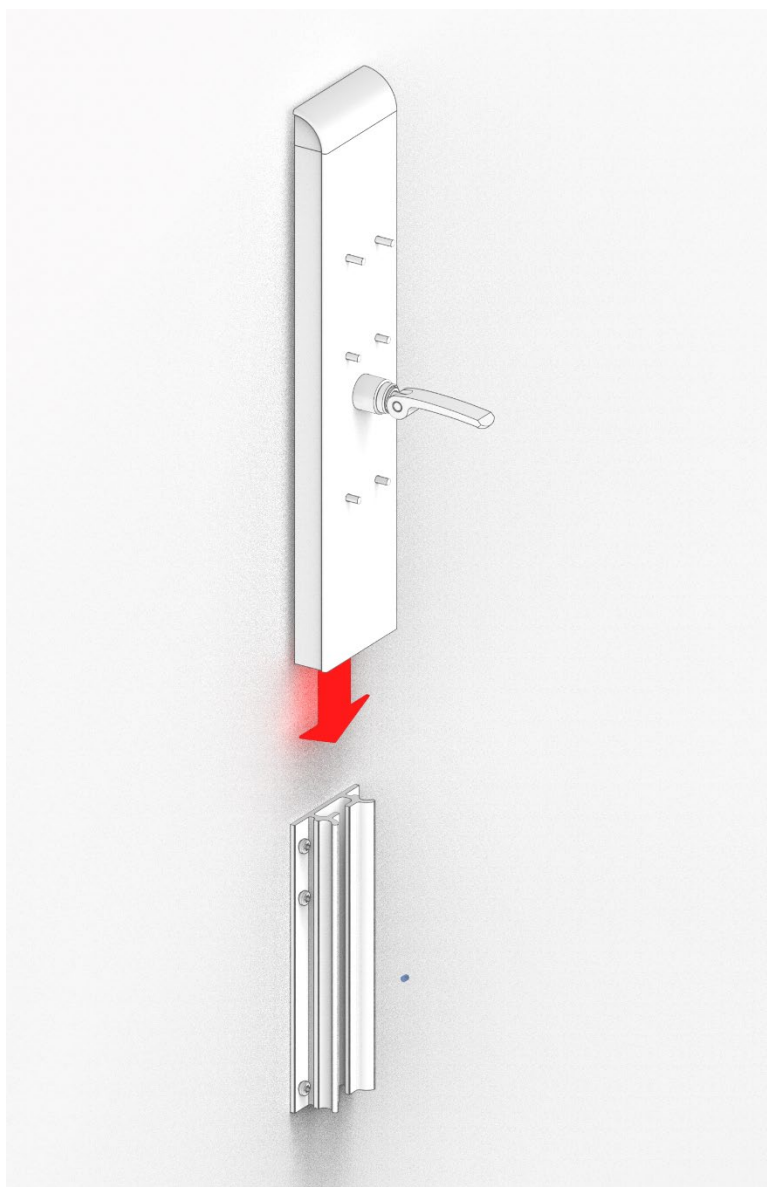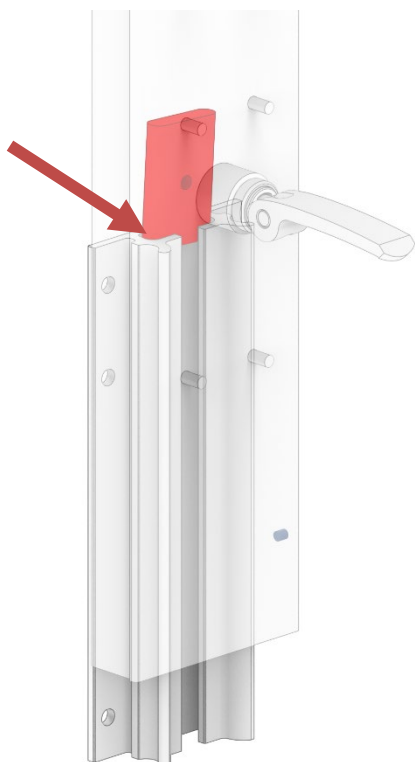

4. Kiinnitä lukituslevy etulevyn alaosaan kahdella ruuvilla.
5. Napsauta alin peitelevy paikalleen.



4.3 Tukikaiteen asennus


1. Ota esiin tuotteen mukana toimitetut lukkomutterit, 6 kpl.



2. Löysää lukitusvipua siten, että se osoittaa ulospäin. Vie lukitusvipu tukikaiteen seinäkannattimessa olevan reiän läpi ja aseta tukikaide kierretankoihin.



3. Kierrä mutterit tiukasti kierretankoihin. Ole erityisen varovainen kiinnittäessäsi kahta ylintä mutteria, ettei väännin jätä jälkiä tukikaiteen rumpuun.

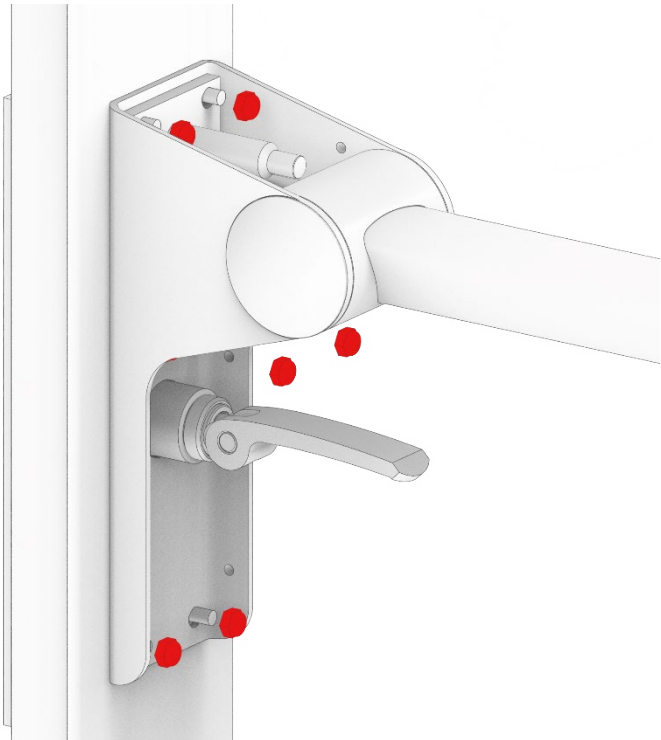


4. Työnnä mukana toimitettu aukollinen peitelevy lukitusvivun päälle ja napsauta se paikalleen.
5. Aseta ylempi peitelevy paikalleen.
6. Testaa, että tuotetta voidaan säätää ylös- ja alaspäin siten, ettei se osu huoneen muihin kiinteisiin esineisiin.



4.4 Tuotteen käyttö – pikalukitus

Säädä tukikaiteen korkeutta seuraavasti:

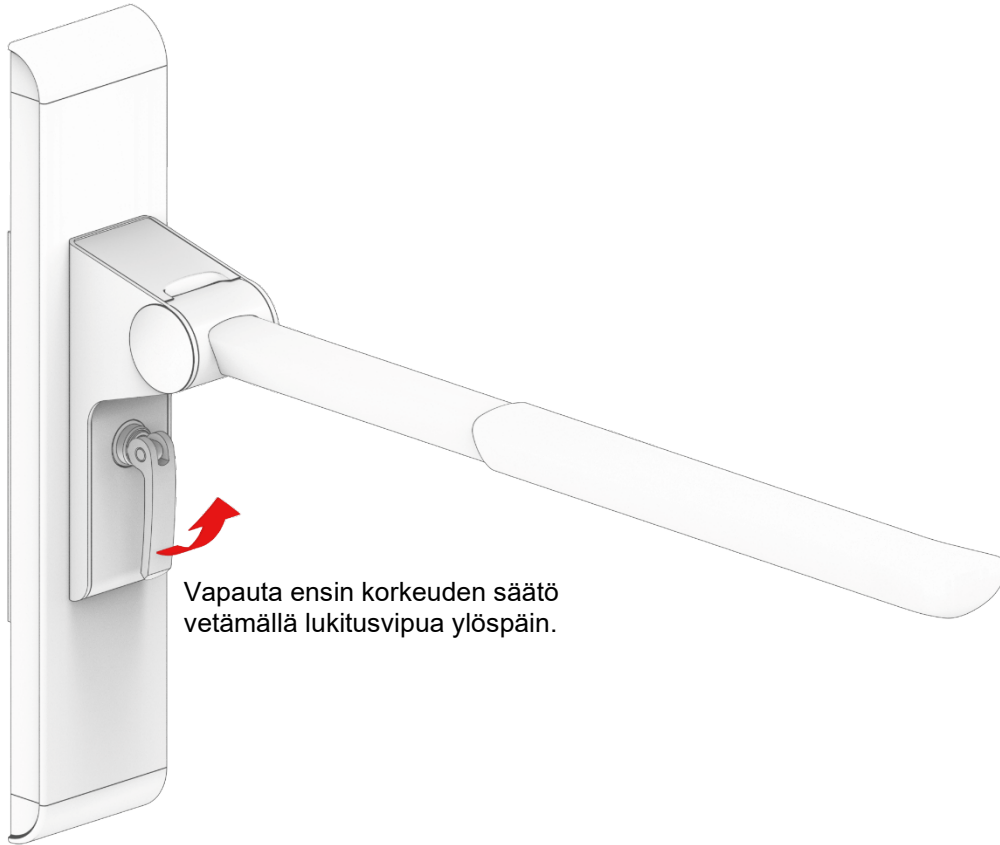


Vapauta ensin korkeuden säätö
vetämällä lukitusvipua ylöspäin.

Tukikaide voidaan nyt säätää
portaattomasti halutulle korkeudelle.

Lukitse valittu korkeus painamalla
lukitusvipua alaspäin siten, että se jää
ala-asentoon.

Korkeus on säädettävissä
portaattomasti 200 mm alueella.

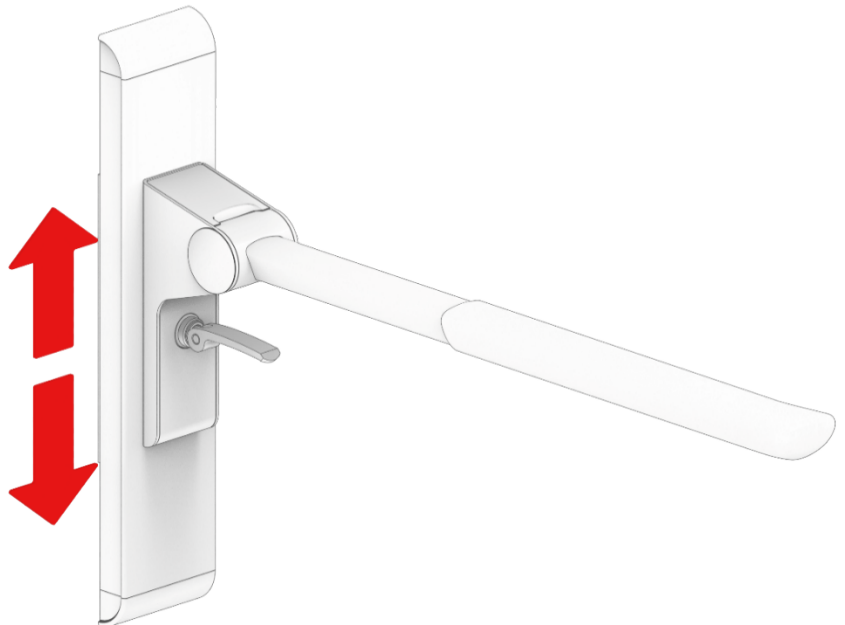

Varoitus!

Asenna tuote aina niin, että se voi liikkua vapaasti koko käyttöalueella törmäämättä esineisiin. Tästä poikkeaminen voi estää tuotteen vakauden.

5. Puhdistus

Tuote voidaan puhdistaa haalealla vedellä ja sopivalla yleispuhdistusaineella. Puhdista tuote mikrokuituliinalla tai pehmeällä sienellä. Pyyhi tuote kuivaksi.

Pintojen desinfiointiin voidaan käyttää klooripohjaisia desinfiointiaineita, kunhan tuotetietoja ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Aktiivisen kloorin pitoisuus ei kuitenkaan saa ylittää 1 000 ppm. Myös etanolipohjaisia desinfiointiaineita voidaan käyttää, kunhan tuotetietoja ja turvallisuusohjeita noudatetaan.

Ropox on testannut seuraavat tuotteet, ja niitä voidaan käyttää, kunhan ne laimennetaan tuotteen ohjeiden mukaisesti.

5.1 Ennalta hyväksytyt desinfiointiaineet

Kauppanimi	Liutus
Diversey Suma Tab D4	1 000 ppm
Rodalon ®	Etanoli 70 % v/v

Pyyhi tuote välittömästi puhdistuksen tai desinfioinnin jälkeen ensin veteen kastetulla ja väännetyllä liinalla ja lopuksi kuivalla pyyhkeellä, sillä tuote voi muuten värjäytyä tai tahraantua ja pintakäsittely voi vaurioitua. Huomaa, että tuotteen kiilto ja väri haalistuvat jonkin verran pitkäaikaisessa käytössä normaaleilla puhdistusväleillä. Tuote voidaan desinfioida tästä riippumatta.

	Huomaa! Älä käytä hankaavia aineita sisältäviä puhdistusaineita, kuten hankausjauhetta, teräsvillaa tai hankaussientä. Tätä tuotetta ei ole suunniteltu steriloitavaksi. Tavallisen puhdistuksen ylittävä autoklavointi ja sterilointi voivat muuttaa tuotteen turvallisuutta ja toimintaa.
--	--

6. Huolto

Korkeudensäätökisko on huoltovapaa. Turvallisuussyistä on suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti kaikki ruuviliitokset ja liikkuvat osat sen varmistamiseksi, ettei mikään osa ole löysällä, ja että seinäkiinnitykset ovat ehjät.

	Huomaa! Säännöllisen huollon laiminlyönti voi johtaa tuotteen toiminnan ja turvallisuuden heikkenemiseen.
---	---

7. Ympäristönäkökohdat

Tuotetta ei ole tarkoitettu hävitettäväksi yhdyskuntajätteenä. Jätehuollon on huolehdittava osien asianmukaisesta purkamisesta, lajittelusta ja hävittämisestä.



Osa	Hävittämissuositus
Lukitusvipu	Metalli
Seinäkannatin	Metalli
Etulevy	Metalli
Päätylevyt	Jäännösjäte

8. Onnettomuuksien/tapaturmien raportointi

Tämän tuotteen valmistaja suosittelee, että kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä onnettomuuksista/tapaturmista, jotka täyttävät kaikki jäljempänä mainitut kriteerit, ilmoitetaan sekä asianomaiselle viranomaiselle että valmistajalle.

1. On sattunut – tai olisi voinut sattua – onnettomuus/tapaturma.
2. Lääkinnällisen laitteen katsotaan vaikuttaneen tapahtumaan, ja
3. onnettomuus/tapaturma johti – tai olisi voinut johtaa – johonkin seuraavista:
 - Kuolema – potilas, käyttäjä tai kolmas osapuoli kuolee.
 - Potilaan, käyttäjän tai kolmannen osapuolen terveydentila heikkenee vakavasti, mukaan lukien:
 - 1. Hengenvaarallinen sairaus
 - 2. Pysyvä tai vakava vamma
 - 3. Välttämätön lääketieteellinen tai kirurginen hoito hengenvaarallisen sairauden, pysyvän vamman tai vakavan vamman ehkäisemiseksi.
 - 4. Sikiön kuolema, sikiövaurio tai synnynnäiset poikkeavuudet.

Väinö Korpinen Oy

Sinikalliontie 3
FI-02630 Espoo
Puhelin: +358 9 5491 4400
Sähköposti: korpinen@korpinen.com