

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA APUVÄLINEET

KORPINEN

ASUNNON MUUTOSTYÖT JA APUVÄLINEET

SISÄÄNKÄYNTI JA KYNNYKSET

KIINTEÄT RAMPIT	.6
RULLARAMPPI	.8
SALKKURAMPPI	.11
EXCELLENT-KYNNYKSET	.13
KYNNYKSET JA KYNNYSLUISKAT	.15
APUVÄLINESUOJA.	.16

KYLPYHUONE

BALANCE.	.20
LIFT.	.24
GAIUS-KYLPYHUONEET	.28
ESTEETÖN SUIHKUKAAPPI	.32
BIDÉ	.33

KEITTIÖ

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ ROPOX-KEITTIÖ.	.40
LIESIVAHTI.	.48

KODIN MUUT TILAT

GRIPPO-NOUSUTANKO	.52
NOUSUTUET	.62
TERAPIAPÖYDÄT	.64
TYÖTUOLIT	.78
HUMAN CARE-NOSTINRATKAISUT.	.80
NOSTINLIINAT	.88
ALL-IN-ONE-NOSTIMET	.96

Pidätämme oikeudet tuote- ja mittamuutoksiin. Lisä- ja tuotetietoa löytyy nettisivuilta.

KORPINEN

SISÄÄNKÄYNTI JA

KYNNYKSET

LUISKAT

Sisäänkäyntien esteettömyyttä ratkaistaessa tulee ottaa huomioon luiskan käyttäjät. Käytetäänkö luiskaa pyörätuolilla vai rollaattorilla ja kuinka käyttötärpeen ajatellaan muuttuvan tulevaisuudessa?

Suosittelava luiskan jyrkkyys on 8 % (1:12,5). Tämä tarkoittaa 8 cm nousua yhden metrin matkalle luiskaa. Tyypillinen kolmen askelman nousu on 40 cm ja tähän sopiva 8 % luiska on pituudeltaan 5 metriä. 8 % luiskassa tulee olla lepota-sanne aina 5 metrin välein.

Kun luiska rakennetaan 5 % (1:20) jyrkkyydelle lepotasannetta ei välttämättä tarvita. Kolmen askelman nousu on 40 cm ja tähän sopiva 5 % luiska on pituudeltaan 9 metriä. Rollaattorilla pystyy käyttäjästä riippuen kulkemaan noin 15 % jyrkkää luiskaa. Yli 20 % jyrkkää luiskaa ei tulisi koskaan tehdä.

Korkeusero cm	Nousuprosentit ja rampin pituus metriä				
	5 %	8 %	10 %	15 %	20 %
10	2,00	1,25	1,00	0,67	0,50
20	4,00	2,50	2,00	1,33	1,00
30	6,00	3,75	3,00	2,00	1,50
40	8,00	5,00	4,00	2,66	2,00
50	10,00	6,25	5,00	3,33	2,50
60	12,00	7,50	6,00	4,00	3,00
70	14,00	8,75	7,00	4,66	3,50
80	16,00	10,00	8,00	5,33	4,00

Oven edustalla on hyvä olla tasanne helpottamaan sisäänkäyntiä. Ovi tulee saada auki turvallisesti ja tasanteella tulee olla riittävästi turvallista tilaa, kun ovea avataan. Vapaata tilaa on hyvä olla 150 x 150 cm.

Kaiteiden osalta tulee muistaa tarve käyttää kaidetta molempiin suuntiin. Kaide on pakollinen, kun putoamiskorkeutta on yli 50 cm.

KYNNYKSIEN LUISKAUS

Jo yhden senttimetrin kynnyks on vaikea ylitettävä apuvälineen käyttäjälle. Sisätiloissa kynnykset tulisi mahdollisuuksien mukaan poistaa tai luiskata. Kun kynnyksien poistaminen ei ole mahdollista kynnykset voidaan luiskata molemmin puolin.

Kynnysluiskien avulla kynnyksien ylittäminen mahdollistetaan omatoimisella apuvälineillä käyttävälle henkilölle.

Kynnysluiskalla on tärkeää päästä mahdollisimman lähelle kynnyksen korkeutta, mutta ei yhtään yli. Ulkotiloissa kynnyksien materiaali tulee olla hyvin jalan alla pitävää materiaalia.

KIIENTEÄT RAMPIT	6
RULLARAMPPI	8
SALKKURAMPPI	11
EXCELLENT-KYNNYKSET	13
KYNNYKSET JA KYNNYSLUISKAT	15
APUVÄLINESUOJA.	16

Kiinteät rampit ja luiskaparit

Kiinteät rampit

Kvistbergan kiinteiden ramppien avulla on tehty esteettömiä sisäänkäyntejä vuosikymmenien ajan. Kvistbergan rampit on valmistettu alumiinista ja ne ovat kestäviä sekä helppoja asentaa.

Kvistbergan kiinteiden ramppien avulla ratkaistaan sisäänkäynnit helposti ja nopeasti. Lopputulos on tyylikäs ja kestävä.

Rampin pituutta voidaan säätää liittämällä osia yhteen.



KVISTBERGA

Perfolight-luiskaparit

Kvistbergan Perfolight-luiskat ovat keveitä käyttää ja ottaa mukaan. Luiskassa on kantokahva ja lukitus, joka helpottaa luiskien käsittelyä.

Tuotevaihtoehtoina on teleskooppiset luiskat, taitettavat luiskat, teleskooppisen ja taitettavan luiskan yhdistelmän tai kokonaan kiinteät luiskat.



Kvistberga-kiinteät rampit

Kvistbergan kiinteiden alumiiniramppien avulla voidaan varmistaa turvallinen ja esteetön sisäänkäynti kaikille. Kvistberga-ramppi valmistetaan alumiinista ja ne ovat kevyitä, kestäviä sekä helppoja asentaa.

Kvistbergan alumiinirampit voidaan asentaa aina uudelleen eri kohteisiin, kun tarve rampin käytölle loppuu. Osat sopivat toisiinsa ja alumiinisten tuotteiden keveys helpottaa rampin siirtämistä ja varastoimista.

Kvistberga rampit rakentuvat toisiinsa kiinnitettävistä elementeistä: suorista luiskista, kääntötasoista, ylä- ja alaluiskista, kaiteista ja säädettävistä tukijaloista.

Rampin pituutta voidaan säätää liittämällä osia yhteen. Tehdessä yli 6 metrin pituista ramppia, tulee ramppiin tehdä lepotasanne. Kvistbergan ramppien sisäleveys on 90 cm.

Rampin tasot

Kvistbergan rampin tasoja voidaan käyttää ulko-oven edessä. Tasoilla voidaan kääntää rampin kulkusuuntaa tai tasoja voidaan käyttää pidempien ramppien lepotasanteena. Tasot ovat keveää alumiinia ja ne on mahdollista varustaa kaiteilla. Tasoja on kolmea eri kokoa, joista kaikki soveltuvat myös oven avaamista helpottaviksi tasanteiksi.

Kaiteet

Kvistbergan ramppeihin saadaan kiinnitettyä tukikaiteet joko toiselle tai molemmille puolille. Tukikaiteita ei aina tarvita, mutta ne lisäävät turvallisuutta matalissakin luiskissa. Kaiteet voidaan asentaa myös jälkikäteen.

Kaide tulee rakentaa, kun putoamiskorkeus ylittää 50 cm ja kun on olemassa putoamisen tai harhaanastumisen vaara.

Ylä- ja alaluiska

Rampin yläpää nojaa tasanteeseen yläluiskan avulla. Ramppia ei tarvitse kiinnittää rakenteisiin, mutta se on tarvittaessa mahdollista. Alaluiskalla varmistetaan riittävän loiva rampille siirtyminen.


Yläluiskan mitat ovat 15*90 cm
Alaluiska mitat ovat 45*90 cm

Perfolight-luiskaparit

Kevyt luiskapari on ihanteellinen ratkaisu esteiden ylittämiseen. Perfolight soveltuu erinomaisesti pyörätuolikäyttöön, tavarankuljetukseen tai vaikka moottoripyörän siirtämiseen.

Perfolight on nopea asentaa, helppo kuljettaa ja kevyt käyttää. Luiskassa on kantokahva ja lukitus helpottamaan luiskien käyttämistä.

Valikoimasta löytyy taitettava tai teleskooppinen ramppi, erikoislevyä E-malli sähköpyörätuoleille, joissa etu- ja takarenkaat ovat eri leveydellä.

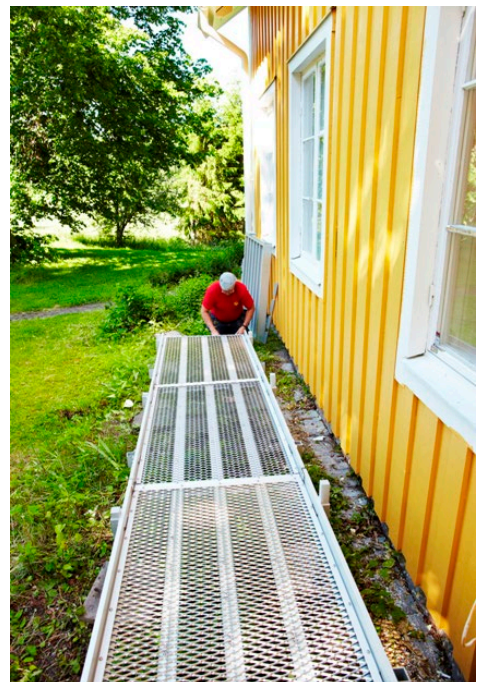

Rullaramppi

- Siirrettävä

- Monipuolinen

- Helppokäyttöinen



Rullaramppi on erinomainen ratkaisu esteiden ylittämiseen. Rullaramppi on erittäin tukeva ja kevyt alumiininen ratkaisu rollaattorille, pyörätuolille, sähkömopolle ja tavarankuljetukseen.

Rullaramppi asetetaan portaiden tai korkean kynnyksen päälle. Rullaramppi pysyy normaalikäytössä paikoillaan ilman kiinnitystä. Rullarampin kulkutaso on muotoiltu jalan ja pyörän alla pitäväksi, sekä vettä ja lunta läpäiseväksi.

Rullaramppia voidaan käyttää kotiloissa kiinteänä ramppina ja sen voi ottaa rullattuna mukaan autoon. Matkalla rullaramppi on siirrettävissä esteeltä toiselle. Ramppi toimii kotona, mökillä, vierailuilla ystävien luona ja se voidaan kiinnittää myös autoon. Ramppia voidaan tarpeen mukaan myös jatkaa tai lyhentää.

Rakenteensa (76*214 cm) ansiosta rullarampin kantavuus on jopa 300 kg ja paino vain 17,5 kg.



Rampin materiaalina on anodisoitu erikoisvahva alumiini ja sillä on 10 vuoden takuu!

Rullaramppi sopii myös autoon luiskaksi. Rullaramppi voidaan toimittaa autokäyttöön taittevana ramppina tai automaattisesti sähköisesti taittuvana mallina.

Rullaramppi toimii erinomaisesti myös tavarankuljetuksessa kuljettajien apuna.



Mallisto

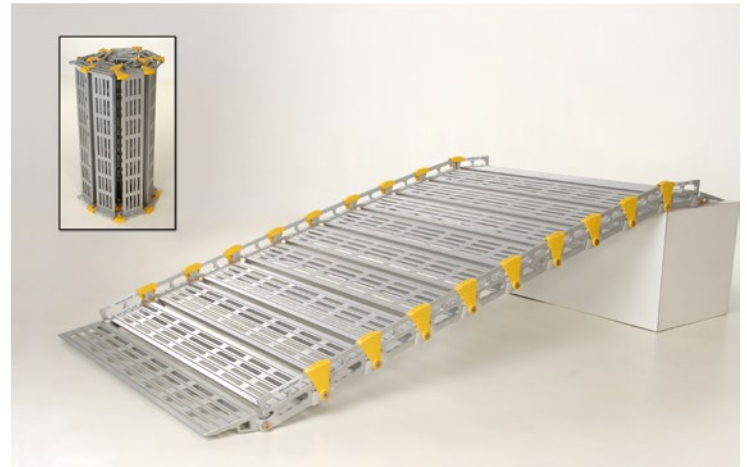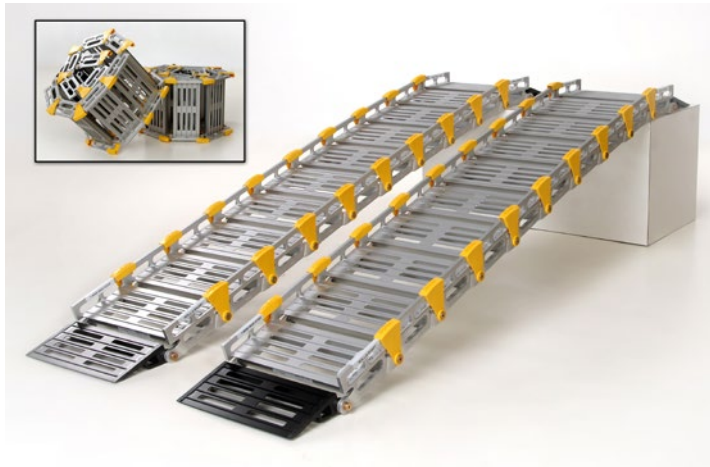

leveys cm	kokonaispituus luiskineen kg	kantavan osan pituus cm	kantavuus kg	paino kg
30,5 pari	91	61	900	8,2
	122	91	900	11,5
	153	122	900	14,8
	183	153	800	18,1
	214	183	600	21,4
	244	214	600	23,1
	275	244	600	24,7
	305	275	600*	28,0
	336	305	600*	31,5
	366	336	600*	34,6
	397	366	500*	41,2
76,2 cm	91	61	450	7,8
	122	91	450	10,3
	153	122	450	12,7
	183	153	400	15,1
	214	183	300	17,5
	244	214	300	19,9
	275	244	240	22,4
	305	275	300*	24,8
	336	305	300*	27,2
	366	336	300*	29,6
	397	366	250*	32
91,4	91	61	450	8,2
	122	91	450	11,0
	153	122	450	13,4
	183	153	400	16,6
	214	183	300	19,4
	244	214	280	22,2
	275	244	240	25,0
	305	275	280*	27,8
	336	305	280*	30,6
	366	336	280*	33,4
	397	366	240*	36,2


* kantavuus tukijalalla varustettuna

Rullaramppia on kolmea leveyttä 30,5 cm, 76,2 cm, ja 91,4 cm.

Rullarampin pituuden ratkaisee tarve ja sitä voidaan jatkaa lisäpalojen avulla joustavasti.

Kun rullarampista tehdään yli 2,75 metrin kokonaisuuksia, käytetään rampin alla säädettäviä tukijalkoja.

Pidempi ramppi voidaan katkaista osiin, näin rampista saadaan lyhyempi ja helpommin siirrettävä. Katkaisua helpottaa nopeat pikairrotussokat.

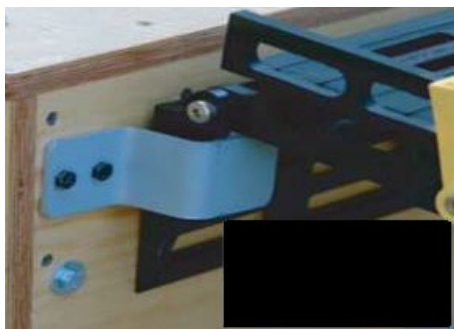


Kiinnityskulmat pari #3150 Rampin nopea ja helppo kiinnitys ja irroitus, rampin asennus tason korkeudelle.



Pikairrotussokat pari #3250 helpottaa pitkän rampin katkaisua pienempiin osiin.



Tukijalat pari #6050-25-35 cm, 40-55 cm, 60-90 cm. Tuki-jalkapari yli 2,75 cm rampille. Pidempiin ramppeihin tukijalka 1,8 metrin välein.

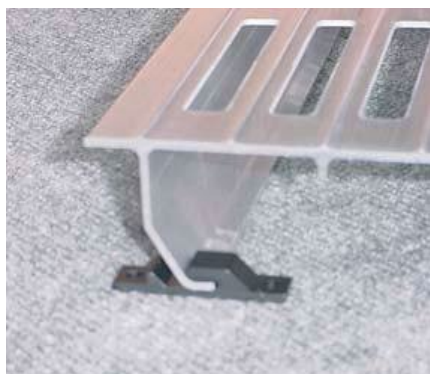

Lavakiinnike pari, #3415 Pieni kiinnityspala rampin erityiseen paikalleen tukemiseen.



Lisäelementti, 30,5 cm, 30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm Rullaramppia voidaan jatkaa lisäelementtien avulla.



Lisäluiska rullaramppiin 30,5 cm, 76,2 cm, 91,5 cm Lisäluiska nopeuttaa rampin käyttöä lyhennettynä ramppina.



Lähestymisluisa kantava #3212, 3235, 3236. Varmistaa matilan lähestymisen rampin yläpäässä.



Rullaramppi autoon. Rampin voi kiinnittää autoon käsikäyttöisenä tai sähköisesti toimivana. Samaa ramppia on mahdollista käyttää myös siirrettävänä ramppina.



Kaide, mitoitettu. Rullaramppiin on mahdollista kiinnittää myös kaiteet.

Salkkuramppi

Salkkuramppi

Salkkuramppi sopii loistavasti yhden tai kahden portaan ylittämiseen sekä rampin nopeaan asentamiseen. Ramppi sopii hyvin pyörätuolin, lastenrattaiden sekä sähkökäyttöisten apuvälineiden avuksi.

Salkkuramppi taittuu keskeltä ja vie säilytyksessä pystyssä vain vähän tilaa. Tarranauhat pitävät rampin kasassa ja helpottavat rampin siirtämistä.


Salkkuramppi on ihanteellinen ravintoloiden ja kivijalkamyymälöiden rampiksi. Se on helppo ja nopea asentaa paikalleen ja siirtää pois.

Karhennettu pinta varmistaa rampin turvallisen käytön. Sininen väri takaa huomion.


Asennus on helppoa. Rampin yläpää asetetaan ylätasoon päälle, jolloin ramppi on valmis käytettäväksi.

Mitat avattun: ulkomitta 81,5 cm
sisämitta 77,5 cm

Kantavuus 300 kg.

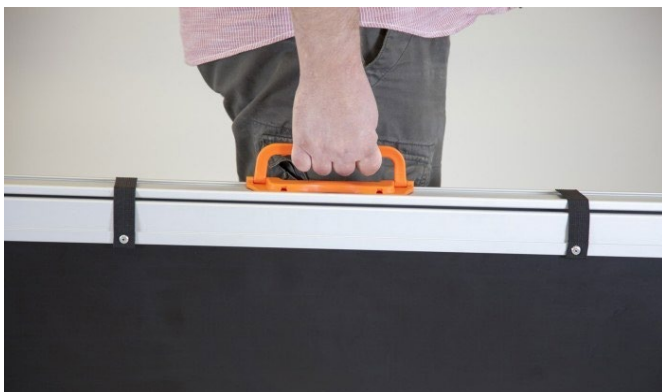

Tuote nro	Pituus cm	Leveys cm Ulko / Sisä	Paino kg
AE60	60	81,5 / 77,5	6
AE90	90	81,5 / 77,5	9
AE120	120	81,5 / 77,5	13
AE150	150	81,5 / 77,5	16
AE180	180	81,5 / 77,5	19
AE210	210	81,5 / 77,5	21
AE240	240	81,5 / 77,5	25

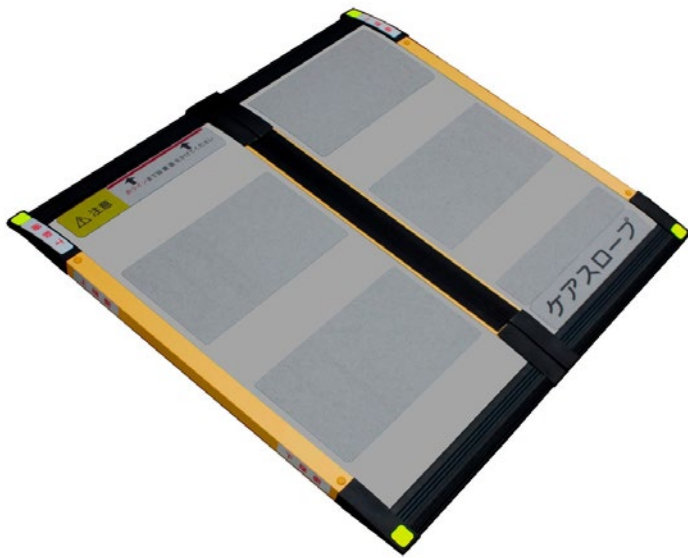

Careslope-salkkuramppi

Erittäin kevyt Careslope-salkkuramppi on helppo käyttää ja siirtää paikasta toiseen.

Valmistettu lasikuidusta ja alumiinista, pituudet 240 ja 285 lisäksi hiilikuitua. Luistamaton kulkupinta on pehmeää materiaalia.



Tuotevaihtoehdot

Tuote nro	Pituus cm	Leveys	Paino kg
CS-65	65	70	3
CS-100	100	70	5
CS-120	120	70	6
CS-150	150	70	8
CS-175	175	70	9
CS-200	200	70	10
CS-240	240	70	12
CS-285	285	70	15



Excellent-kynnysluiskat

Excellent systems


Excellent-osien avulla kynnyksien luiskaukset valmistuvat helposti. Osien avulla löytyy jokaiseen kynnykseen sopivan korkuinen luiskaus. Excellent-luiskat on valmistettu hajuttomasta, myrkyttömästä ja kierrätettävästä LDPE -muovista.

Valikoimassamme on valmiita kynnysluiskia erikorkuisille kynnyksille. Excellent-luiskia voidaan lisäksi muokata juuri oikean korkuiseksi, levyiseksi tai syvyiseksi. Kynnysluiskiin voidaan liittää säätöpaloja ja ulkokulmaan lähestymistä helpottava luiskaus.


Lisävarusteita ovat mm. tarrakiinnitys, ulkokulmat sekä säätöpala jolla luiskan korkeutta voidaan nostaa 2-16 mm korkeammalle.

Excellent-osilla voidaan tehdä jopa tasojen korotuksia. Parvekkeen tai terassin korotus käy helposti 54 mm korotuspaloilla.

Excellent-osia toimitetaan myös tukkupakkauksina.

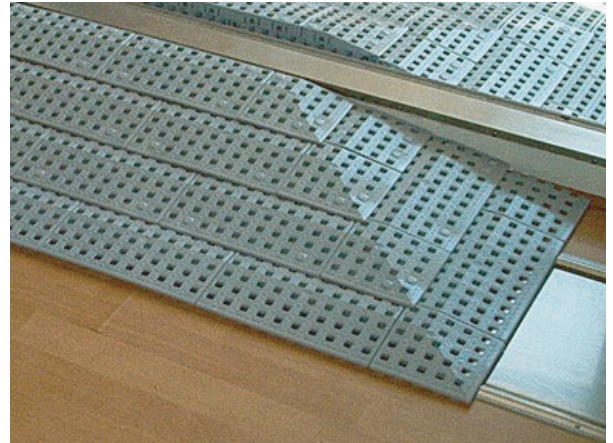

säätöpala

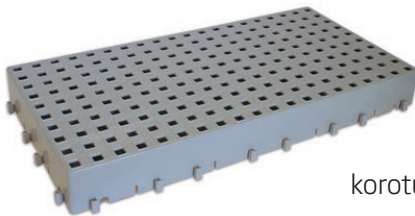

korotuspala



tarrakiinnitys

Valmiit Excellent kynnysluiskat

tuotenro	korkeus cm	leveys cm	syvyys cm
Ex12660	1,8	75	12,5
Ex12658	3,6	75	25
Ex12654	5,4	75	37,5
Ex12655	7,2	75	50
EX12662	9	75	62,5



Kiinteä Excellent Quickramp

Kiinteä Excellent Quickramp-luiska on hyvä ratkaisu tavallisten kynnysten ylittämiseen. Excellent Quickramp-luiska on valmistettu LDPE-muovista. Luiska kiinnitetään Quickpad-tarrojen avulla.

Tuotevaihtoehdot

Tuote nro	Korkeus	Leveys cm	Syvyys cm
Qramp10 H	Excellent Quickramp 10 mm + 4 tarraa	100	10 cm
Qramp14 H	Excellent Quickramp 14 mm + 4 tarraa	100	12,5 cm
Qramp18 H	Excellent Quickramp 18 mm + 4 tarraa	100	15 cm
Qramp24 H	Excellent Quickramp 24 mm + 4 tarraa	100	15 cm
Qramp32 H	Excellent Quickramp 32 mm + 4 tarraa	100	20 cm
Qramp40 H	Excellent Quickramp 40 mm + 4 tarraa	100	25 cm
Qramp48 H	Excellent Quickramp 48 mm + 4 tarraa	100	25 cm
Qramp60 H	Excellent Quickramp 60 mm + 4 tarraa	100	32,5 cm

Kynnykset ja kynnysluiskat

Alumiinikynnys

Matalat ja leveät alumiinikynnykset asennetaan poistettavan kynnyksen tilalle. Alumiinikynnys kiinnitetään ruuveilla tai rakennusliimalla. Väre kulta ja ruskea.

Listan pituus : 1000 mm tai 1800 mm
Listan leveys: 80, 95, 110, 125, 140, 170, 200 mm
Korkeus 6 mm



Kynnysluiska

Alumiininen kynnysluiska mahdollistaa esteettömän kulun kun kynnystä ei poisteta. Kynnysluiska kiinnitetään ruuveilla kynnyksen reunaan oikeaan korkeuteen. Väreinä kulta, ruskea ja tumma puu.

Listan pituus : 1000 mm
Listan leveys: 150, 245, 325 mm
Minimikorkeus: 15 mm



Tulvakynnys

Tulvakynnys sopii kylpyhuoneen ovelle, tai muuhun tilaan jossa halutaan rajata veden valumista. Tulvakynnys painuu jalan ja pyörän alla alas ja palautuu muotoonsa.


Listan pituus 110 cm



Alumiininen kynnyksen ylityslevy

Ylityslevy asetetaan paikoilleen kynnyksen päälle oven ollessa auki. Levy joustaa ottaen tuen kynnyksestä.

Leveys: 770 mm
Pituus: 550 mm
Korkeus: 35-45 mm.

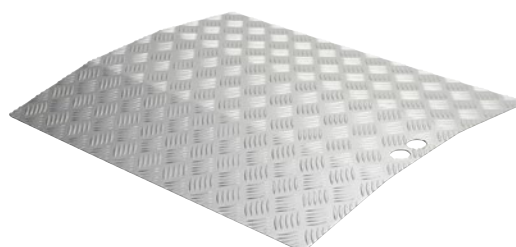

Apuvälinesuoja

Säilytystila apuvälineille

Sähköiset liikkumisen apuvälineet tarvitsevat suojan sateelta, pakkaselta ja ilkivallalta. Apuvälinesuoja antaa apuvälineille hyvän ja turvallisen säilytyspaikan, jossa akut voidaan ladata valmiiksi seuraavaa ajokertaa varten.

Apuvälinesuoja on helppo ja turvallinen käyttää. Kannen avara muotoilu antaa mahdollisuuden ajaa sisälle etuperin tai takaperin.

Kansi toimii sähköisesti kaukosäätimen avulla. Valot syttyvät automaattisesti ja lämmitin pitää sisätilan sopivan lämpöisenä.



Turvallisuus

Apuvälinesuojan sivussa on lukittava luukku. Sivuluukun kautta voidaan käyttää sähköistä käyttöpainiketta tai kevennettyä kampea kannen avaamiseen kaukosäätimen sijasta.

Asennus

Apuvälinesuoja sijoitetaan tasaiselle paikalle. Kulmien kohdalla tulee olla kovat tuet, esimerkiksi betonilaatat. Lattiassa on sisäpuolelta säädettävät jalat, joiden avulla apuvälinesuoja säädetään suoraan. Suojaan ajetaan luiskan avulla.



Apuvälinesuojan lisätiedot

Mitat	Ulkomitat	Sisämitat
Leveys	1866 mm	1700 mm
Syvyys	1710 mm	1640 mm
Korkeus	1600 mm	1485 mm
Avattuna	2300 mm	1950 mm

Ajoluiskan leveys 1675 mm
Ajoluiskan syvyys 500, 850 tai 1200 mm
Paino: 195 kg

Virransyöttö: 220-240 V AC / 10 A / 50 Hz.
Pistotulppaliitäntä vikavirtasuojattuun pistorasiaan.

Väri: harmaa tai vihreä

KYLPYHUONE

Kylpyhuone- ja WC-tilat tulevat olla esteettömiä, jotta kotona voidaan asua mahdollisimman pitkään.

Hyvin usein erityisesti kylpyhuoneessa pärjääminen muodostuu esteeksi asua vanhassa kodissa. Kylpyhuoneessa tulee olla riittävästi tilaa apuvälineille, mutta toisinaan tukikaiteet sekä tukikahvat pitää olla lähellä käyttäjää. Käyttäjien tarpeet ovat erilaisia.

Erilaisten tukikaiteiden ja kahvojen lisääminen on helpoin tapa lisätä omatoimisuutta kylpyhuoneessa. Joskus kylpyhuoneen seinään ei saa kiinnittää tukikahvaa, sitä varten on olemassa useita vaihtoehtoja tukeutumiseen ja WC-istuimelta nousemisen avuksi. Lisäksi hygienian ylläpitämiseen on vaihtoehtoina automaattisia bide-ratkaisuja.

Ammeen tai korkealaitaisen suihkukaapin vaihtaminen Esteettömään suihkukaappiin on kustannustehokas tapa lisätä omatoimisuutta. Parhaimmillaan ammeen vaihtaminen Esteettömään suihkukaappiin tapahtuu yhden päivän aikana, eikä asukkaan tarvitse muuttaa väistötiloihin.

Esteettömyyttä lisäävät käsienpesualtaat mahdollistavat altaaseen tukeutumisen ja näin lisäävät omatoimisuutta. Altaat voivat olla myös korkeussäädettäviä ja soveltua hyvin koko perheelle.

BALANCE.	20
LIFT.	24
GAIUS-KYLPYHUONEET	28
ESTEETÖN SUIHKUKAAPPI	32
BIDÉ	33

Balance



Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin



Vakautta ja turvallisuutta istumahetkeen

Balance-WC-tukiratkaisu on suunniteltu lapsille ja aikuisille, joiden on vaikea säilyttää tasapaino seisoma- ja istuma-asennossa. Käsi- ja jalkatuet tukevat turvallisesti koko kehoa ja tukikahvat helpottavat siirtymistä WC-istuimelle ja siltä pois.

Balance-WC-tukiratkaisu on sekä helppo asentaa että käyttää. Sen voi tarvittaessa ottaa mukaan pidemmille matkoille. Tuet on helppo kääntää sivuun, kun niitä ei tarvita.

Tilanteita, joissa Balance antaa vakautta ja turvallisuutta

- Etummaiset tukikahvat antavat vakaan tuen noustaessa ja siirryttäessä istuimelle ennen wc-käyntiä ja sen jälkeen.
- Jalkatuen, sivuilla olevien käsitukien ja edessä olevien tukikahvojen ansiosta istuminen on turvallista.
- Jalkatuki helpottaa istumista.
- Useiden lisävarusteiden ja moduulirakenteen ansiosta Balance on helppo säätää yksilöllisesti käyttäjän mukaan.



Perheen pienimmille jalkatuen päälle voidaan asettaa irrallinen minijakkara WC-istuimelle kapuamisen helpottamiseksi. Se antaa hyvän tuen myös istuttaessa.



Balance-lisävarusteena pöytälevy antaa mahdollisuuden keskittyä muuhun toimintoon istumisen aikana.



Balance-lisävarusteena selkätyyny ja WC-istuimen aukon pienentäjä

Balance-lisävarusteena RIK-jalkatuki ja avustajan jakkara



Balance on käyttäjien valinta

- Sopii koko perheelle.
- Sopii kaikille ikään ja kokoon katsomatta.
- Voidaan ottaa mukaan kodin ulkopuolelle.
- Helppo mukauttaa käyttäjälle sopivaksi.
- Valmistettu lakatusta ruostumattomasta teräksestä.
- Kumiosat polyuretaania, eivät sisällä lateksia.
- Yhteensopiva Bidetten, pesevän wc-istuimen, kanssa.





Malli 1, tuotenro SC10101

- Sivuilla suorat käsituet, joiden väli 425 mm
- Jalkatuki
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 2, tuotenro SC10102

- Sivuilla suorat käsituet, joiden väli 425 mm
- Jalkatuki
- Edessä tukikahvat
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 3, tuotenro SC10103

- Sivuilla suorat käsituet, joiden väli 425 mm
- Edessä tukikahvat
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella
- Tukitanko, jalkatuen asennusmahdollisuus



Malli 4, tuotenro SC10104

- Sivuilla taivutettut käsituet, joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
- Jalkatuki
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 5, tuotenro SC10105

- Sivuilla taivutettut käsituet, joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
- Jalkatuki
- Edessä tukikahvat
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 6, tuotenro SC10106

- Sivuilla taivutettut käsituet, joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
- Edessä tukikahvat
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella
- Tukitanko, jalkatuen asennusmahdollisuus



Malli 7, tuotenro SC10107

- Sivuilla eteen taivutettut käsituet, joiden väli 425 mm
- Jalkatuki
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 8, tuotenro SC10108

- Sivuilla eteen taivutettut käsituet, joiden väli 425 mm
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella
- Tukitanko, jalkatuen asennusmahdollisuus



Malli 9, tuotenro SC10109

- Sivuilla taivutettut, lyhyet käsituet, joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
- Jalkatuki
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella



Malli 10, tuotenro SC10110


- Sivuilla taivutettut, lyhyet käsituet, joiden väli vaihtoehtoisesti joko 350 tai 500 mm
- Jalkatuki
- Edessä tukikahvat
- Tukiratkaisun runko ja istuinosa kannella

Osat:

Tukiratkaisun runko
Istuinosa (vakio)
Suora käsituki, pari
Taivutettu käsituki, pari
Eteen taivutettu käsituki, pari
Taivutettu käsituki, lyhyt, pari
Tukikahvat eteen, pari
Jalkatuki
Tukirauta jalkatuen tilalle


Tuotenro:

SC10002
SC10041
SC10052
SC10053
SC10051
SC10084
SC10054
SC10039
SC10038

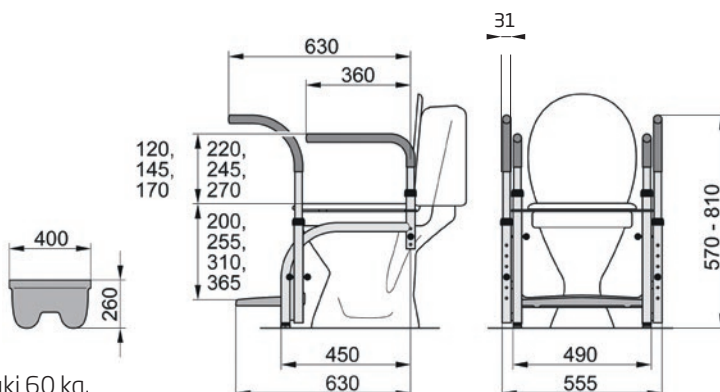


Enimmäiskuorma: Käsituet 130 kg, tukikahvat 130 kg, jalkatuki 60 kg.
CE-merkintä.

LISÄVARUSTEET

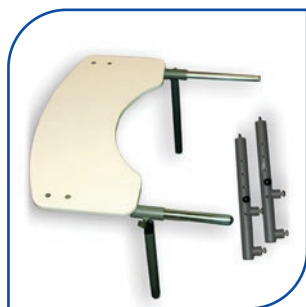

Pöytälevy

Tuotenro SC10126
600 x 315 mm

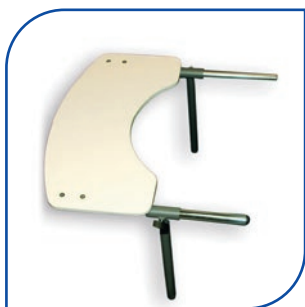

Pöytälevy

Tuotenro SC10127
600 x 315 mm



Pidennysosa runkoon

Tuotenro SC10087
Korotus 65 mm.
Myydään pareittain.



WC:n istuinosa kannella

Tuotenro SC10041
Sisämitat L 225 mm
P 273 mm




RIK-istuinlevy

Tuotenro SC10542
L 170 mm, P 340 mm



RIK-jalkatuki

Tuotenro SC10515
L 90 mm, P 160 mm

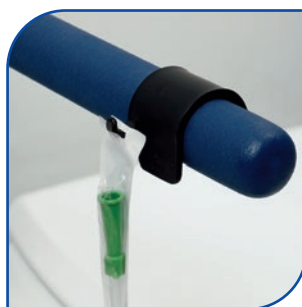

Katetripidike

Tuotenro SC10538

Katetripidike ja putki

Tuotenro SC10540



Avustajan jakkara

Tuotenro SC10541



WC-istuimen aukon pienentäjä M, tasainen

Tuotenro SC10046
L 170 mm, P 262 mm



WC-istuimen aukon pienentäjä S, tasainen

Tuotenro SC10047
L 143 mm, P 255 mm



WC-istuimen aukon pienentäjä XS

Tuotenro SC10050
L 140 mm, P 163 mm



WC-istuimen aukon pienentäjä S, korkeat reunat

Tuotenro SC10049
L 146 mm, P 193 mm



Selkätyyny

Tuotenro SC10035
K 250 mm, L 360 mm
S 100 mm



Pehmustettu istuin Sininen:

Tuotenro SC10399

Valkoinen:

Tuotenro SC10398
Sisämitta L 210 mm,
P 245 mm



Minijakkara


Tuotenro SC10132
K 100 mm, L 370 mm
S 150 mm



Selkätyyny

Tuotenro SC10035
K 250 mm, L 360 mm
S 100 mm

Lift

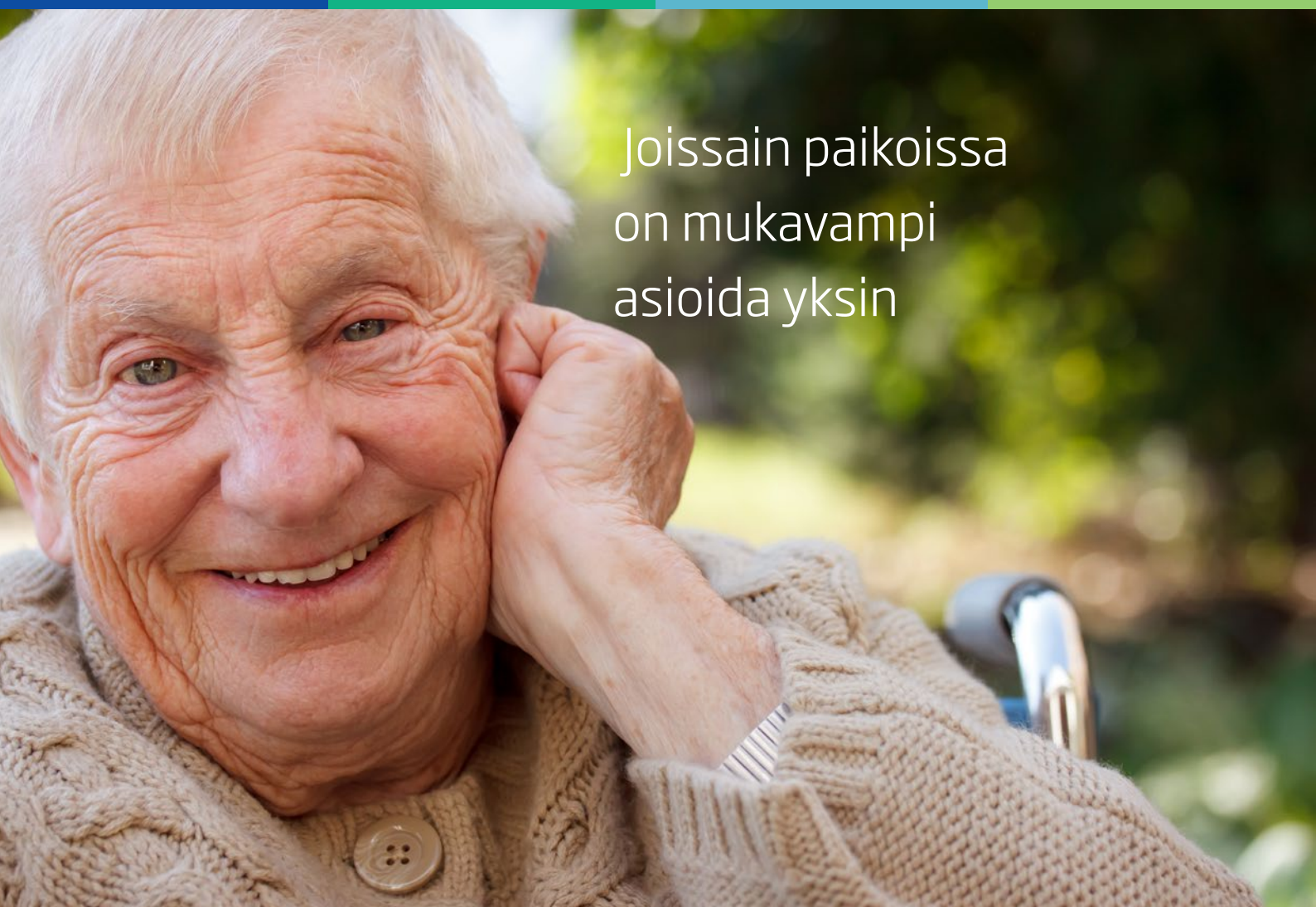

Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin



Lift-nostin - auttaa turvallisesti WC-istuimelle ja siltä pois

Lift-nostin on oikea apuväline silloin, kun heikentyneiden voimien tai tasapainon vuoksi tarvitaan apua siirtymisessä WC-istuimelle ja siltä pois.



Seisomasta istumaan ja istumasta seisomaan

Lift-nostimen nostokorkeus on välillä 300 ja 950 mm eli kaiken kokoiset ihmiset pääsevät sen avulla seisoma-asennosta istumaan ja takaisin seisomaan.

Yläasennossa istuin on mahdollista kallistaa hieman eteenpäin, joten siihen on helppo päästä. Hyvän nostokorkeuden ja sujuvan liikkeen ansiosta nostin tukee koko laskun ajan ja käyttäjän jalat ovat kaiken aikaa turvallisesti kosketuksissa lattiaan.

Alimmassa asennossa nostimen istuin on suorassa. Nostin toimii samalla tavalla, kun siirrytään taas istumasta seisomaan. Nostimen ollessa yläasennossa voidaan istuimelta kävellä suoraan pois ilman tarvetta ponnistaa ylöspäin.

Pyörätuolista istuimelle ja takaisin

Istuin lukitaan suoraan asentoon ja nostetaan tai lasketaan sellaiselle korkeudelle, että siirtyminen pyörätuolista onnistuu helposti, turvallisesti ja miellyttävästi.



Lift-nostin on käyttäjien valinta

- Riittävä nostokorkeus (950 mm) antaa hyvän tuen koko laskun ja nousun ajan myös pitkille ihmisille.
- Nostimen istuin voi olla suorassa tai kaltevassa asennossa (8 asteen kulmassa).
- Nostokapasiteetti 160 kiloa.
- Ylös kääntyvät käsituet.
- Helppo asentaa.
- Helppo puhdistaa.
- Hyvä muotoilu.
- Akkukäyttöinen.
- Yhteensopiva Bidetten, pesevän wc-istuimen, ja Gripo-nousutangon kanssa



Lift-nostin, lattiamalli

Tuotenro SC10701

Lattiamalli sijoitetaan suoraan kylpyhuoneen lattialle. Nostin kiinnitetään WC-istuimeen.




Lift-nostin, seinämalli

Tuotenro SC10702

Seinäkiinnitteinen malli kiinnitetään kylpyhuoneen seinään. Vapauttaa lattiatilaa pyörätuolille.

Tekniset tiedot:

- Nostokapasiteetti 160 kg
- Suurin nostokorkeus lattiasta 950 mm
- Kokonaispaino 31 kg
- Käyttöjännite 24 VDC (akku)
- CE-merkintä
- IP 65

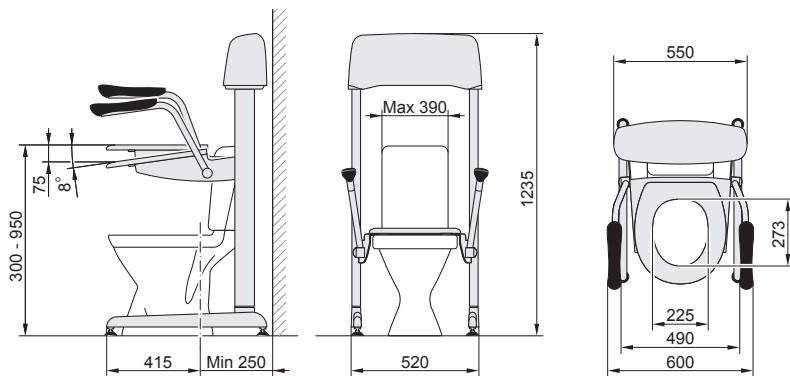

Lisävarusteita



Pehmustettu istuin Sininen:

Tuotenro SC10399


Valkoinen:

Tuotenro SC10398



Irrallinen WC-kansi

Tuotenro SC10871

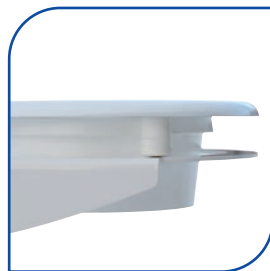

Korotettu tai coxit-istuin

Korotus 65 mm

Tuotenro SC10844



WC-istuimen aukon pienentäjä M


Tuotenro SC10046

L 170 mm, P 262 mm

Gaius-kylpyhuoneiden ideaalinen kokonaisuus perustuu ensiluokkaisiin kalusteisiin ja sekä niiden optimaaliseen sijoitteluun.

Yksityiskohdista syntyy toimiva kokonaisuus

Toimiva esteetön tila tukee itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta. Oikein suunniteltu kylpyhuone on tilaa säästävä ratkaisu, jossa kalusteet on sijoitettu toiminnan kannalta optimaalisiin paikkoihin. Avainlippu kertoo suomalaisesta osaamisesta, johon voi luottaa. Suomalaisuus näkyy Korpisen ratkaisuissa laatu- ja luotettavuutena. Asiakas voi aina luottaa, että Korpisen Gaius-tuotteet ovat tiukimpien käytettävyyden- ja turvallisuuskriteerien mukaisia.

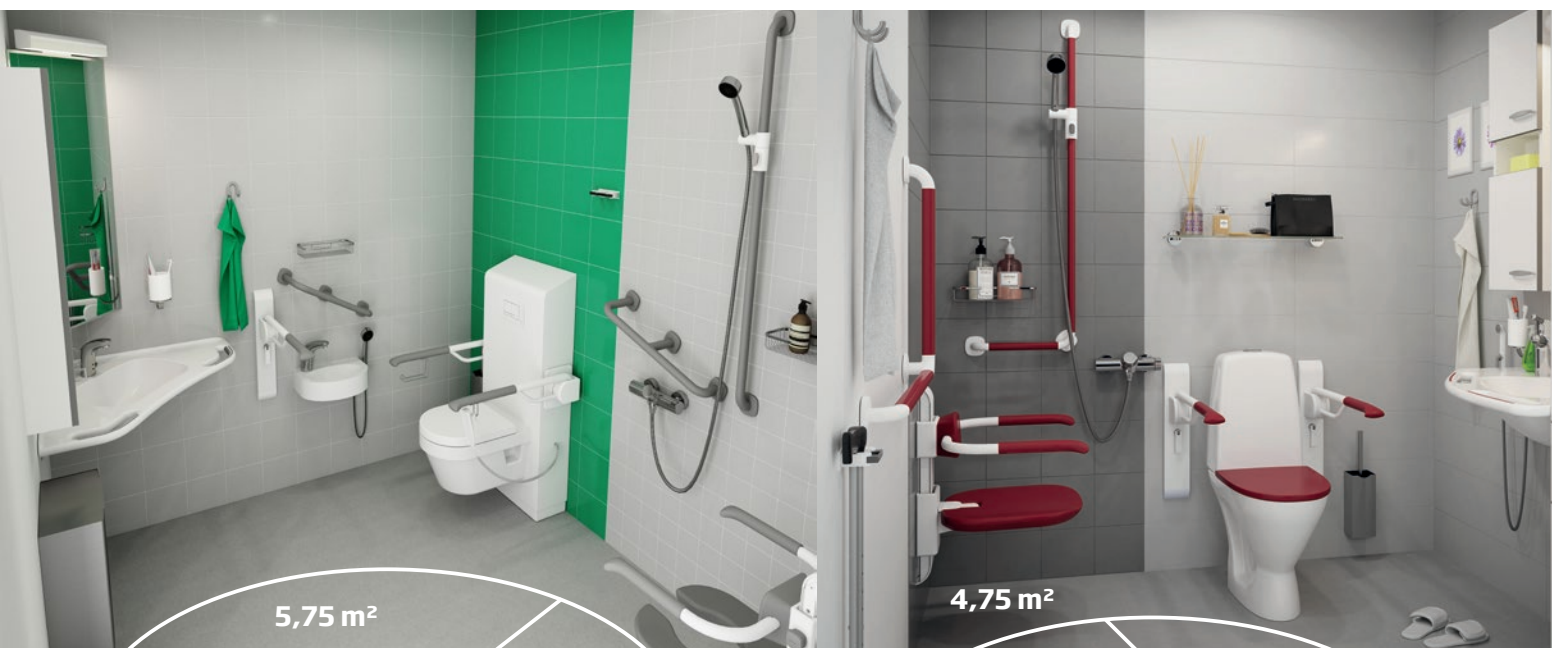

GAIUS
CARE

HOSPITAL

Toiminnallinen kylpyhuoneratkaisu vaativaan ammattikäyttöön, esimerkiksi sairaaloihin. Suunniteltu paljon apua tarvitsevien potilaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeisiin. Riittävästi tilaa suihkula- verille sekä kahdelle avustajalle ja potilasnosturille.

GAIUS
CARE

ORIGINAL

Toiminnallinen kylpyhuoneratkaisu hoivakoteihin, palvelu- taloihin ja erityisasumiseen. Suunniteltu tukemaan käyttä- jien omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumista. Riittävästi tilaa rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkumiseen.



Asiakas-
kohtaisesti
suunniteltuja
ratkaisuja
eri kokoi-
siin
tiloihin.



Riittävästi tilaa
turvalliseen
liikkumiseen.



Tukikahvat ja -kaiteet on sijoitettu
niin, että käyttäjä voi liikkua tilassa
käsiä apuna käyttäen.




Kevyt käyttää
mm. tukikaiteiden
kevennysmek-
anismien ansiosta.



Kestää käyttöä
ja kovaakin
kuormitusta.



Yksilöllinen korkeuden-
säätö vaivattomasti.

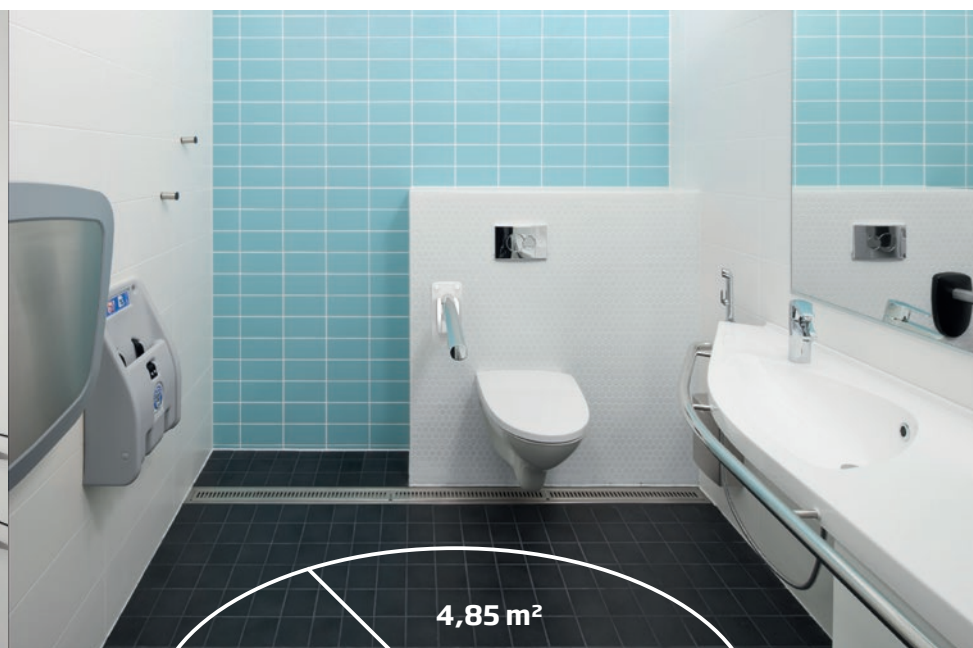

4,85 m²



4,50 m²

GAIUS
PUBLIC

PUBLIC

Esteetön ja esteettinen yleiskäyttöinen kylpyhuoneratkaisu julkisiin tiloihin. Soveltuu myös pyörätuolilla tai rollaattorilla liikkuville käyttäjille, jotka tarvitsevat avustajaa. Voidaan varustaa lastenhoidon tarpeisiin.

GAIUS
LIFE

LIFE

Esteetön ja esteettinen kylpyhuoneratkaisu koteihin. Itsenäistä elämää tukevia ja toiminnallisia ratkaisuja koko asumisen elinkaareen.

ESTEETÖN KAIKILLE PAITSI MIKROBEILLE



Tuhoaa testatusti 99,9% haitallisista mikrobeista, mukaan lukien antibioottiresistenttiä sairaalabakteereja.



Mikrobeja tuhoava ominaisuus kestää tuotteen materiaalissa sen elinkaaren ajan.



Vähentää voimakkaiden puhdistusaineiden käyttöä.



Antimikrobinen ominaisuus perustuu hopeanionien vaikuttavuuteen.

Altaat

Sense-allas

- Antimikrobinen allas on erittäin kestävä ja ekologista komposiittia.
- Saumaton ja kauttaaltaan pinnoitettu moderni allas on hygieeninen ja helppo puhdistaa.
- Kiinteät ovaalinmuotoiset kaiteet, jotka on helppo hahmottaa huomioraidoilla.
- Kiinteäasenteinen allas ei tarvitse erillisiä kannakkeita vahvan rakenteen ansiosta.
- Saatavana myös kulma-altaana.



Korkeussäädettävä WC-istuin

DUO korkeussäädettävä WC-istuin

- Sähköäätöinen WC-istuimen korkeudensäätölaite helpottaa WC:ssä käyntiä auttaen sekä käyttäjää, että henkilökuntaa.
- Tukeva rakenne kestää jopa 200 kg:n kuormituksen liikkeessä ja paikalla ollessaan 400 kg.
- Korkeudensäätöväli on 200 mm.
- Kokonaisuus voidaan toteuttaa eri mittaisilla tukikaiteilla sekä WC-istuimilla.



Tukikaiteet

Regal & Oval -tukikaide

- Moderni ja ergonomisesti muotoiltu Regal-tukikaide mahdollistaa tukevan otteen.
- Moderni ja ergonomisesti muotoiltu Oval-tukikaide mahdollistaa tukevan otteen kahdelta eri tasolta.
- Tukikaide on hygieeninen ja helposti puhdistettava rakenteensa vuoksi. Tukikaiteessa on antimikrobiset elastomeeri- ja maalipinnat.
- Kaide on kevyt ja helppo käyttää sen kevennysmekanismin vuoksi.
- Kaide on helppo säätää sopivalle korkeudelle.
- Saatavilla lisävarusteina wc-paperinpidike, hälytin- ja pidesuihkunpidike sekä rintatuki.



Suihkuistuimet

Sense-suihkuistuin


- Modernissa ja ergonomisesti muotoilussa Sense-suihkuistuimessa on antimikrobiset pinnat.
- Istuimen muotoilu mahdollistaa miellyttävän ja tukevan istuma-asennon. Pehmytintegraalimateriaali on lämmin ja miellyttävä käyttäjälle.
- Istuin nousee kevytavusteisesti ja pysyy ylhäällä mekanisminsa avulla.
- Istuimen korkeudensäätö on helppoa ilman työkaluja.
- Koteloitu yhden kiskon korkeudensäätö helpottaa puhdistusta ja oikeaoppista asentamista.
- Istuimen kuormituskestävyys on vähintään 400 kg.



Suihku- ja tukikahvat

Solo/Modular suihku- ja tukikahvat & Solo E-kahva

- Solo (yhtenäinen) / Modular (modulaarinen) on saumaton tukikahva, jossa on antimikrobinen pinnoite.
- Solo E-kahvasta saa luonnollisen ja pitävän tuen monella eri otteella ja monesta eri suunnasta.
- Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen.
- Peitelaitat joustavaa ja helposti puhdistettavaa silikonaa.
- Tukikahvat ovat rakenteensa ansiosta turvallisia ja kuormitusta kestäviä.

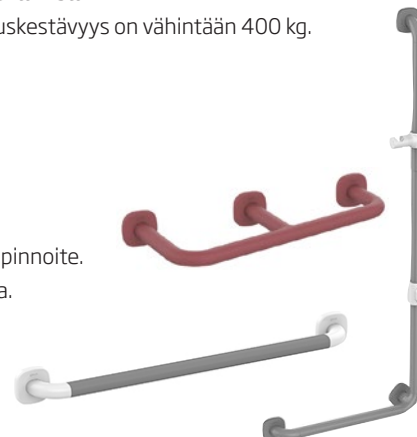

KUKAAN MEISTÄ EI TARVITSE ESTEITÄ

Korpinen on esteettömyyden pioneeri, joka tarjoaa tinkimättömiä ja asiakaskohtaisesti suunniteltuja kylpyhuoneratkaisuja. Autamme ammattilaisia toteuttamaan toiminnallisia tiloja taloudellisesti, sosiaalisesti ja esteettisesti kestäväällä tavalla.

Uskomme, että kaikki ihmiset on suunniteltu yhdenvertaisiksi, siksi kehitämme jatkuvasti tehokkaita tapoja tehdä tiloista yhdenvertaisia kaikille.



Gaius-kylpyhuoneratkaisujen mitoitus takaa parhaan käyttökokemuksen. Tehokasta tilankäyttöä turvallisuudesta tinkimättä.

Suunniteltu tukemaan oma-toimisuutta

Optimaalinen käytettävyys oikealla mitoituksella


Kontrasti-
värit ja epäsuora
valaistus

Laaja
valikoima
varusteita ja
apuvälineitä

Antimikrobinen
pinnoite

Ergonominen
myös hoito-
henkilö-
kunnalle

Laadukkaat
ja turvalliset
kylpyhuone-
kalusteet

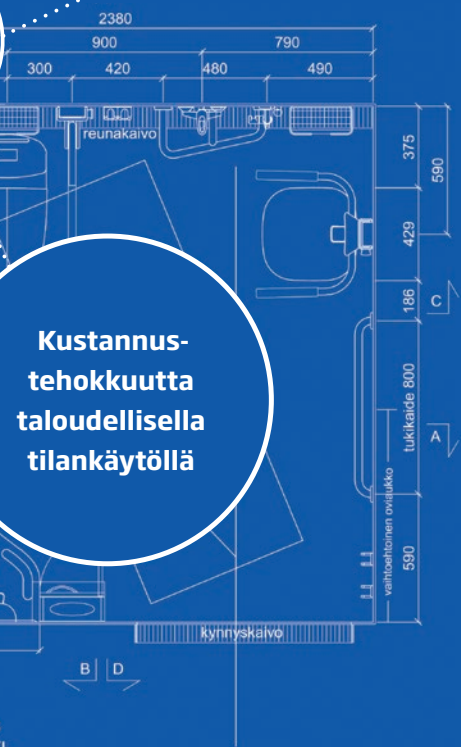

Kustannus-
tehokkuutta
taloudellisella
tilankäytöllä

POHJAPIIRROS
Gaius Hospital XL

Kaskad esteetön suihkukaappi

- Helppo asentaa
- Turvallinen
- Tyylikäs



Kaskad Design Line on erityisesti liikkumisesteisten käyttöön suunniteltu tyylikäs esteetön suihkukaappi.

Matala lattia mahdollistaa suihkukaapin käytön suihkupyörätuolilla tai rollaattorilla. Lisäksi suihkukaapissa on valmiiksi seinille asennettu käyttöä helpottavat tukikaiteet.

Suihkukaappi on vedenpitävä ja poistovesi ohjataan suoraan lattiakaivoon. Lattia on karhennettu liukastumista estäväksi. Seinämateriaalina on joko valkoinen tai läpinäkyvä karkaistu lasi.

Suihkuverho on kiinni sekä ylä- ja alareunasta. Magneettikiinnitteinen suihkuverho pitää roiskevedet suihkukaapin sisällä.

Usein muutostöissä säästytään kokonaan vesieristystöiltä ja asukas voi olla kotona koko asennuksen ajan.

Kaskad-suihkukaapit ovat erittäin laadukkaita ja helppoja asentaa.

Pohjan mitat

805 x 805	1205 x 705
905 x 905	1205 x 805
	1205 x 905
1005 x 705	1405 x 705
1005 x 805	1405 x 805
1005 x 905	1405 x 905

Bidette

Joissain paikoissa
on mukavampi
asioida yksin



Bidette on käyttäjien valinta

Bidette on helppokäyttöinen ja hyvin suunniteltu pesevä ja kuivaava WC-istuinlaite kaikille, jotka tarvitsevat apua intiimihygieniaan WC-käynnin yhteydessä.

Bidetten ainutlaatuisena etuna on alhaaltapäin heilurimaisella liikkeellä tuleva vesisuihku, joka puhdistaa miellyttävästi ja tehokkaasti. Se sopii miehille, naisille ja lapsille.

Bidette asennetaan suoraan olemassa olevan WC-istuimen päälle

Bidetteä on erittäin helppo käyttää, hoitaa ja pitää puhtaana. Bidetten käyttöön ja miellyttävään lopputulokseen on niin helppo tottua, että sitä alkaa pian kaivata myös oman kodin ulkopuolella.

Verrattuna Aasiassa jo yleistyneisiin esikuviinsa, Bidette on kooltaan isompi ja sopii siten paremmin eurooppalaisille.

Erityisen hyvin pesevä WC-istuin sopii hoivakotiympäristöön, missä se helpottaa itsenäistä WC:ssä käyntiä ja lisää käyttäjän yksityisyyttä.



100 % puhdas

Alhaaltapäin tuleva, liikkuva suihku puhdistaa täydellisesti. Sopii yhtä hyvin miehille, naisille ja lapsille.



Säätömahdollisuudet

Bidette on helppo säätää käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaan.



Helppokäyttöinen

Huolellisesti suunnitellun käsi-ohjaimen sekä käsi- ja jalkakytkimen ansiosta käyttö on helppoa.



Helppo pitää puhtaana

Kun suihku ei ole käytössä, suutinosan suojassa WC-istuimen reunan alla ja puhdistuu automaattisesti ennen käyttöä ja sen jälkeen. Suuttimen osat voidaan irrottaa perusteellisempaa puhdistusta varten.

Bidetten etuja

- Asennettavissa suurimpaan osaan wc-istuimista.
- Voidaan asentaa pintoja vahingoittamatta. Lisävarusteena on tilattavissa asennuslevy, jonka ansiosta välttyään poraamasta kylpyhuoneen seiniä.
- Erittäin kestävä, enimmäiskuormitus 380 kg.
- Helppo yhdistää muihin tuotteisiin, kuten siirrettävään suihkutuoliin, Lift-nostimeen, Elevate- tai Duo- korkeussäädettävään WC-istuimeen, Gripo-nousutankoon sekä Balance-WC-tukiratkaisuun.
- Lujatekoiset sivuliukuesteet.
- Hillitty ja miellyttävä ulkonäkö.
- Istuinvahdin ollessa kytkettynä, Bidette (mallit R3 ja M3) toimii vain, kun joku istuu WC-istuimella.
- Suihkun suutinosan puhdistuu automaattisesti ennen käyttöä ja sen jälkeen.
- Muutamien yksinkertaisten säätöjen avulla Bidetteä voi käyttää kuka tahansa, myös kognitiivisesti toimintarajoitteiset.
- CE-merkintä. IP 24.


Automaattisesti pesevä ja kuivaava Bidette R3

Automaattinen Bidette R3 on huolellisesti suunniteltu ja erittäin helppokäyttöinen ratkaisu niille, jotka tarvitsevat apuvälineen puhdistamiseen ja kuivaamiseen WC-käynnin yhteydessä. Sopii toki kaikille käyttäjille, jotka nauttivat puhtaudesta. Sen ainutlaatuinen etu on alhaalta, kääntyvästä varresta tuleva vesisuihku, joka takaa lempeän ja tehokkaan puhdistuksen sekä miehille, naisille että lapsille. Bidette R3:n pesu- ja kuivaustoimintoja voidaan säätää. Bidette asennetaan suoraan olemassa olevaan WC-istuimeen ja sitä on helppo käyttää, hoitaa ja pitää puhtaana.

Näin Bidette R3 toimii



1. Laitteen huuhtelu, vesi lämpää

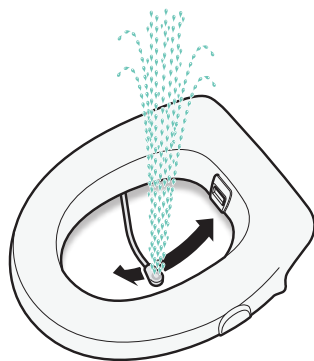


2. Suihkutus puhtaaksi



3. Puhallus kuivaksi

Bidette R3:n kokoonpano

- Istuin, korkeus 65 mm
- Enimmäiskuormitus 380 kg
- Suihkuvarsi
- Termostaattisekoittaja vesiletkulla
- Puhallin R3 ilmaletkulla
- Käsiohjain, kolmi- tai yksitoiminen
- Istuinvahti.

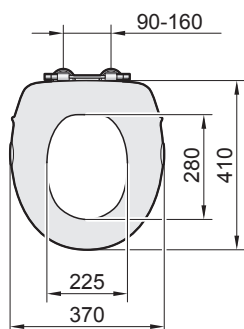

Ohjausvaihtoehdot

- Kolmitoiminen käsiohjain vakiona, sopii myös näkövammaisille.
- Yksitoiminen käsiohjain tai jalkaohjain tilauksesta



Yhteensopivat tuotteet

- Siirrettävä suihkutuoli
- Lift-nostin
- Elevate- tai Duo- korkeussäädettävä WC-istuim
- Balance- WC-tukiratkaisu
- Gripo-nousutanko

Lisävarusteet

Käsituet:

Asennetaan erikseen, ylösnostettavat, kaksi eri mallia.



Irtoistuimet ja muut lisävarusteet:

Bidetteen on saatavana useita erilaisia aukkoa pienentäviä tai pehmeitä irtoistuimia sekä käyttöä helpottavia jalka- ja selkätukia. Muita lisävarusteita: korpinen.com .



Asennuslevy

Tuotenro SC11300
Mahdollistaa puhaltimen ja sekoittajan asennuksen laattaseinään ilman ruuveja. Mitat 170 x 390 mm



Bidette R3

Tuotenro SC11122

Bidette R3 käsituilla

Tuotenro SC11124

Bidé Elegant

WC-istuin pesu- ja kuivaustoiminnolla



Bidé Elegant, pesevä ja kuivaava WC-istuin, tuo arkeen luksusta. Elegantt kokonaisuus näyttää tavalliselta WC-istuimelta, mutta kätkee sisäänsä ultramodernia tekniikkaa. Kaikki toiminnot on piilotettu kannen alle. Sen käyttöön ja miellyttävään lopputulokseen tottuu niin helposti, että sitä alkaa kaivata myös oman kodin ulkopuolella. Erityisen hyvin pesevä WC-istuin sopii hoivakotiympäristöön, missä se helpottaa itsenäistä WC:ssä käyntiä ja lisää käyttäjän yksityisyyttä.

Pesutoiminnot

- Takapesu
- Intiimialueiden pesu
- Liikkuva suihkupää – eteen/ taakse liikkuva pesusuutin sekä manuaalisesti säädettävä pesusuutin.
- Veden lämpötilan säätö

Mukavuus

- Helppokäyttöinen käsiohjain, seinäpidikkeellä
- Veden lämpötilan säätö
- Vesisuihkun voimakkuuden säätö

- Pesusuuttimen etäisyyden säätö
- Soft Close -kansi sulkeutuu pehmeästi

Turvallisuus

- Istuinkannen saranat ruostumatonta terästä
- CE-merkintä
- Piilotettu vesi- ja sähköliitäntä
- IP44

Asennus

- Asennetaan kuten tavallinen seinäkiinnitteinen WC-istuin
- Voidaan asentaa yleisimpiin WC- asennustelineisiin
- Vesi- ja sähköliitäntä WC-istuimen takana
- Sähköverkon jännite 230 V, taajuus 50 Hz

Bidé Elegant on asennettavissa sähkösäätöisiin WC-istuimen korkeudensäätölaitteisiimme Gaius Duo (17751).



TEKNISET TIEDOT

800100 Bidé Elegant, seinäkiinnitteinen WC-istuin suihku- ja kuivaustoiminnolla, valkoinen

Leveys 384 mm

Korkeus 381 mm


Syvyys 593 mm

Yhteensopivat tuotteet:


17751 Duo sähkösäätöinen WC-istuimen korkeudensäätölaite

17771 Suojakotelo, ilman säätömahdollisuutta (mitat tilauksen mukaan)

177800 WC-istuimen asennusteline

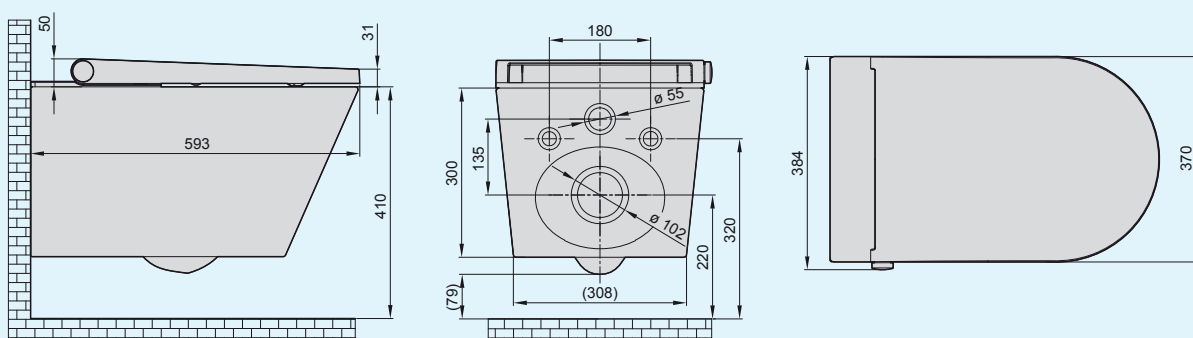

Käsiohjain

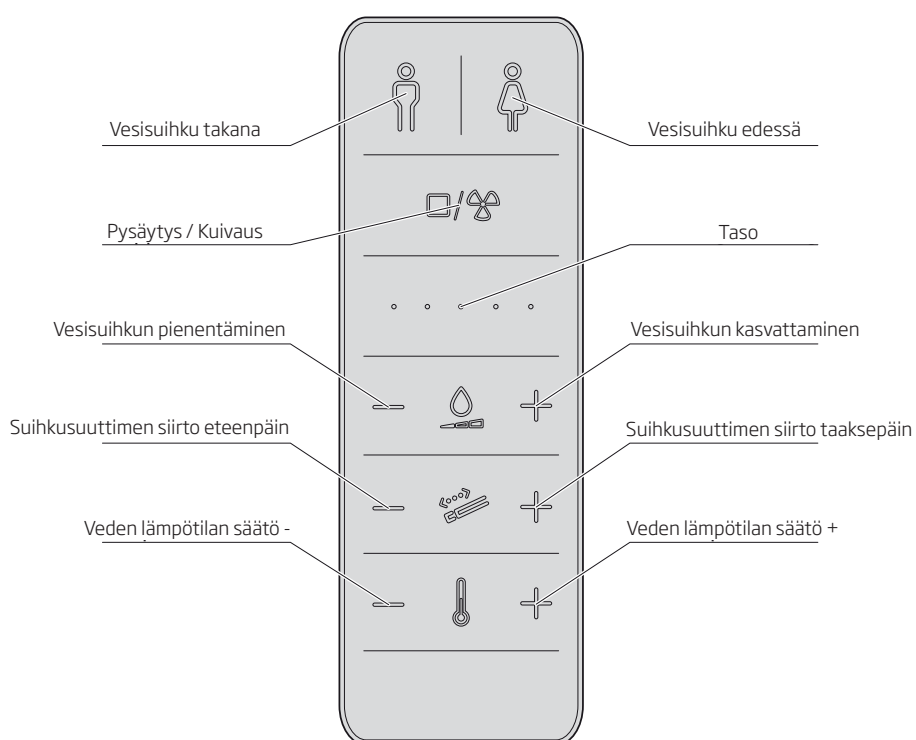

KEITTIÖ

Keittiössä toimiminen vaikeutuu ikääntymisen tai vammautumisen myötä. Levyt saattavat unohtua päälle ja aiheuttaa vaaratilanteita. Yläkaappien hyllyt jäävät vähäiselle käytölle tai niiden käyttö vaatii jakkaraa. Pyörätuolia käyttävä kaipaa työtason alle tilaa jaloille ja pyörätuolille.

Lieden turvallisen käytön mahdollistaa Liesivahti, joka katkaisee liedestä virran häiriön tapahduttua. Liesivahti voidaan asentaa kaikkiin sähköliesiin.

Yläkaappien turvallisen käytön ratkaisee korkeussäädettävät yläkaapit, jotka voidaan usein asentaa nykyiseen keittiöön.

Keittiön työtasoon voidaan sijoittaa nostinkoneisto, joka mahdollistaa keittiötason käytön sopivalla korkeudella. Näihin kaikkiin Korpinen voi auttaa ratkaisullaan.

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ ROPOX-KEITTIÖ.40

LIESIVAHTI. 48



ARKI ON TÄRKEÄÄ

Ruokalaitto ja arjen eri askareet keittiössä ovat tärkeä osa elämäämme. Haluamme varmistaa, että jokainen voi käyttää keittiötään vapaasti, itsenäisesti ja turvallisesti.

Valikoimassamme olevia, helposti muunnettavia ja esteettömiä keittiöjärjestelmiä on käytetty eri puolilla maailmaa jo yli 35 vuoden ajan. Keittiöt mahdollistavat useimpien tehtävien hoitamisen itsenäisesti.

Monitoimikeittiöihin mahtuu useampikin kokki tai käyttäjä. Tarjoamme kaikille mahdollisuuden osallistua arjen yhteisiin askareisiin. Aktiivisuuden lisääntyessä myös elämänlaatu paranee.



KORPINENAUTTAA VALITSEMAAN JUURI SOPIVAN KEITTIÖN

Autamme ja opastamme sinua mielellämme. Voimme yhdessä suunnitella sinulle keittiön, jossa tilankäyttö on järkevää. Ota meihin yhteyttä jo talosi suunnitteluvaiheessa, niin kartoitamme yhteistuumien tarpeesi ja varmistamme, että olet tyytyväinen lopputulokseen.

Helposti muunnettavat keittiöt sisältävät monia yksilöllisiä ratkaisuja tuettuun asumiseen, erikoisoppilaitoksiin, hoitokoteihin, opetus- ja laitoskeittiöihin sekä yksityisasuntoihin.

Korkeussäädettävät järjestelmät voidaan asentaa piiloon. Ne ovat käytettävissä sähköisesti tai manuaalisesti. Helposti asennettavat järjestelmät ovat kestäviä ja turvallisia, ja niissä käytetään vain ensiluokkaisia materiaaleja.



Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.



Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.



Ropox-rullapyörätjarrulla.

ROPOX

4Single runko

- Ideaalinen ratkaisu kaikille perheenjäsenille – aikuisille, lapsille ja pyörätuolin käyttäjille.
- Pöytätasoa voi käyttää monenlaisiin askareisiin, vaikkapa tietokoneella työskentelyyn tai ruoanlaittoon.
- Saatavilla on kaksi korkeutta: 550–850 mm ja 650–950 mm. Molempien säätöväli on 300 mm.
- Korkeudensäätö onnistuu helposti säätöpainikkeella tai käyttämällä veiviä tai ohjainta.
- Runko valmistetaan työ- tai ruokailutason mittojen mukaan. Enimmäiskoko on 3 000–2 000 mm.
- Tarvittaessa runkoon voi integroida myös keittolevyjä ja altaita.
- Lisävarusteina toimitettavien, jarrulla varustettujen rullapyörien ansiosta pöytää voi siirtää helposti.
- Pöydässä voi käyttää myös vakiovarusteena toimitettavia pöydänjalkoja tai piiloon asennettavia lattiakiinnikkeitä.
- Sähköisen version ladattava akku takaa, että pöydän säätö onnistuu vaivattomasti.
- Täyteen ladattujen akkujen akkuvaraus riittää jopa 3 kuukaudeksi.
- Runko on suunniteltu kestäämään jopa 150 kg:n kuorma (raskaammassa versiossa 250 kg).
- Loistava valinta ruoka- tai työpöydäksi.
- Saatavilla myös yksilöllisiä ratkaisuja.



TYÖTASON NOSTIMET

TYÖTASO UUSIIN KORKEUKSIIN

Tärkeää on, että työtasoa voi säätää sopivalle korkeudelle eri askareita varten.

Säädettävän työtason avulla askareet onnistuvat helposti ja itsenäisesti niin istuen kuin seisten. Kunnollinen työtaso takaa laajemmat mahdollisuudet hoitaa erilaisia tehtäviä.

Ropox-keittiöratkaisu on suunniteltu niin, että istuma-asennossa oleville käyttäjille jää enemmän jalkatilaa. Myös liikkuminen onnistuu esteettä.

FlexiCorner-työtaso



SÄÄDETTÄVÄT TYÖTASOT

Flexi Electric, sähköisesti säädettävät työtasot

- Sähköisesti säädettävä työtaso on erinomainen valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun asumiseen ja hoitokoteihin.
- Työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Säädettävät työtasot voidaan asentaa myös kulmaan.
- Enimmäiskoko on 3 000 x 3 000 mm.
- Työtason alle voi asentaa laatikon ja siihen voidaan integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu sähköisesti, lisävarusteena kauko-ohjain.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, pelkät nostimen jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Jotta järjestelmien käyttö olisi mahdollisimman turvallista, sähköjärjestelmiin kannattaa aina asentaa turvapsäytin, jotka estävät puristumisen.
- Jos liikuteltavat työtasot ovat vierekkäin tai niiden yläpuolella on kaapistoja, turvajärjestelmät kytketään yhteen.

Flexi Manual, kammella säädettävät työtasot

- Flexi-kampisäätö on edullisempi valinta säännölliseen ja itsenäiseen käyttöön.
- Sopii varsinkin yksityisasuntoihin, oppilaitoksiin, opetuskeittiöihin, tuettuun asumiseen ja hoitokoteihin.
- Kaikki keittiön työtasot voi asentaa 600–3 000 mm:n pituisiin runkoihin.
- Työtasoon voi integroida altaita ja keittolevyjä.
- Korkeudensäätö onnistuu manuaalisesti kampea käyttämällä.
- Jalat ja putket voi peittää suojapaneelilla. Jos liikkumistilaa tarvitaan enemmän, jalat voi peittää erityissuojuksilla.
- Kampisäätöinen nostinkoneisto voidaan päivittää sähköisesti toimivaksi.

Flexi Basic, manuaalisesti säädettävä työtaso

- Sopii keittiöihin, joissa korkeutta säädetään erittäin harvoin.
- Manuaalisesti säädettävät työtasot voidaan asentaa
- 600–3 000 mm työtasoihin.
- Säättämiseen tarvitaan valmistajan tunkki tai vähintään kaksi henkilöä.

Työtason seinäkannattimet

- Nostamiseen ja säätämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.



YLÄKAAPIN NOSTIMET

LASKEUTUVAT KEITTIÖKAAPISTOT

Jokaisen käyttäjän keittiössä tulisi nähdä kaappien sisältö ja ylettyä jokaiseen tavaraan.

Sopiva ratkaisu valitaan käyttäjän liikkumiskyvyn ja asennon perusteella. Toisinaan tavarat ovat käyttäjän ulottuvilla, vaikka kaappi laskeutuisi vain suoraan alaspäin. Diagonal-mallissa koko kaappi liukuu työtason reunaan vaikkapa kattilan, leivänpaahdinten tai hanan päältä. Korkeuden säätäminen onnistuu yhdellä napin painalluksella.

Kaappien alla olevat turvapysäytysnauhat takaavat, ettei mitään jää puristuksiin kaapin ja työtason väliin. Paras vaihtoehto riippuu tarpeista ja tilanteesta. Autamme sinua löytämään juuri sopivan ratkaisun omiin tarpeisiisi!



Turvalevy integroidulla valaisimella.



Painikkeet kaappien säätöön.

HYLLYNOSTIN (kaapin runko pysyy paikallaan)



VertilInside, hyllynostin suoraan alas

- Hyllyt liikkuvat suoraan alas.
- Asennetaan kaapin sisälle (vakioleveydet 400–1 000 mm).
- Sopii erinomaisesti olemassa oleviin kaappeihin.
- Ei näkyvissä ulkopuolelta.
- Säädetävissä alaspäin 495 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 80 kg:n kuorma.
- Pohjassa olevaan turvapysäytyslevyyn (vakiona) voi integroida valaisimia.



Indi, hyllynostin alas ja eteen

- Hyllyt liikkuvat 450 mm alas ja 300 mm eteenpäin kohti käyttäjää.
- Kaapin runko jää ennalleen. Uusi hyllykkö asennetaan vanhojen hyllyjen tilalle.
- Leveydet 500–1000 mm kaappeihin, syvyys 250,5 mm tai 310,5 mm, korkeus vähintään 700 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 40 kg:n kuorma.
- Ovien aukaisu automaattinen.
- Käyttö nappisäätimillä tai kaukosäätimellä.

KAAPPINOSTIN (koko yläkaappi liikkuu alas)



VertiElectric, kaappinostin suoraan alas

- Mahdollistaa koko kaapiston korkeuden säätämisen.
- Rungosta on saatavilla kaksi mallia, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Korkeutta voi säätää alaspäin 300 mm.
- Korkeudensäätöjärjestelmä ei ole näkyvissä, kun kaapit on asennettu.
- Rungon syvyys vain 50 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 80 kg:n tai 120 kg:n kuorma.
- Kaapin pohjaan voi asentaa turvapysäytyslevyn (lisävaruste), joka estää puristumisen.




Diagonal, kaappinostin alas ja eteen

- Liikkuu 430 mm alas ja 180 mm eteenpäin.
- Rungon syvyys vain 115 mm. Piilossa, kun kaappi on asennettu.
- Rungosta on saatavilla eri malleja, joissa kaappien leveys on 400–1 200 mm tai 1 300–1 800 mm.
- Suunniteltu kestäämään enintään 120 kg:n / 220 kg:n kuorma.
- Turvapysäytyslevyyn (lisävaruste) voi asentaa valaisimia (sähköinen korkeuden säätö alas ja eteen).

Kannattimet kaapeille, manuaalinen säätö

- Kannattimien avulla kaappien korkeutta voi säätää porrastetusti 42 mm välein.
- Kannattimet sopivat tilanteisiin, joissa korkeutta täytyy säätää vain harvoin.
- Suunniteltu kestäämään enintään 90 kg:n kuorma.

OPTIMAALINEN KORKEUS ULOTTUMISTA VARTEN

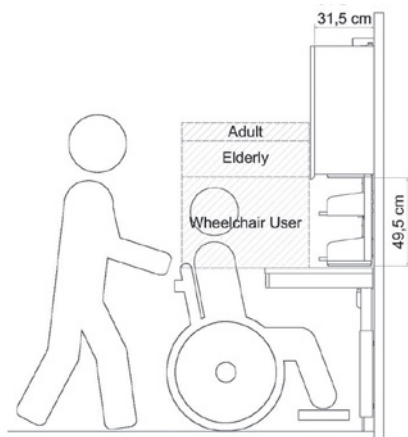


TYÖTASOJEN OPTIMAALINEN KORKEUS

Pyörätuolin käyttäjät: 700-800mm


Seniorit: 850mm

Aikuiset: 900-950mm

Ropox VertilInside

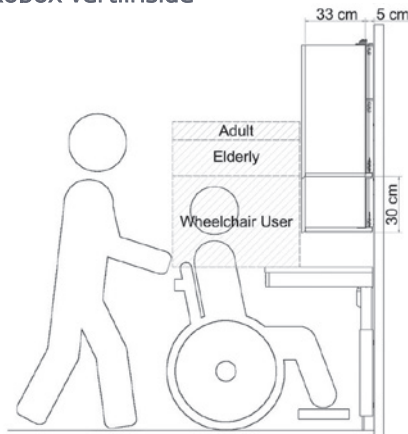

Ropox VertiElectric

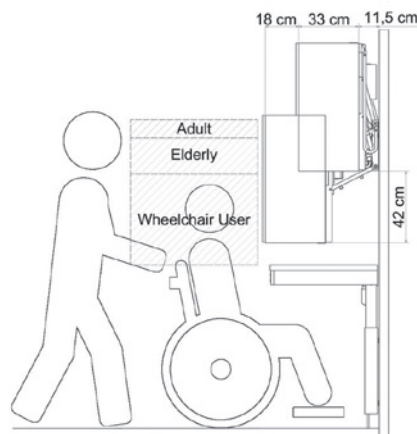

Ropox Diagonal

TURVALLISUUS ENNEN KAIKKEA



Kaikkien kaapistojen alle kannattaa asentaa turvapysäytysnauha, joka estää puristumisen. Turvallisuutta voi parantaa myös kytkemällä yläkaapit ja korkeussäädettävät työtasot toisiinsa älykkäällä Smartbox-liitännällä.



Ropox Smartbox liittää useamman nostimen turvakytkimet toisiinsa. Smartbox liitäntärasiat auttavat estämään puristumisen vierekkäin asennettujen korkeussäädettävien työtasojen väliin. On tärkeää, että työtaso ei ulotu sivu- ja etulevyjen ulkopuolelle.



Suojareunukset varmistavat, että työtasot paitsi pysähtyvät, myös kääntyvät toiseen suuntaan välittömästi, kun reunukset aktivoituvat.

PREFI SVALNA- LIESIVAHTI



Turvallisuutta
keittiöön

TURVALLISUUTTA KEITTIÖÖN

Prefi Svalna -LIESIVAHTI

Prefi Svalna on helppokäyttöinen liesivahti, joka antaa varmuutta kotona asumiseen ja lisää turvallisuutta keittolevyjen ja uunin käyttämiseen.

Liesivahti katkaisee virran havaitessaan häiriötä pintalämpötilassa tai käyttöajan ylittyessä.

Prefi Svalna- liesivahti mahdollistaa normaalin ruoanlaiton kaikille perheenjäsenille.

Liesivahti valvoo lämpötilaa ja katkaisee virran, jos lämpötila nousee liian korkeaksi tai jos ennalta määrätty käyttöaika ylittyy. Käyttöaika on säädettävissä.

Hälytys tapahtuu äänimerkillä ja valomerkillä, jonka jälkeen virta katkeaa automaattisesti. Merkkiäänä voidaan kytkeä pois päältä tarvittaessa. Prefi Svalna nollataan helposti, kytkemällä kaikki levyt ja uuni pois päältä. Nollauksen jälkeen liesi toimii taas normaalisti.

Prefi Svalna-liesivahti on ohjelmoitavissa toimimaan magneettiavaimella on/off -tyylisesti. Silloin ilman magneettiavainta liesi ei toimi ollenkaan. Tämä toiminto mahdollistaa lieden turvallisen käytön perheissä, joissa on muistihäiriöinen perheenjäsen, samoin kuin lapsiperheissä. Myös lemmikkien aiheuttamat vaaratilanteet voidaan näin välttää.

Prefi Svalna on helppokäyttöinen liesivahti

- muistihäiriöisille
- aistivammaisille
- lapsiperheille

Prefi Svalna-liesivahdin lämpötilavahti ja virrankatkaisuyksikkö ovat toisiinsa yhteydessä langattomasti. Lämpötilavahdissa on mukana magneettinen kiinnitysmahdollisuus. Liesivahdin saa asentaa sähköasennusluvalla omaava asentaja.



KODIN MUUT TILAT

Koti saadaan aina muutettua paremmin toimivaksi oikeilla apuvälineillä ja hyvällä asunnon muutostyöllä.

Vapaasti sijoitettavien nousutukien avulla on mahdollista tukeutua kodin eri tiloissa.

Gripo-nousutuki on erinomainen esimerkki hyvin suunnitellusta apuvälineestä. Gripo on vapaasti sijoitettavissa kaikkiin kodin eri tiloihin.

Joskus kodeissa on tarve nostinratkaisuille, joko pyörillä tai kiinteästi kattoon asennettavissa olevilla malleilla. Valikoima on laaja ja autamme mielellämme oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.

GRIPO-NOUSUTANKO	52
NOUSUTUET	62
TERAPIAPÖYDÄT	64
TYÖTUOLIT	78
HUMAN CARE-NOSTINRATKAISUT	80
NOSTINLIINAT	88
ALL-IN-ONE-NOSTIMET	96

Gripo nousutanko

- asu pidempään kotona



Itsenäisyyttä • Turvaa • Hyvinvointia

Yksi järjestelmä – lukemattomia mahdollisuuksia

GRIPO on turvallinen tuki arkielämässä

GRIPO on tukeva ja helposti muunneltava tukiväline, joka tarjoaa tukea seisomaannousuun ja sisätiloissa liikkumiseen. Gripo sopii jokaiseen kotiin ja on hyvin helppo asentaa. Nousutanko toimii hyvin sellaisenaan, mutta on täydennettävissä hyödyllisillä lisävarusteilla.

- Tarjoaa tukea ja turvallisuutta
- Hyödyntää käyttäjän omia voimavaroja
- Helppo asentaa ja siirtää ilman työkaluja
- Suuri valikoima lisävarusteita erilaisiin tarpeisiin
- Monia käyttösovelluksia



Gripo

Tuotenumero H35100





Kolmiokahva

- Helpottaa nousua tuolista/sängystä
- Oikealle korkeudelle asennettuna voidaan käyttää myös päätukena
- Pehmeä kumipinta varmistaa liukumattoman otteen

Pehmeä kumipinta ja yleisliitin 40/22 mm

Tuotenumero H35145



Kahva

- Helpottaa nousua tuolista/sängystä
- Helpottaa siirtymistä pyörätuoliin ja siitä pois
- Asentamalla 2-3 kpl eri korkeuksille käyttäjä voi harjoitella seisomatasapainoa kiipeämisharjoituksen avulla
- Kun yleisliittimen asentaa hieman löysäksi, voi käyttäjä pyörittää kahvaa tangon ympäri, ominaisuus voi myös olla avuksi siirryttäessä pois tuolin tai sängyn reunalta

Pehmeä kumipinta ja yleisliitin 40/22 mm

Tuotenumero H35159



Pieni pystykahva

Putken läpimitta 22 mm. Kaksi yleisliitintä 40/22 mm

Tuotenumero H35158



Sivutuki riippukahvalla

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm, riippukahvassa pehmeä kumipinta ja hihna.

Tuotenumero H35148



Sivutuen etuja

- Antaa tukea siellä, missä sitä tarvitaan
- Lisää luottamusta omiin voimiin/kykyihin
- Mahdollistaa itsenäisen liikkumisen, mikä vähentää avustajan antamaa apua
- Aktivoi käyttäjää, mikä on tärkeää muun muassa verenkierron ja vatsan/suoliston toiminnan kannalta
- Tukee siirtymistä ja asennon muuttamista vuoteessa
- Säästää kustannuksia, mikäli käyttäjät ja omaiset voivat toimia omatoimisesti ilman hoitohenkilökunnan apua



Sivutuki

- Ei irtonaisia osia
- Antaa tukea seisomaan noustaessa ja liikuttaessa esim. WC-käynnin yhteydessä

Ilman hihnaa ja riippukahvaa. Kaksi yleisliitintä 40/22 mm

Tuotenumero H35196





Kombi-kahva

- Tukeva kahden käden ote myös käyttäjille, joilla on kookkaat kädet
- Erittäin tukeva (ei kierry)
- Voidaan käyttää kahdella korkeustasolla kiivettäessä
- Käyttäjä voi nojautua kahvaan pukeutuessaan ja riisuutuessaan
- Sama asennuskorkeus mahdollistaa kahden eripituisen käyttäjän ja korkeustasoja on kahvassa kaksi.

Kaksi yleisliitintä 40/22 mm

[Tuotenumero H35208](#)



Ylöstaittuva istuin

- Voidaan käyttää suihkuistuimena ja muissa tiloissa
- Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Yleisliitin 40/40 mm. Koko: syvyys 40 cm x leveys 36 cm

[Tuotenumero H35154](#)



Poikkitanko

- Asennetaan kahden tangon tai seinän ja tangon väliin nojauskorkeudelle.
- Tukee käyttäjää ja auttaa tasapainossa pukemisen ja riisumisen aikana

Pituus 75 cm. Läpimitta 40 mm. Yleisliittimet tilattava erikseen.

[Tuotenumero H35150](#)

Pituus 75 cm. Läpimitta 22 mm. Yleisliittimet tilattava erikseen

[Tuotenumero H35149](#)



Poikkitanko, läpimitta 22 mm

- Voidaan asentaa viistosti esim. kaiteeksi pieneen portaikkoon tai lattian korkeuserojen kohdalle
- Voidaan asentaa kylpyhuoneeseen pesualtaan tai WC-istuimen viereen kahden tangon välille
- Pehmeä kumipinta varmistaa liukumattoman otteen

Pituus 75 cm. Läpimitta 22 mm. Pehmeä kumipinta. Yleisliittimet tilattava erikseen.

[Tuotenumero H35151](#)



Poikkitanko, läpimitta 40 mm

Asennetaan tukemaan kävelyreittiä kahden tangon välillä.

- Huoneisiin, joissa on korkeita kynnyksiä, jotka estävät käyttäjää liikkumasta esimerkiksi pyörätuolilla
- Kävelyreitti esimerkiksi sängyn ja WC:n välillä, käytävissä ja vastaavissa. Auttaa käyttäjää selviytymään itsenäisesti
- Voidaan asentaa peräkkäin pitkäksi kävelyjohteeksi useiden tankojen välille

Pituus 160 cm. Yleisliittimet tilattava erikseen

[Tuotenumero H35152](#)





Käsinojat istuinta varten

Käsinojen välinen leveys 56 cm

Tuotenumero HH35255



Neliskulmainen pöytä

41 x 31 cm. Yleisliitin 40/22 mm. Soveltuu hyvin myös tietokonepöydäksi.

Tuotenumero H35165



Tuotetiedot

Pöytä

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35165	Yleisliitin 20/20 mm	Pöytälevy, 41 x 31 cm
H35155	Ilman yleisliitintä	Pöytälevy, 41 x 31 cm



Monitorivarsi Gripoon

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35251	Yleisliitin 40/40 mm	TV/tietokonenäyttöä varten. Pituus 60 cm, max. 15 kg



LED-valolamppu

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35260	Yleisliitin 40/22 mm	Pituus 48 cm. Lampun halkaisija 30 mm



Kahvan päällys

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35298	Parantaa otetta. Kiinnitetään vetoketjulla	Pituus 20 cm. Putkelle, jonka halkaisija on 40 mm



Tekniset vaatimukset ja yksityiskohdat

Gripo	
Tilavaatimukset	Vähintään 210 cm - enintään 300 cm. Katon korkeus ilmoitetaan tilattaessa.
Katon rakennetta koskevat vaatimukset	Pitää kestää 100 kg:n pistekuormitus
Maksimikuormitus	100 kg vaakatasossa tangon keskikohdalla
Käyttäjän paino	Max 150 kg
Materiaali	Alumiini ja muovi
Tuotteen paino	4,7 kg ilman lisävarusteita

Tuotetiedot

Gripo

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35100	Gripo Vakio	Katon korkeus 210–300 cm
H35202	Gripo Erikoiskoko	Katon korkeus alle 210 cm
H35105	Gripo Pitkä	Katon korkeus 260–320 cm
H35106	Gripo Plus	Katon korkeus 225–300 cm

Yleisliitin portaittain kiertyvä

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35130	Standardi, hammasratas	Halkaisija 40/22 mm
H35169	Hammasratas	Halkaisija 40/22 mm
H35199	Hammasratas	Halkaisija 22/22 mm

Yleisliitin vapaasti kiertyvä

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35160	Ilman hammasratasta	Halkaisija 40/22 mm
H35166	Ilman hammasratasta	Halkaisija 40/40 mm

Yleisliitin vastakappaleella Helpottaa tangon nostamista ja laskemista.

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35161	Päätyhihnat kaideputkille	Halkaisija 40/22 mm
H35167	Päätyhihnat kaideputkille	Halkaisija 40/40 mm

Sivutuki riippukahvalla

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35148	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm, riippukahvat, joissa pehmeä kumipinta ja hihna	Käyttäjän maksimipaino 110 kg
H35133	Riippukahvat, joissa pehmeä kumipinta ja hihna, ilman yleisliitintä	Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Sivutuki

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
35446	Liukukiristimet ilman yleisliitintä	Käyttäjän maksimipaino 110 kg
H35196	Liukukiristimet ja kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Käyttäjän maksimipaino 110 kg

Kolmiokahva

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35145	Pehmeä kumipinta, yleisliitin 40/22 mm	Putken halkaisija 22 mm
H35170	Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä	Putken halkaisija 22 mm

Kombi-kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35208	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Korkeus 24 cm, pituus 30 cm Putken halkaisija 22 mm



Tuotetiedot

Kahva

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35159	Pehmeä kumipinta, yleisliitin 40/22 mm	Tartuntapinnan leveys 48 cm. Putken halkaisija 22 mm
H35172	Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä	Tartuntapinnan leveys 48 cm. Putken halkaisija 22 mm



Pieni pystykahva

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35158	Kaksi yleisliitintä 40/22 mm	Putken halkaisija 22 mm



Kaideputki

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35149	Ilman yleisliitintä	Pituus 75 cm, putken halkaisija 22 mm
H35151	Pehmeä kumipinta, ilman yleisliitintä	Pituus 75 cm, putken halkaisija 22 mm
H35150	Ilman yleisliitintä	Pituus 75 cm, putken halkaisija 40 mm
H35152	Ilman yleisliitintä	Pituus 160 cm, putken halkaisija 40 mm



Seinäkannatin

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35156	Päättypalat seinään kiinnitettäviin putkiin	Putkille, joiden halkaisija on 22 mm
H35157	Päättypalat seinään kiinnitettäviin putkiin	Putkille, joiden halkaisija on 40 mm



Ylöstaittuva istuin

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35154	Yleisliitin 40/40 mm	Leveys 35 cm, syvyys 40 cm. Käyttäjän maksimipaino 110 kg
H35173	Ilman yleisliitintä	Käyttäjän maksimipaino 110 kg



Käsinoja ylöstaittuvalle istuimelle

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35255	Yleisliitin 40/40 mm	Käsinojen välinen leveys 56 cm



Ylälevy kaltevia kattoja varten

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35174	Asennus kalteville kattopinnoille	Säädettävä



Ylälevy heikkoja kattoja varten

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35153	Ylälevy, suuri	70 x 31 cm



WC-paperirullan pidike

Tuotenumero	Kuvaus	Lisätietoa
H35198	Yleisliitin 22/22 mm	
H35201	Yleisliitin 40/22 mm	



Nousutuet omatoimiseen siirtymiseen

Frida-nousutuki

Helpottaa sängystä nousua, lisää turvallisuutta ja omatoimisuutta. Otekahva on korkeussäädettävä ja miellyttävän pehmeää materiaalia. Frida on helppo asentaa patjan alle ilman työkaluja.


Kaiteen pituus 51 cm
Kaiteen korkeus 42-53 cm
Leveys 88 cm, 90 cm leveälle sängylle
Kestävyys 100 kg
Paino 2,6 kg



Pivot Rail-nousutuki

Monipuolisesti säädettävä Pivot Rail-nousutuki toimii sekä nousemisen tukena ja sängyn kaiteena ehkäisten putoamista. Sängyn suuntaisesti säädettävä nousutuki antaa jopa 106 cm pituisen kaiteen sängylle. Nousutukea voidaan kääntää myös alas. Mukana kangasteline pientarvikkeille.

Leveys lukittuu 66, 86 ja 106 cm.
Kaiteen korkeus 58,4 cm
Kestävyys 136 kg
Paino 6,8 kg

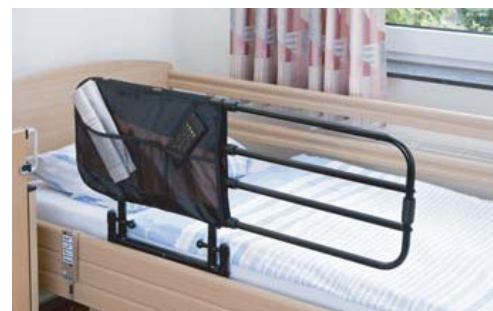

Säletuet sänkyyn

Muoviset säletuet mahdollistavat poikittaisista säleistä valmistetussa sängyn pohjassa nousutukien käytön.



CouchTray-sohvatuki

Ergonominen ja korkeussäädettävä kädensija antaa hyvän tuen ylös noustessa. Sohvatuessa on mukana korkeussäädettävä pöytä, joka kääntyy pois edestä. Sohvatuen jalat sijoitetaan tuolin tai sohvan jalkojen alle. Jalkojen syvyys on säädettävissä.

Kädensijan korkeus 87,5-102 cm
Kädensijan koko 17x17 cm
Kädensijan kestävyys 113 kg
Pöydän korkeus 66,5-81 cm
Pöydän kestävyys 13,6 kg
Pöydän koko 40,6x45,7 cm
Paino 10,8 kg



Econo-Rail-nousutuki

Mukaan otettava Econo-Rail-nousutuki toimii sekä nousutukena että sängyn kaiteena ehkäisten putoamisonnettomuuksia. Econo-Rail toimitetaan kantosalkussa, joka on kätevä ottaa mukaan matkalle.

Econo-Rail on valmistettu kevyestä alumiinista ja otekahva on miellyttävän pehmeää materiaalia. Mukana kangasteline pientarvikkeille ja kiinnitysvyö.

- Leveys 40,6 cm.
- Kaiteen korkeus 54,6 cm.
- Tukirunko patjan alla 30,5 cm.
- Kestävyys 136 kg.
- Paino 680 g.





TERAPIAPÖYDÄT

Ropox-terapiapöydät on suunniteltu vastaamaan erilaisiin tarpeisiin. Pöydät on kehitetty yhteistyössä käyttäjien, hoitajien ja terapeuttien kanssa, jotta ne täyttävät yleiset ergonomiset tarpeet. Ropox-terapiapöydät tukevat jokapäiväistä elämää parhaalla mahdollisella tavalla.

Laaja valikoima Ropox-terapiapöytiä täyttää useimmat vaatimukset erilaisiin aktiviteetteihin. Pöydät saadaan vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksia ja erilaisia tarkoituksia.

Ropox-terapiapöydän ääressä voi istua mukavasti ja tasapainoisesti. Pöydät mahdollistavat aktiivisemmän ja itsenäisemmän työskentelyn.



KÄYTTÄJIEN VALINTA

Asiakaskokemus

Jane Brostrøm, Maisen äiti

"Maiselle Ropox-terapiapöytä on välttämätön koulussa, sillä hän voi helposti säätää pöydän vastaamaan omia vaatimuksiaan riippumatta siitä, seisooko vai istuuko hän.

Maise käyttää korsettia, mikä vaikeuttaa pöydän päälle kumartumista. Kallistettava pöytätaaso tuo tähän ratkaisun.

Maiselle on tärkeää, että hän voi osallistua muiden oppilaiden kanssa samoille oppitunneille. Ropox-pöydän ansiosta hän saa parhaan mahdollisen työskentelyasennon".



SOPIVAN PÖYDÄN VALITSEMINEN

Harkittaessa uuden pöydän hankintaa, tiettyihin tärkeisiin ominaisuuksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota, jotta pöytä vastaa varmasti käyttäjän tarpeita.

Kuinka moni käyttää pöytää?

Kun pöydällä on vain yksi käyttäjä, suositellaan pöytää, joka parhaiten vastaa yksittäisen käyttäjän tarpeita. Mikäli taas pöydällä on useampi kuin yksi käyttäjä, suositellaan helposti säädettävää pöytää. Lisäksi kannattaa harkita pyörällistä, helposti paikasta toiseen siirrettävää pöytää. Näin mahdollistaa enemmän joustavuutta.

Onko erityisiä tarpeita?

Turvallinen istuma-asento vaatii vakaan pöydän ja tuolin. Tämä on tärkeää erityisesti käyttäjille, joilla on tasapainohaasteita. Pöydän pyörät on varustettava jarruin onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Kallistettavat pöydät on suunniteltu erityisesti näkökyvyn ja hahmotuksen haasteisiin.

Onko pöydän alla tarpeeksi jalkatilaa?

Mahdollisuus päästä lähelle pöytää on välttämätöntä. Pyörätuolin käyttäjälle on hyvä olla pääsy pöydän molemmille puolille. Kaikille Ropox terapiapöydille on optimaaliset lähellepääsymahdollisuudet matalien tukipalkkien ansiosta.

PÖYDÄN VALINNALLA ON MERKITYSTÄ

Hyvä ergonominen istuma-asento tuo merkittävän edun jokapäiväiseen elämään. Lapsilla, aikuisilla, liikuntaesteisillä ja sokeilla on erilaiset vaatimukset. Useista pöytäko'oista voi valita sopivimman ja kallistettavista tasoista mieluisimman omiin tarpeisiin.

Oikeanlainen pöytä auttaa saamaan enemmän irti päivittäisistä aktiviteeteista.

PÖYTÄTASON KALLISTAMINEN

Kallistettavat pöytälevyt antavat mahdollisuuden muuttaa istuma-asentoa.



Tietokoneella työskenneltäessä
käytetään pöydän etuosaa.
Käyttäjä saa hyvän noja-asennon.



Kirjoittaessa käytetään kallistetun
pöydän keskiosaa.
Käyttäjä voi nojata eteenpäin.



Ylös kallistettu pöytä tuo lukiessa
tekstin lähelle.
Käyttäjä saa rennon noja-asennon.

PÖYDÄN KORKEUDENSÄÄTÖ

Korkeussäädettävä pöytä helpottaa pöydän säätämistä
täsmälleen tarvittavalle korkeudelle.



Lapsi



Aikuinen



Seisominen

KAIKILLE IHMISILLE TOIMINTAKYVYSTÄ RIIPPUMATTA

Pöytä on kokoontumispaikka, missä seurustelemme, syömme,
työskentelemme, leikimme ja opiskelemme. Se on tarkoitettu eri
ikäryhmille, pyörätuolin käyttäjille, heikkonäköisille ja kaikille muille
tarpeista riippumatta.

Pöydät on luotu niitä elämän hetkiä varten, joita jaamme muiden
kanssa toimintakyvystä riippumatta. Ropox-terapiapöytiä on
käytössä yksityiskodeissa, kouluissa, hoitokodeissa,
kuntoutuskeskuksissa ja sairaaloissa.



KUINKA SAADA PARAS ISTUMA-ASENTO

Samassa istuma-asennossa pysyminen yli 1-2 tunnin ajan aiheuttaa epämukavuutta useimmille ihmisille. Istuminen on yksi pahimmista rasituksista alaselälle, niska- ja hartiaseudulle, ja se voi aiheuttaa lihaskipua.

Avain täydelliseen ja toiminnalliseen istuma-asentoon on vaihtelumahdollisuus. Erityisesti pyörätuolinkäyttäjälle voi olla haastavaa vaihtaa istuma-asentoa, mutta oikealla pöydällä saa siihen tarvittavan avun.

Asioita, joita ottaa huomioon suunnittelussa

- Käsivarsien tuki lievittää selkä- ja hartiaseudun rasitusta.
- Korkeudensäätö estää olkapäiden ja kaulan kiputiloja.
- Kallistettava työtaso tuo luettavan tekstin lähemmäksi.
- Paperit pysyvät paikoillaan MagRule-magneetin kanssa myös silloin, kun pöytälevyä kallistetaan.
- Helppo pääsy pöydän molemmille puolille pöydän alla olevan matalan tukipalkin ansiosta.

Pöytien ominaisuudet auttavat saamaan parhaan mahdollisen istuma-asennon riippumatta siitä, kirjoittaako, lukeeko, pelaako vai rentoutuuko pöydän ääressä.

ROPOX-TERAPIAPÖYTIIEN EDUT

Terapiapöytiä on erittäin laaja valikoima, ja niissä on paljon yksilöllisiä säätöjä.



Ropox-käsivarsien tuet



Sähköinen tai manuaalinen korkeudensäätö



Vision-pöytälevyt

Vision-pöytälevyt ovat rakennettu teräksestä, mikä mahdollistaa MagRule-magneetin käytön missä pöytälevyn kohdassa.



ROPOX VISION TERAPIAPÖYDÄT

KORKEUSSÄADETTÄVÄT JA KALLISTETTAVAT PÖYDÄT

Tuotteen on oltava sekä toimiva, että kaunis. Vision-pöytien muotoilu on yksinkertainen ja tyylikäs. Säädettävä korkeus ja kallistettava pöytälevy takaavat ergonomisen asennon. MagRule-magneetti pitää paperit pöydällä.

Ergonomisilla käsivarsituilla voi rentouttaa käsivarsia ja ne tarjoavat myös pienen vartalotuen. Lisäksi pöydän alla on runsaasti tilaa pyörätuolin käyttäjälle päästä lähelle pöytää. Monet valitsevat Vision-terapiapöydän tyylikkään ilmeen, käyttäjäystävällisten ominaisuuksien ja monipuolisen käytettävyyden vuoksi.





ROPOX

Vision-terapiapöytä



- Saatavana kiinteällä tai kallistettavalla pöytälevyllä. Kallistettava osa (enintään 74°) vaihtoehtina keskelle, vasemmalle tai oikealle puolelle.
- Kaksi korkeusvaihtoehtoa (50-70 / 60-90 cm.)
- Kolme pöytäkokoa (90x60, 120x60, 90x90 cm).
- Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
- Turvapysäytys pöytälevyn kallistustoiminnossa
- Pöytälevyn alla vapaata tilaa, joka helpottaa pyörätuolin käyttäjiä
- Kaksi sisäänrakennettua pyörää, jotka luovat tyylikkään ulkonäön
- Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetilla paperit voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan

ROPOX

Vision korkea/matala terapiapöytä



- Pöytä, jonka ääressä voit istua tai seistä.
- Sähköinen korkeussäätö (erittäin laaja 62 - 127 cm).
- Akkuratkaaisu on saatavana, mikä tekee siitä johdottoman
- Kallistettava pöytälevy
- Teräksinen pöytälevy: MagRule-magneetti voidaan sijoittaa halutusti paperien säilyttämiseen



MagRule -magneetti antaa mahdollisuuden sijoittaa asiat halutusti pöydälle



Sisäänrakennetut pyörät



Korkeussäädettävä



Irroitettavat käsivarsituet



Pyöristetyt kulmat ja reunat



ROPOX ERGO-THERAPIAPÖYDÄT

MANUAALISESTI KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT JA KALLISTETTAVAT

Ergo-terapiapöydät koostuvat neljästä eri versiosta, joiden korkeutta voi säätää manuaalisesti. Pöytälevyä voi kallistaa jopa 54°. Kallistustoiminto on erittäin kätevä heikkonäköisille ja käyttäjille, joilla on rajoittunut ulottuvuus. Pöydän tuki varmistaa, että asiat pysyvät paikoillaan, kun pöytälevyä kallistetaan.

Käsivarsituet vähentävät kyynärvarsien kannattelua, ja tarvittaessa ne myös tarjoavat tukea käyttäjälle.



ROPOX

Ergo-terapiapöytä

- Manuaalinen korkeus säädettävissä veivillä 56-90 cm
- Saatavana kaksi pöytäkokoa (90x60 ja 120x60 cm)
- Saatavana täydellä kallistuksella tai vasemmalla/ oikealla osalla, jonka saa kallistettua jopa 54° kulmaan
- Laaja valikoima lisävarusteita



A-malli



B-malli



C-malli



D-malli

Laaja valikoima lisävarusteita





ErgoMulti-harjoitus- ja terapiapöytä

HARJOITUS- JA TERAPIAPÖYTÄ

ErgoMulti-terapiapöytä on optimaalinen valinta harjoituksiin, joissa käyttäjä ja terapeutti istuvat vastakkain.

Pöydän sivuilla on kaksi ergonomista kaarta, joiden avulla kaksi ihmistä voi istua mukavasti pöydän kummallakin puolella. Pöydän mukana tulevat kaaripalat mahdollistavat pöydän tavallisen käytön. Pyörätuolin käyttäjä voi tulla lähelle pöytää matalien tukipalkkien ansiosta.





ROPOX

ErgoMulti-terapiapöytä

- Ihanteellinen harjoitustilanteisiin
- Matala tukipalkki pöydän alla
- Erilaisia pöydän yläosan leikkauksia yksilöllisiin tarpeisiin
- Manuaalinen korkeudensäätö
- Pyörät varustettu jarruilla

Lisäosat (sis. hintaan)

Kaaripala ø 30 cm

Kaaripala ø 40 cm

Kaaripala, täysi

Pyörät jarruilla





ROPOX-RYHMÄPÖYDÄT

KORKEUSSÄÄDETTÄVÄT KEITTIÖ- JA TYÖPÖYDÄT

Ystävien, perheen tai työkavereiden tapaaminen pöydän ympärillä on osa jokapäiväistä elämää. Ryhmäpöydät on suunniteltu luonnolliseksi kokoontumispisteeksi riippumatta siitä, onko töissä, kotona, harjoittelussa tai koulussa.

Kaikissa ryhmäpöydissä on helppo korkeudensäätö. Pöydät on valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka on helppo puhdistaa. Pöytien alla on runsaasti jalkatilaa, mikä tekee niistä kaikille käyttäjille sopivan riippumatta toimintakyvystä. Ropox-ryhmäpöydät ovat tyylikkäitä ja ne sopivat myös liikuntaesteisten käyttäjien vaatimuksiin.



ROPOX

Vision-ryhmäpöytä



- Manuaalinen korkeussäätö
- Pyöristetyt reunat ja kulmat
- Sileät pinnat - helppo pitää puhtaana
- Tyylikkääts oikeat jalat



ROPOX

Ergo-ryhmäpöydät

- Manuaalinen korkeussäätö
- Ei ristitankoja, mikä tekee pöydästä täydellisen pyörätuolikäyttöön
- Pyörät voidaan varustaa jarruilla



ROPOX

4Single-ryhmäpöytä

- Manuaalinen tai sähköinen korkeussäätö
- Turvapsäytys antaa turvallisuutta ympäri pöytää
- Kehys ihanteellinen kaikenlaisille pöytälevyille
- Kaksi korkeusvaihtoehtoa: 55-85 / 65-95 cm
- Lisävarusteena saatava akku tekee pöydästä johdottoman
- Pituus ja leveys voidaan räätälöidä, kuitenkin korkeintaan 200x300 cm



4Single-ryhmäpöydän alle voidaan asentaa kaapit.



4Single-ryhmäpöytä on ihanteellinen moniin eri tarkoituksiin.



Käsivarren tuet saavat käyttäjän rentouttamaan hartiat.

Aktiivituoli työhön ja kotiin

-Yksilöllisesti säädettävää mukavuutta

Hepro-aktiivituoli on ergonominen, korkealaatuinen ja kestävä. Tuoli on turvallinen, ja sen saa nopeasti säädetyksi omien yksilöllisten tarpeiden mukaiseksi – jopa tuolilla samalla istuen. Aktiivituoli eroaa tavallisesta työtuolista sen erityisen kevyen liikuteltavuuden ja kehoa aktivoivien toimintojen osalta. Aktiivituoli on paitsi vankka toimistotuoli, se helpottaa toimintaa myös kotona. Nämä toiminnot ovat käytettävissä kaikissa malleissa:

Ergonominen selkänoja

- Hyvä lannetuki
- Portaaton korkeudensäätö
- Miellyttävä pehmuste
- Optimaalinen muoto
- Säädettävä selkänojan kallistus
- Niskatuki lisävarusteena

Säädöt

- Helposti ulottuvilla olevat säätövivut
- Paljon yksilöllisiä säätövaihtoehtoja. Säätövivut tilattavissa oikealle tai vasemmalle puolelle
- Jarru voidaan asentaa vasemmalle tai oikealle puolelle
- Hyvät ja turvalliset pyöräjarrut

Runko ja pyörät

- Erityisen kevyt liikuteltavuus
- Vankka ja kestävä (25-150 kg)
- Hyvä jalkatila
- Ylös taitettava jalkatuki
- Leveät, vakaat pyörät

Joustavat käsinojat

- Säädettävä korkeus ja leveys
- Voidaan kääntää taaksepäin helpottamaan pyörätuolikäyttäjien tuoliin pääsyä ja poistumista
- Voidaan kääntää taaksepäin muuttamatta korkeusasetusta

Ergonomisesti muotoiltu

- Hyvä tuki
- Miellyttävä pehmuste
- Materiaali estää liukumisen
- Lieventää paineen tunnetta
- Istuimen syvyys säädettävissä

Korkeudensäätö

- Kaasunostin ja sähköinen säätö nostavat istuinta vaihtoehtoisesti 10, 15 tai 20 cm. Tuolia voidaan, mallista riippuen, säätää vielä manuaalisesti 4-12 cm
- Suosittelemme sähköistä korkeudensäätöä heikkovoimaisille ja käyttäjille, joiden tasapaino on heikentynyt.

Valitse malli, joka vastaa parhaiten tarpeitasi



G2 Aktiv

G2 Aktiv tarjoaa helppoutta ja käyttömukavuutta aktiivisille käyttäjille. Liikkuva kallistus. Vankka työtuoli aktiiviseen käyttöön kotona ja töissä.



E1 Kilo

Tuoli, jossa on sähköinen 10 cm korkeudensäätö jopa 230 kg painaville käyttäjille. E1 Kilo on vankka tuoli, joka pyrkii aktivoimaan käyttäjiä, jotka istuvat liikkumattomana painonsa vuoksi.



G2 Luna

Tuoli, jossa on manuaalinen istuinnosto, kallistustoiminto ja ergonominen istuin. Hepro Lunan avulla saat tinkimätöntä ergonomiaa yhdistettynä innovatiivisuuteen ja muotoiluun.



E2 Luna

Tuoli, jossa on sähköinen istuinnosto, kallistustoiminto ja ergonominen istuin. Hepro Lunan avulla saat tinkimätöntä ergonomiaa yhdistettynä innovatiivisuuteen ja muotoiluun.



G2 Tilto HR

G2 Tilton erityisen korkea selkänoja antaa erinomaisen tuen ja takaa istuimukavuuden. Valitse Tilto, kun pitkään istuttaessa tarvitaan aktivoitua ja liikettä.



E2 Tilto HR

E2 Tilton erityisen korkea selkänoja antaa erinomaisen tuen ja takaa istuimukavuuden. Sähköinen korkeudensäätö helpottaa tuoliin pääsyä ja poistumista. Valitse Tilto, kun pitkään istuttaessa tarvitaan aktivoitua ja liikettä.



G2 Tilto EHR

Tuoli, jossa on käsikäyttöinen korkeudensäätö ja kallistus. Tämä malli on suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka viettävät paljon aikaa tuolissaan istuen. Tilto-mallien ainutlaatuinen ominaisuus on kallistustoiminto, joka edistää vaihtelua ja liikettä.



E2 Tilto EHR

Tuoli sähköisellä korkeudensäädöllä ja kallistuksella. Tämä malli on suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka viettävät paljon aikaa tuolissaan istuen. Tilto-mallien ainutlaatuinen ominaisuus on kallistustoiminto, joka edistää vaihtelua ja liikettä



Tilto G2 24/7

Tilto G2 24/7 on oikea valinta, kun istuma-asennossa kuluu suurin osa ajasta. 24/7-malli on varustettu erikoispehmusteilla ja hengittävällä materiaalilla, jotta siinä voi istua mukavasti pitkään. Kallistustoiminto tarjoaa liikkumismahdollisuuksia.



Tilto E2 24/7

Tilto E2 24/7 on oikea valinta, kun istuma-asennossa kuluu suurin osa ajasta. Sähköinen korkeudensäätö. 24/7-malli on varustettu erikoispehmusteilla ja hengittävällä materiaalilla, jotta siinä voi istua mukavasti pitkään. Kallistustoiminto tarjoaa liikkumismahdollisuuksia.



S1 Stand support

Seisaaltaan tapahtuvan työskentelyn tueksi pysty tukituoli. Tuoli tarjoaa hyvän tuen manuaalisesti säädettävien istuimen korkeuden ja kallistuksen sekä selkänojan kulman ansiosta.

Potilasnostimet keventävät fyysistä rasitusta

Potilassiirrot ovat hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä.

Fyysistä kuormitusta saadaan vähennettyä käyttämällä potilasnostimia.

Samalla nostettavan kokemus turvallisuudesta ja yksityisyydestä kasvaa

Tehokasta nostamista

Kolmasosa kaikista terveydenhuollon ammattivammoista johtuu nostamisesta. Seitsemän kymmeneistä hoitajasta pitää työtään raskaana. Potilasnostimien käyttö vähentää sairaspäiviä ja nostamiseen tarvittavan henkilöstön määrää.

Korpisen valikoimissa olevat Human Caren nostoratkaisut ovat luotettavia ja innovatiivisia. Human Caren missio on parantaa hoidon laatua ja liikkumisvapautta niille, joilla on erityistarpeita. Korkealaatuiset tuotteet ovat helppoja asentaa ja vaativat vähän huoltoa.

Ylänostin on paras mahdollinen apuväline potilaan siirtämiseen hoivaympäristössä. Kattoon kiinnitetyn nostimen ansiosta lattiatilaa erilliselle nostimelle ei tarvita. Siten hoitajat voivat liikkua nopeammin, vapaammin ja turvallisemmin.

Human Care tarjoaa täydellisen valikoiman sekä ylänostimia että siirrettäviä järjestelmiä. Nostinjärjestelmät täydentää monipuolinen valikoima kattokiskoratkaisuja, nostoliinoja ja lisävarusteita. Kattokiskoratkaisuissa on rajattomia asennusmahdollisuuksia niin potilas- ja kylpyhuoneeseen

kuin yleisiin tiloihinkin, sairaalaan, hoivakotiin tai kotiloihin. Human Caren nostojärjestelmät sopivat jopa uimahalleihin. Kevyet kattokiskot voidaan asentaa rakentamisen yhteydessä, mutta helposti lisätä myös jo olemassa oleviin tiloihin. Kattokiskojärjestelmät sivulla 5.



Roomer S – huoneesta toiseen

Huoneesta toiseen huoneeseen siirtyminen

Roomer S on ylänostin, joka tarjoaa mahdollisuuden siirtää potilas huoneesta toiseen tekemättä muutoksia oviaukkoihin. Se sopii myös tiloihin, joissa on liukuovet tai palo-ovet. Sen siirrettävyyden ansiosta samaa laitetta voidaan helposti käyttää useissa huoneissa, mikä vähentää huomattavasti kustannuksia. Nostimen kantokapasiteetti on 220 kg, ja siihen voidaan valita 45 tai 55 cm leveä, kevyt nostotanko joko 2, 3 tai 4 pisteen ripustuksella.

Turvallinen kokemus kaikille

Roomer S:n mahdollistama huoneidenvälinen toiminto vähentää nostojen määrää ja minimoi sekä potilaan että hoitajan rasitusta. Roomer S tekee nostosta mukavan kokemuksen, kun käynnistys ja pysähdys ovat pehmeitä ja nousu tapahtuu vakionopeudella potilaan painosta tai liikkeen suunnasta riippumatta. Akun lataus voidaan tehdä kätevästi käsiohjaimen avulla.



Tiedon tallennus

Roomer S:ssä on mahdollisuus tallentaa käyttö- ja suorituskykyä koskevia tietoja. Nostimen käyttöön ja kuntoon liittyviä yksityiskohtaisia tietoja voidaan tarkastella suoraan sovelluksessa tai siirtää tietokoneelle lisäanalyysiä varten.



HeliQ – kiskoon kiinteästi asennettu

Nykyaikainen muotoilu

HeliQ-ylänostin sopii mihin tahansa ympäristöön. Pieni koko varmistaa helpon käytön niin sairaaloissa, hoivakodeissa kuin kotihoidossa. Nostinta on kolme eri mallia ja nostokapasiteettia, 150 kg, 220 kg ja 300 kg. Se vastaa kaikenlaisten potilaiden tarpeisiin ja mahdollistaa potilaalle optimaalisen mukavuuden, kun nostinliinan silmukat voidaan kiinnittää sopivan pituisina 2- tai 4-pisteisiin nostotankoihin.

Mukavuutta ja tehokkuutta

Potilaan painosta riippumattoman tasainen nostonopeus, sekä pehmeä käynnistys ja pysäytys tekevät nostamisesta mukavan kokemuksen. Pehmeä käynnistys ja pehmeä pysäytys mahdollistavat potilaan hitaan nostamisen ylös ja alas, mikä vähentää potilaan kääntymistä. HeliQ mahdollistaa kaksinopeuksisen nostamisen, siinä on pitkäkestoinen akku, joka voidaan ladata kätevästi käsiohjaimen avulla. Nostimen voi myös varustaa voimansiirrolla, jolloin nostolaitteen liikuttamista ei tarvitse tehdä manuaalisesti, ja kis-



kojen sisäisellä latauksella (jatkuva varaus). HeliQ on erittäin helppo käsitellä asennuksen ja huollon aikana sen keveyden (7 kg) ansiosta. HeliQ Power Traverse -nostin on kaksinopeuksinen, se on suojattu kaikista suunnista roiskuvilta vedeltä (IPX4) ja sen työskentelykuormitus on turvallinen 300 kg asti.

Altair –siirrettävä nostin

Ilman suuria investointeja

Altair-ylänostin on kevyt (5,9 kg), joten siirrettävyyden ansiosta sen käyttöalueena voi olla monta huonetta. Nostolaitteesta on valittavana kolme nostokapasiteettia: 150 kg, 220 kg ja aina 300 kg asti. Altairia voidaan käyttää joko 2, 3 tai 4-pisteisen nostotangon kanssa.

Lyömätöntä mukavuutta

Human Caren nostinliinavalikoimasta löytyy aina sopiva vaihtoehto vastaamaan potilaan tarpeisiin. 3-pisteinen ripustus mahdollistaa tasaisen painon ja pitkänomaisen istuimen. Pehmeä käynnistys ja pysähdys sekä tasainen nostonopeus ja -suunta tekevät nostamisesta miellyttävän kokemuksen potilaille heidän painostaan riippumatta. Altair tarjoaa kaksinopeuksisen nostamisen, pitkäkestoisen akun ja akun lataamisen kätevästi käsiohjaimen avulla. Altairin nostotanko on kevyt ja helppokäyttöinen, ja saatavilla olevat kaksi eri leveyttä mahdollistavat nostoliinojen kiinnittämisen sopiviksi monenlaisille potilaille.



Tiedon tallennus

Myös HeliQ:ssa ja Altairissa on mahdollisuus tallentaa käyttö- ja suorituskykyä koskevia tietoja. Nostimen käyttöön ja kuntoon liittyviä yksityiskohtaisia tietoja voidaan tarkastella suoraan sovelluksessa tai siirtää tietokoneelle lisäanalyysiä varten.

Nostinratkaisujen suunnittelu ja asennus

Väinö Korpinen Oy on jo lähes 30 vuoden ajan tarjonnut arkkitehdeille suunnittelun tueksi esteettömyyden asiantuntija-apua, kylpyhuoneiden pohjapiirroksia ja objektiikirjastot tuoteluetteloineen. Kattokiskojärjestelmiin perustuvat potilasnostimet ovat investointi, joka vähentää hoitajien työkuormitusta, estää työtapaturmia, vapauttaa hoitohenkilökuntaa muihin töihin ja lisää nostettavien turvallisuudentunnetta. Kattokiskot voidaan suunnitella sijoitettaviksi potilashuoneeseen sängyn yläpuolelle, kylpyhuoneeseen, näiden välille ja jopa johtamaan potilashuoneesta muihin tiloihin. Ne voidaan asentaa jo rakentamisen yhteydessä tai lisätä olemassa oleviin tiloihin.

Yläkiskojärjestelmien suunnittelu saattaa vaatia uudenlaista osaamista, missä Human Care ja Korpinen voivat yhteistyössä avustaa tarjoamalla yleistä tukea suunnitteluun ja asentamiseen, mutta myös suunnitteluohjelmien materiaalin objekteineen.

ISO 13485 -standardi (Terveystieteiden laitteet ja tarvikkeet) on kansainvälisesti tunnustettu laadunhallintajärjestelmien standardi lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa. ISO 13485 -sertifikaatti todistaa Human Caren sitoumuksen lääkinnällisten laitteiden laatuun ja prosessien noudattamiseen. Human Care ja Korpinen ottavat vastuun nostinjärjestelmien turvallisuudesta nimittämällä sertifioituneita asentajia valvomaan asennuksia.



Kattokiskot voidaan asentaa rakentamisen yhteydessä, mutta helposti lisätä myös jo olemassa oleviin tiloihin.

Kattokiskojärjestelmät

Kattokiskojärjestelmä on optimaalinen vaihtoehto potilaiden nostamiseen ja siirtämiseen sairaaloissa, hoitolaitoksissa tai yksityiskodeissa. Ylänostin on aina saatavilla, se ei vie lattiatilaa, ja sallii hoitajalle tilan olla lähellä potilasta siirron aikana. Kiskojärjestelmät on helposti mukautettavissa potilaan tarpeisiin ja asennetaan turvallisiksi huoneen koosta tai rakennuksen rakenteesta riippumatta. Toimitamme laajan valikoiman kattokiskoja ja asennusmahdollisuuksia.

Kustannustehokkuutta

Tarjoamme täyden valikoiman kiskojärjestelmiä kaikkiin tilanteisiin. Ne on nopea ja vaivaton asentaa, mikä vähentää kustannuksia.

Pieni paino – suuri kapasiteetti

Järjestelmät ovat kevyitä, mutta tarjoavat suuren nostokapasiteetin. Keveyden ansiosta yksi asentaja pystyy tekemään perusasennuksen yksin.

Optimoidut kiskopituudet

Kiskoja on saatavana 2,5 metristä 7 metriin. Standardisoidut kiskojen pituudet vähentävät leikkaamistarvetta, pienentävät hävikkiä ja lyhentävät asennukseen kuluvaa aikaa.

Useita asennusmahdollisuuksia

Human Caren kiskojärjestelmien asennusvaihtoehtoja löytyy oikea kaikkiin vaatimuksiin.

Ne voidaan asentaa kattoon, seiniin tai lattiaan ja erilaisiin materiaaleihin, kuten betoniin, kevytbetoniin, puuhun tai ripustettuun kattoon. Kiskoja voidaan käyttää yksinään tai yhdistelmänä erityistarpeita varten.

Lataus kiskossa

Kaikki Human Care -kiskoprofiilit (P87, P120, P180) on valmistettu kiskossa tapahtuvaa lataamista varten, joten se on helppo lisätä. Jatkuva lataus on mahdollista koko kiskon matkalla tai jollain lyhyellä latausaseman osalla.


Kiskovaihtoehdot

Yhden kiskon järjestelmä


on yksikertainen ja kustannustehokas asennus. Yksittäiset kiskot asennetaan yleensä huoneen tärkeimpien alueiden, kuten esimerkiksi sängyn yläpuolelle.

Poikittainen H-järjestelmä


koostuu kahdesta pääkiskosta, joiden välissä on liikkuva, kohtisuoraan asennettu poikittaiskisko, joka tarjoaa mahdollisuuden siirtää potilasta mihin tahansa suuntaan koko huoneen pituudelta. Järjestelmässä voidaan yhdistää eripituisia kiskoprofiileja. Se mahdollistaa myös erityyppisten lisälaitteiden yhdistelmän.

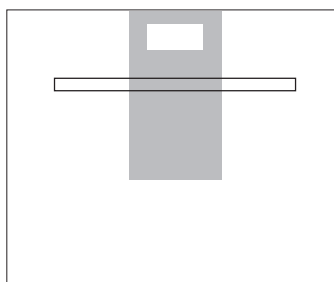


Yhden kiskon järjestelmä

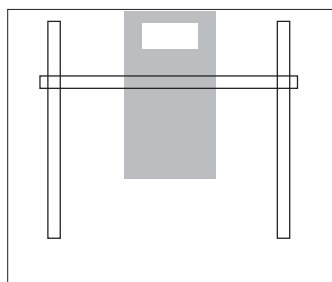

Poikittainen H-järjestelmä

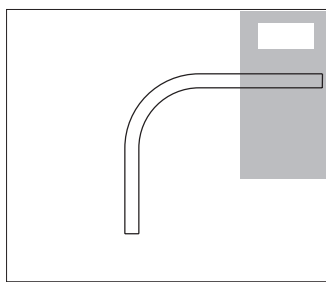

Kaarevat kiskot

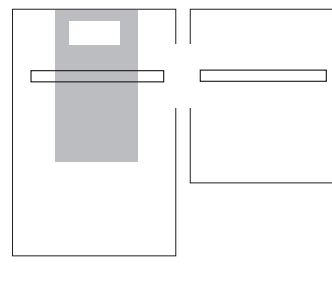

Huoneesta toiseen

Kiskoprofiilit

Kiskoprofiilit on valmistettu suulakepuristetusta alumiinista ja niitä on saatavana eri vakiopituuksina ja -profiileina. Asennuksen helppous ja joustavuus ovat olleet lähtökohtana kiskoprofiilien suunnittelussa, mitä tukee laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja. Kiskot ovat kevyitä, mikä tekee asentamisesta entistä helpompaa.

P87-kisko

P87-kiskoa käytetään pääasiassa yhden kiskon järjestelmissä tai pääkiskona poikittaisissa H-järjestelmissä. Pienissä tiloissa, kuten kylpyhuoneissa ja käytävissä, P87 voidaan käyttää sekä pääkiskoina että poikittaiskiskoina. P87 on saatavana erilaisina pituuksina 2,5 metristä 7 metriin sekä kaarevana. P87 mahdollistaa nostolaitteen jatkuvan latauksen kiskossa.

P8-alakattoprofiili

Alakattoprofiililla varustettua P87-kiskoa käytetään yhden kiskon järjestelmissä tai pääkiskona poikittaisissa H-järjestelmissä, kun kisko asennetaan alaslasketun katon tasalle. Alakattoprofiililla varustettua P87-kiskoa on saatavana pituuksina 2.5, 3 ja 4 metriä. P87 mahdollistaa nostolaitteen jatkuvan latauksen kiskossa.

P120- ja P180-kiskot

Profiilikiskot P120 ja P180 on suunniteltu käytettäväksi sekä poikittaiskiskoina että järjestelmissä, joissa tarvitaan pitkiä etäisyyksiä kiinnityspisteiden välillä. P120- ja P180-kiskoja on saatavana erilaisina pituuksina 3 metristä 7 metriin. Nämäkin kiskot mahdollistavat nostolaitteen jatkuvan latauksen kiskossa.

Kääntöyksikkö

Kääntöyksikkö on integroitava osa kiinteää kiskojärjestelmää, jota käytetään terveydenhoidon, tehohoidon ja kuntoutuksen yksiköissä. Se mahdollistaa vaihdon kolmen tai neljän kiskon välillä. Kääntöyksikkö on ihanteellinen asennuksiin, joissa kaarevat profiilit eivät sovi vaatimuksiin tai ahtaisiin tiloihin, ja joissa on useita nostopisteitä. Kun kääntöyksikössä on neljä lähtöpistettä, voidaan nostolaitteen kulkusuunta helposti kääntää alkuperäisestä 90 asteen kulmassa toiselle kiskolle joko vasemmalle tai oikealle.

Hyödyt ja ominaisuudet


- Automaattinen virta
- Sujuva ja hiljainen toiminta
- Nopea ja helppo käyttää, kulkusuunnan muutos alle 5 sekunnissa

Portti

Portit mahdollistavat siirrot X-Y- tai poikkijärjestelmästä suoralle kiskolle tai päinvastoin. Ne ovat olennainen osa järjestelmiä, joita käytetään yleisesti terveydenhuoltolaitoksissa, etenkin tehohoidossa ja kuntoutuksessa. Gate-järjestelmämme on erittäin nopea, alle 3 sekunnin käyttöaika ja hiljainen käyttö, tehokas, kätevä ja helppo käyttää.


Asennus

Kiskojärjestelmiin on tarjolla laaja valikoima kiinnitysvaihtoehtoja. Ne on suunniteltu tekemään asennuksesta nopeaa ja joustavaa turvallisuus huomioiden. Kaikki kiskot ja lisävarusteet ovat ISO 10535:2006 -standardin mukaisia.

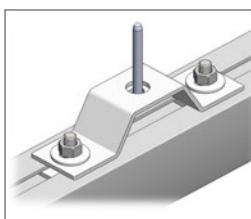


Kattokiinnitys

Käytetään betoni- ja puupalkkiruodekattoihin tai yhdessä tankokannattimien kanssa. Kattokiinnikkeet voidaan asentaa nopeasti ja helposti poraamatta kaikkiin kiskoihin.

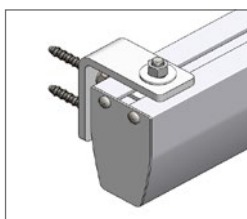


Seinäkiinnitys

Kun kattokiinnitys ei ole mahdollinen, voidaan seinäkiinnikkeitä käyttää kaikille kiskoille, mikä mahdollistaa optimaalisen asennuksen kaikissa tilanteissa.

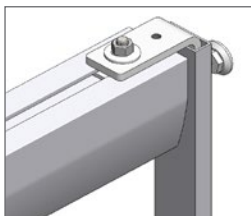

Asennustolpat

Käytetään, kun asennus kattoon tai seiniin ei ole mahdollista tai kun halutaan välttää asennusjälkiä, esimerkiksi väliaikaisessa käytössä.

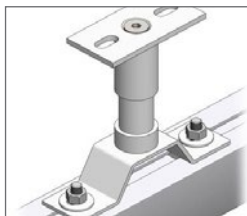

Tankokannattimet

Soveltuu akustisiin kattoihin tai epätasaisiin kattoihin. Tankokannattimet tarjoavat esteettisen ratkaisun. Käytettävien kannattimien lukumäärä riippuu jänneväleistä ja kattomateriaalista.




Piiloasennus

Mahdollistaa kiskon asennuksen samaan tasoon alaslasketun katon kanssa.



Karmikannake

Käytetään oven karmeissa tai ikkunoissa, joissa seinän lujuus on heikentynyt. Korkeus 2700 mm, leveys 3000mm (voidaan leikata).

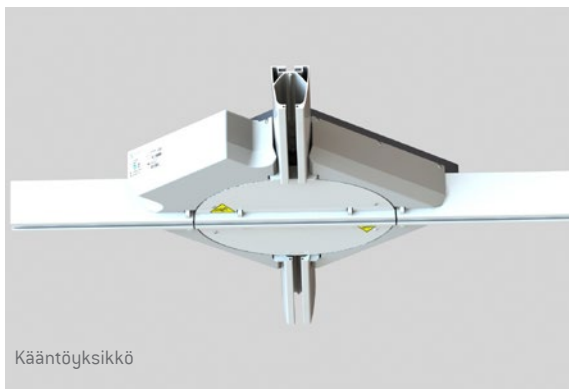

Hyödyt ja ominaisuudet

- Automaattinen virta
- Käytetään ilman käsiohjausta
- Pystyy käsittelemään useita nostimia kerralla

Tarvikkeet

2-pistenostotanko kiinteisiin nostimiin		2 ripustuspisteen nostotanko HeliQ-nostimeen, saatavana 3 leveyttä, 35 cm, 45 cm ja 60 cm.	Tuotenro: 35 cm: HC72754 Tuotenro: 45 cm: HC72755 Tuotenro: 60 cm: HC72757
2-pistenostotanko siirrettäviin nostimiin		2 ripustuspisteen nostotanko siirrettäviin nostimiin ja lenkinostinliinoille (Altair ja Roomer S). 2 leveyttä, 45 cm ja 55 cm.	Tuotenro: 45 cm: HC55751 Tuotenro: 55 cm: HC55764
4-pistenostotanko kiinteisiin nostimiin		4 ripustuspisteen nostotanko HeliQ-nostimeen	Tuotenro: HC70800
4 pisteen sähköinen levitin kiinteisiin nostimiin		4 pisteen sähkökäyttöinen levitin HeliQ-nostimeen. Ylivoimainen laite sairaaloihin ja muihin hoivayksiköihin, joissa käytetään kiinnittimillä varustettuja nostinliinoja. Laite mahdollistaa potilaan asennon korjaamisen myös nostamisen aikana. Käsiohjaimella säädettävä, sähköllä toimiva liike on pehmeä ja miellyttävä käyttäjälle ja vähentää hoitajan omia ponnisteluja.	Tuotenro: Small (manuaalinen): HC92441 Medium (sähkökäyttöinen): HC92442 Large (sähkökäyttöinen): HC92443
4-pistenostotanko siirrettäviin nostimiin		4 ripustuspisteen nostotanko, 49 cm. Mahdollistaa 4-pisteripustuksen Altair ja Roomer S -nostimiin. Kiinnitetään nostimen koukkuun.	Tuotenro: HC55619
Siirtovaunu		Pyörällinen vaunu siirrettävien nostimien kuljettamiseen huoneesta toiseen ja varastointiin. Nostinliinat ja lisätarvikkeet on helppo säilyttää vaunun korissa. Mitat: L 48 cm x S 41 cm x K 79 cm Paino: 14.9 kg Kuormituskestävyys: 20 kg	Tuotenro. HC50346
HeliQ-nostimen seinäteline		HeliQ-nostotankojen ja -liinojen turvalliseen säilytykseen	Tuotenro: HC55786
Vaaka		Sairaalakäyttöön suunniteltu vaaka, jolla voidaan punnita potilaita aina 320 kiloon asti. Vaaka on nopea- ja helppokäyttöinen ja se on suunniteltu vastaamaan EN standardeja. Sopii käytettäväksi nostimien Altair, HeliQ ja Roomer S kanssa.	Roomer S ja Altair: Tuotenro. HC50590 HeliQ: Tuotenro: HC50591
Apuvarsi		Apuvarsta käytetään työkaluna siirrettävien nostimien siirron yhteydessä. Apuvarsi yhdistetään siirtovaunuun kiinnitettyn hihnaan, jolloin käyttäjän ei tarvitse itse nostaa nostinta, vaan se siirtyy suoraan vaunuun ja vaunusta. Apuvarsi on valmistettu kevyestä metallista ja sen pituus on 60 cm.	Tuotenro: HC50494

Nostinliinat

Laaja valikoima anatomisesti suunniteltuja nostinliinoja, jotka on kehitetty potilaan turvallisuutta ja mukavuutta ajatellen.

Yli 29 erilaisen nostinliinan valikoima mahdollistaa oikeanlaisen nostinliinan oikean kokoisena ja vastaamaan parhaiten käyttäjän tarpeisiin. Nostinliinat valitaan käyttäjän koon, vartalon hallinnan ja muiden erityistarpeiden mukaisesti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen toimintakykyään. Ne voidaan asettaa käyttäjälle myös istuma-asennossa. Nostinliinat soveltuvat muidenkin valmistajien nostimiin. Ohessa on perusnostotilanteisiin soveltuvat nostinliinat. Kysy muita vaihtoehtoja korpinen@korpinen.com.

Valitse oikea materiaali oikeaan tilanteeseen

Oikean materiaalin valinta on tärkeää, sillä eri materiaaleilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka tukevat erilaisia toimintoja. Tukeva ja pienen kitkan aiheuttava materiaali helpottaa nostinliinan pukemista ja riisumista. Kylpemiseen ja suihkuun valitaan materiaali, joka kuivuu nopeasti ja on helppo puhdistaa. Hengittävät ja pehmeät materiaalit mahdollistavat nostinliinan jättämisen potilaan alle sänkyyn ja pyörätuoliin. Valitse oikea materiaali kuhunkin käyttötarkoitukseen.




Polyesteri – kestävä ja helppo huoltaa

Kestävä materiaali, helppo puhdistaa ja vähäinen kitka, mikä tekee käytöstä yksinkertaisempaa. Polyesteristä valmistettua nostinliinaa ei tule jättää potilaan alle sängyssä tai tuolissa.



Polyesteriverkko – joustava ja ilmava

Pehmeä ja ohut materiaali, joka hengittää ja kuivuu nopeasti. Jonkin verran joustava, joten se voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Polyesteriverkkomateriaalista valmistettuja nostinliinoja käytetään kylpemisen ja suihkussa käymisen yhteydessä.

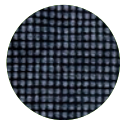

Trevira – pehmeä, mukava ja korkeakitkainen

Ainutlaatuinen, palonkestävä ja pehmeä materiaali, joka hengittää hyvin. Voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Liinassa on suuri kitka, joka estää liukumisen pyörätuolissa tai sängyssä istuessa.



Puuvilla – kertakäyttöinen

Kertakäyttöinen nostinliina on valmistettu vahvasta, mutta pehmeästä puuvillasta. Kertakäyttöisiä puuvillanostinliinoja ei voi pestä ja ne tulee hävittää käytön jälkeen.



Polyesterikuitukangas – hengittävä

Polyesterikuitukangasmateriaalimme on uudelleenkäytettävä materiaali, joka on erittäin miellyttävä potilaan ihoa vasten. Se mahdollistaa maksimaalisen ilman vaihdon ja hengittävyyden. Voidaan jättää potilaan alle.



CoolMAX – kevyt ja kosteutta säätelevä

Tällä vallankumouksellisella kankaalla on kosteutta säätelevä ominaisuus, joka tuo kehon hikoilun kankaan läpi sen pintaan, mistä se haihtuu nopeasti. CoolMAX auttaa pitämään kehon lämpötilan alhaisena. Se myös kuivuu nopeasti ja on siksi ihanteellinen kylpemiseen. Materiaali on kehitetty käytettäväksi muotoiluissa tuoleissa..



Hengittävä Plus – kevyt, hengittävä ja joustava

Tämä on kevyt, viileä ja hengittävä verkkokangas, jolla on CoolMAXin edut. Materiaali, jossa on "kaksisuuntainen jousto" mukailee kehoa pehmeänä kuin toinen iho. Tämä venyvä kangas on suunniteltu myös käyttäjille, joilla on iho-ongelmia.



Erilaiset nostoasennot

Ihmiset ovat erilaisia ja on itsestään selvää, että kaikille ei käy sama nostinliina. Monipuoliset nostinliinat on suunniteltu käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen.

2 pisteen ripustus

Sopii useimpiin nostotilanteisiin ja antaa hyvän istuma-asennon. 2-pisteripustus sopii kiinteisiin ja siirrettäviin nostimiin.



3 pisteen ripustus

Tarjoaa pitkänomaisen istuimen ja tasapainoisemman painon jakautumisen. 3 pisteen ripustus sopii erityisesti potilaille, joilla on lisääntynyt painehaavojen riski. Vain siirrettäviin nostimiin.



4 pisteen ripustus

Tilava istuin isoille potilaille tai käytettäessä levitintä. 4 pisteen ripustus sopii sekä kiinteisiin että siirrettäviin nostimiin.




Oikean nostinliinan valinta

1

Mittojen tulkinta:

A=aukko, B=vartalon leveys, C= vartalon pituus, D=vyötärölinja

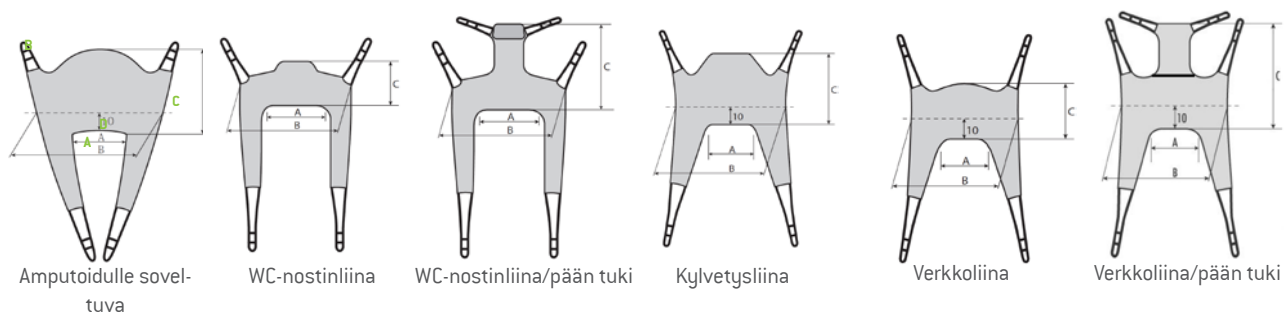

2

Mittaa potilas





Liian suuri liina

Liian pieni liina

Nostettava voi pudota liinasta

Nostettava voi pudota liinasta. Kunto voi huonontua.

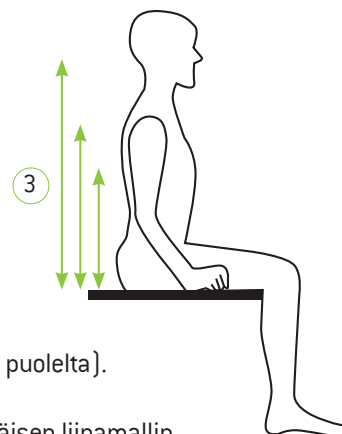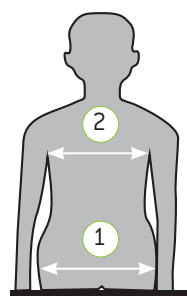

- ① Lantion alueen mittaaminen: Mittaa selän kautta mitta sivulta sivulle (ei vatsan puolelta).
- ② Mittaa selän leveys.
- ③ Mittaa selän pituudet valitessasi matalan, olkapäähän ulottuvan tai korkeaselkäisen liinamallin.

Mittaa aina istuma-asennossa.

3

Nostinliinan käyttötarkoituksen selvittäminen



Nosto pyörätuoliin
tai pois
pyörätuolista



Nosto sängkyyn tai
pois sängystä



Nosto lattialle
tai pois lattialta



WC-käynti/
Peseytyminen



Pukeutuminen/
Riisuutuminen



Kävely/
Kuntoutus

Perusliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat

- Mukautuu potilaan vartaloon tarjoten hyvän tuen koko selälle
- Pystyasento istuttaessa
- Saatavana kolmesta eri materiaalista valmistettuna



Polyesteri Polyesteri-Trevira verkko



Nostinliinan perusmalli mukautuu potilaan vartaloon ja tarjoaa hyvän tuen koko selälle. Tätä liinaa voidaan käyttää useimmissa nosto-olosuhteissa, sopii useimmille potilaille ja on hyvä valinta peruskäyttöön.

Perusliinan materiaaliveitohdot ovat polyesteri, polyesteriverkko ja Trevira-kangas. Trevira ja polyesteriverkkomateriaalit antavat kosteuden ja lämmön siirtyä tehokkaasti potilaasta.

Tuotenumero [verkko]	Tuotenumero [trevira]	Tuotenumero [polyesteri]	Koko	Nostokapasiteetti
HCHC25045-JS	HC25050-JS	HC25070-JS	Junior S	250 kg
HC25045-JM	HC25050-JM	HC25070-JM	Junior M	250 kg
HC25045-S	HC25050-S	HC25070-S	S	250 kg
HC25045-M	HC25050-M	HC25070-M	M	250 kg
HC25045-L	HC25050-L	HC25070-L	L	250 kg
HC25045-XL	HC25050-XL	HC25070-XL	XL	250 kg

Comfort-liina

Olkapäämalli ilman jaettuja jalkaosia

Saatavana myös pidempänä mallina tukemaan päätä.

- Ei vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii potilaille, joilla on kipuja
- Mukautuu helposti potilaan vartaloon



Trevira



Comfort-liina on pehmeä nostinliina ilman vahvikkeita kahvoja tai pehmusteita. Liina mukautuu helposti potilaan vartaloon. Pehmeä liina on suunniteltu antamaan potilaalle mukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Istumisliina ilman jaettuja jalkaosia, joka jakaa kehon painon tasaisesti paineen vähentämiseksi.

Comfort-liina Trevira-kankaasta mahdollistaa sen, että sen voi jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai pyörätuoliin noston jälkeen. Liina kiinnitetään potilaan ollessa makuulla.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25060-JM	Junior M	250 kg
HC25060-S	S	250 kg
HC25060-M	M	250 kg
HC25060-L	L	250 kg
HC25060-XL	XL	250 kg

Kokovartaloliina

Korkea selkämalli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös matalana mallina ilman päätukea sekä verkkokankaisena.

- Tukee päätä
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Kalteva istuin-asento



Polyesteri



Kokovartaloliina on mukava nostinliina ilman vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita takana. Se tarjoaa hyvän tuen koko selälle ja tukee päätä.

Kokovartaloliinaa voidaan käyttää useimmissa nosto-tilanteissa ja se sopii useimmille potilaille. Vahvistettu pääntuki tekee siitä sopivan nostinliinan esim. potilaiden nostamiseen tasaisilta pinnoilta, kuten lattioilta. Kokovartaloliina on valmistettu matalan kitkan polyesterikankaasta, mikä tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25010-S	S	250 kg
HC25010-M	M	250 kg
HC25010-L	L	250 kg
HC25010-XL	XL	250 kg
HC25010-XXL	XXL	300 kg
HC25010-XXXL	XXXL	300 kg

Kokovartaloliina

Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Tuettu istuma-asento



Polyester



Polyesteri-verkko



Kokovartaloliina tuntuu mukavalta ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita takana ja tarjoaa hyvän tuen koko vartalolle. Liinaa voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

Kokovartaloliinaa voidaan käyttää pesu- ja kylpytilanteissa, ja se voidaan myös jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi siirron päätyttyä.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25005-JM	Junior M	250 kg
25005-S	S	250 kg
25005-M	M	250 kg
25005-L	L	250 kg
25005-XL	XL	250 kg

Kokovartaloliina, siluettiliina

Korkea selkämalli, jossa on jaetut jalkaosat

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta on heikkoa
- Sopii hyvin lapsille



Polyesteri-verkko



Kokovartaloliina on mukava ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita. Se mukautuu henkilön koko vartaloon tarjoten hyvää tukea. Sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja sen kapea muotoilu tekee siitä optimaalisen valinnan pienemmille henkilöille.

Kokovartaloliinaa on saatavana kahdessa kankaassa, jotka voidaan jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25015-JS	Junior S	250 kg
25015-JM	Junior M	250 kg
25015-S	S	250 kg
25015-M	M	250 kg
25015-L	L	250 kg
25015-XL	XL	250 kg

Kylvetysliina

Olkapäimalli, jaetut jalkaosat

- Vahvistetut selkä- ja jalkatuet
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Vahvistettu selkä antaa ylimääräistä tukea



Polyesteri-verkko



Olkapäihin asti korkea kylvetysliina, jossa on jaetut jalkaosat ja vahvistetut selkä- ja jalkatuet. Se on suunniteltu tukemaan potilaan selkää, mikä tekee siitä hyvän ratkaisun potilaille, joiden keskivartalon kannatuskyky on heikko.

Kylvetysliina sopii useimmille potilaille ja sopii parhaiten pesutilanteisiin. Kylvetysliina on valmistettu nopeasti kuivuvasta on valmistettu polyesteriverkosta, joka kuivuu nopeasti kylpemisen tai suihkun jälkeen. Selkäuki voidaan poistaa tarvittaessa. Kylvetysliina on saatavana myös polyesteristä valmistettuna..


Tuotenumero	Koko	A (mm/ inch)	B (mm/ inch)	C (mm/ inch)	Nostokapasiteetti
HC25035-JS	Junior S	90/3.5	540/21.2	520/20.4	250 kg
HC25035-JM	Junior M	150/5.9	600/23.6	580/22.8	250 kg
HC25035-S	S	300/11.8	900/35.4	630/24.8	250 kg
HC25035-M	M	360/14.2	900/35.4	630/24.8	250 kg
HC25035-L	L	420/16.5	1000/39.4	630/24.8	250 kg
HC25035-XL	XL	470/18.5	1070/42.1	630/24.8	250 kg

WC-liina

Matala malli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös korkeampana mallina.

- Vahvistettu selkätuki
- Sopii potilaille, joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus
- Pehmeuste käsivarren alla lisää mukavuutta

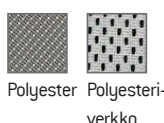

WC-liina on matala malli jaetuilla jalkaosilla. Siinä on vahvistettu selkätuki, joka antaa hyvän selkätuen ja pehmuste käsivarsien alla lisää mukavuutta. Jalkaosien leveä väli tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista ja se mahdollistaa pukeutumisen ja riisumisen WC-käynnin tai pesemisen aikana.

WC-liinan pystyasento tekee siirtymisestä helppoa ja sopii potilaille joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus. Potilaille, joilla on heikko vartalon hallinta, suositellaan lisänä vartalovyötä.

Tuotenumero (polyesteri)	Tuotenumero (verkko)	Koko	Nostokapasiteetti
HC25080-JS	-	Junior S	250 kg
HC25080-JM	HC25085-JM	Junior M	250 kg
HC25080-S	HC25085-S	S	250 kg
HC25080-M	HC25085-M	M	250 kg
HC25080-L	HC25085-L	L	250 kg
HC25080-XL	HC25085-XL	XL	250 kg

WC-liina

Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Vahvistettu selkäosa
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta heikkoa
- Pysty istuma-asento
- Lapsille sopiva malli



WC-liinassa on korkea vahvistettu selkätuki, joka antaa selälle lisää tukea ja pehmusteet käsivarsien alla lisämukavuutta. Nostinliinassa on myös pehmustettu ja säädettävä niskatuki, joka antaa lisävakautta pään hallintaan. Jalkaosien leveä välisoa tekee WC-liinasta nopean ja yksinkertaisen käyttää ja mahdollistaa pukeutumisen ja riisuutumisen wc- käynnin tai kylpemisen aikana.

Pystyasento helpottaa siirtymistä WC:hen ja takaisin ja sopii henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea vartalon ja pään hallinnassa. Potilaille, joiden vartalonhallinta on heikkoa, suositellaan lisäksi tukivyötä. WC-liina on saatavilla nopeasti kuivuvana verkkokankaana.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25090-JM	Junior M	250 kg
25090-S	S	250 kg
25090-M	M	250 kg
25090-L	L	250 kg
25090-XL	XL	250 kg

Istumaliina

Ylimääräistä selkätukea

- Olkapäille ulottuva malli, jossa on jaetut jalkaosat
- Vahvistettu selkä- ja jalkaosat
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Pystyasento



Istumanliina on suunniteltu antamaan henkilölle ylimääräistä selkätukea, ja sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

Vahvistettu selkäosa ja polyester kankaan kitkatomuus tekee nostotilanteista nopeita ja yksinkertaisia.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25030-JS	Junior S	250 kg
25030-JM	Junior M	250 kg
25030-S	S	250 kg
25030-M	M	250 kg
25030-L	L	250 kg
25030-XL	XL	250 kg

Monikäyttöliina

Kävelyn harjoitteluun ja kuntoutukseen

- Täydellinen liina kävelyharjoitteluun ja kuntoutukseen
- Sopii potilaille, joilla on jonkin verran kehon hallintaa
- Voidaan käyttää pukeutumisen ja riisumisen aikana



Monikäyttöliina on monipuolinen liina erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhdessä laajan lisävarustevalikoiman kanssa liina tukee seisomista ja kävelyä tasapainoharjoitteissa, WC-käynneillä sekä pukeutumisen ja riisumisen yhteydessä.

Monikäyttöliina sopii potilaille joilla on jossain määrin kehon hallintaa. Lisätukea varten hihnaa voidaan käyttää lantiovyön kanssa (kuvassa).

Koko	Tuotenumero	Nostokapasiteetti
S	HC25105-S	150 kg
M	HC25105-M	150 kg
L	HC25105-L	150 kg
XL	HC25105-XL	150 kg

HENKILÖNOSTIN

Turvallinen työkuormitus	150 kg	* 200 kg
Nostotanko (yläasento)	180 cm	177 cm
Nostotanko (ala-asento)	55 cm	58 cm
Alarungon pituus	117 cm	122 cm
Jalasten kokonaiskorkeus	12 cm	12 cm
Leveys jalakset kiinni	65 cm	69 cm
Leveys jalakset auki	109 cm	133 cm
Kuulalaakeroidut etupyörät	7,5 cm	7,5 cm
Jarrulliset takapyörät	10 cm	10 cm
Akkukotelon paino	3 kg	3 kg
Kokonaispaino	51 kg	54,3 kg
Nostot keskimäärin / lataus	60	30



Akku ladataan helposti kytkemällä virtajohto seinäpistorasiaan.



Ainutlaatuista All-In-One-nostinta voidaan käyttää henkilönostimena tai seisomanojanostimena ilman, että muuntamiseen tarvitaan työkaluja. Henkilönostin on helposti muunnettavissa seisomanojanostimeksi, jolloin sitä voi käyttää siirtämiseen seisoma-asennossa.



All-In-One-nostimella avustettava voidaan nostaa myös lattialta.




Henkilönostimen käyttö on helppoa, ja sen ylä- ja ala-asennon välinen nostoalue on laaja. Nostot onnistuvat niin lattialta kuin korkeista sängyistä.



Helppokäyttöinen Domino-hygienialiina helpottaa avustamista ja takaa hyvän tuen.

- All-In-One-nostimen rungon pituus on pyörät mukaan luettuina vain 117 cm, joten sen kääntösäde on erittäin pieni.
- Kompaktissa ja käytännöllisessä All-In-One-nostimessa yhdistyy tehokkuus ja yksinkertainen käyttö.
- All-In-One-nostin on helppokäyttöinen ja sisältää monia ainutlaatuisia turvallisuustoimintoja: se esimerkiksi pysäyttää nosto- tai laskuliikkeen automaattisesti, jos nostovarren edessä havaitaan este.
- Alarungon korkeus on vain 12 cm, joten se mahtuu useimpien sänkyjen alle.

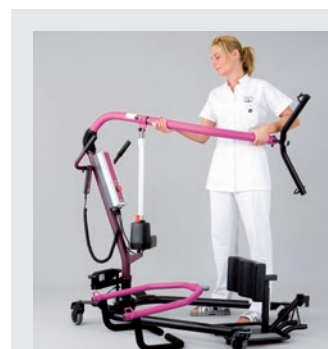

SEISOMANOJANOSTIN

Turvallinen työkuormitus	150 kg/330 lb.	* 200 kg/440 lb.
Nostovarsi (yläasento)	191 cm/75.20 in.	191 cm/75.2 in.
Nostovarsi (ala-asento)	95 cm/37.40 in.	95 cm/37.40 in.
Alarungon pituus	117 cm/46.06 in.	122 cm/48.03 in.
Jalasten kokonaiskorkeus	12 cm/4.72 in.	12 cm/4.72 in.
Leveys jalakset kiinni	65 cm/25.59 in.	69 cm/27.16 in.
Leveys jalakset auki	109 cm/42.91 in.	133 cm/52.36 in.
Kuulalaakeroidut etupyörät	7,5 cm/2.95 in.	7,5 cm/2.95 in.
Jarrulliset takapyörät	10 cm/3.93 in.	10 cm/3.93 in.
Akkukotelon paino	3 kg/6.6 lb.	3 kg/6.6 lb.
Jalkalevyn ja		
polvituen paino	8,5 kg/18.7 lb.	8,5 kg/18.7 lb.
Kokonaispaino	58,5 kg/128.7 lb.	61,5 kg/135.3 lb.
Nostot keskimäärin / lataus	60	30

Kun henkilönostin muunnetaan seisomanojanostimeksi, siitä tulee aktiivinostin. Avustettava hyödyntää aktiivisesti lihasvoimaansa nostotilanteen kaikissa vaiheissa. Seisoma-asento on avustettavalle aktivoiva siirtoasento.



Nostot ja laskut sujuvat vaivattomasti. Laite helpottaa siirtymistä pyörätuoliin, sänkyyn, WC:hen, suihkuun ja pois. Riisuminen ja pukeminen on helppoa WC-käyntien yhteydessä. Avustajan selän kuormitus vähenee. Alla olevista kuvista näkee, miten helposti avustettava voidaan siirtää pyörätuolista WC-istuimelle.



Polvituki on anatomisesti muotoiltu ja säädettävissä sekä pysty- että vaakasuunnassa. Tämän ansiosta polvituki voidaan säätää aina avustettavan tarpeisiin sopivaksi.



Nostaminen on miellyttävää avustettavalle. Käsien alla ei tunnu epämukavaa painetta.



Avustettava voidaan laskea varovaisesti WC-istuimelle.

Henkilönostin on helppo muuntaa seisomanojanostimeksi. Nostovarren uloin osa irrotetaan, minkä jälkeen haarukkamallinen nostovarsi ja jalka- ja polvituki kiinnitetään paikalleen. Työkaluja ei tarvita. Jarrut kannattaa lukita muuntamisen ajaksi.



Nostimen hätälaskutoimintoa voidaan ohjata sähköisesti tai manuaalisesti. Akku on helposti vaihdettavissa.

KORPINEN