

# Nostinliinat

**KORPINEN**

- A PART OF **AddLife**



**HUMAN CARE**  
Your Life. Your Way.


# Nostinliinat

Laaja valikoima anatomisesti suunniteltuja nostinliinoja, jotka on kehitetty potilaan turvallisuutta ja mukavuutta ajatellen.

Yli 29 erilaisen nostinliinan valikoima mahdollistaa oikeanlaisen nostinliinan oikean kokoisena ja vastaamaan parhaiten käyttäjän tarpeisiin. Nostinliinat valitaan käyttäjän koon, vartalon hallinnan ja muiden erityistarpeiden mukaisesti tukemaan parhaalla mahdollisella tavalla hänen toimintakykyään. Ne voidaan asettaa käyttäjälle myös istuma-asennossa. Nostinliinat soveltuvat muidenkin valmistajien nostimiin. Ohessa on perusnostotilanteisiin soveltuvat nostinliinat. Kysy muita vaihtoehtoja [korpinen@korpinen.com](mailto:korpinen@korpinen.com).

## Valitse oikea materiaali oikeaan tilanteeseen

Oikean materiaalin valinta on tärkeää, sillä eri materiaaleilla on yksilöllisiä ominaisuuksia, jotka tukevat erilaisia toimintoja. Tukeva ja pienen kitkan aiheuttava materiaali helpottaa nostinliinan pukemista ja riisumista. Kylpemiseen ja suihkuun valitaan materiaali, joka kuivuu nopeasti ja on helppo puhdistaa. Hengittävät ja pehmeät materiaalit mahdollistavat nostinliinan jättämisen potilaan alle sänkyyn ja pyörätuoliin. Valitse oikea materiaali kuhunkin käyttötarkoitukseen.

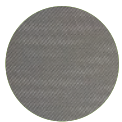

### **Polyesteri – kestävä ja helppo huoltaa**

Kestävä materiaali, helppo puhdistaa ja vähäinen kitka, mikä tekee käytöstä yksinkertaisempaa. Polyesteristä valmistettua nostinliinaa ei tule jättää potilaan alle sängyssä tai tuolissa.



### **Polyesteriverkko – joustava ja ilmava**

Pehmeä ja ohut materiaali, joka hengittää ja kuivuu nopeasti. Jonkin verran joustava, joten se voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Polyesteriverkkomateriaalista valmistettuja nostinliinoja käytetään kylpemisen ja suihkussa käymisen yhteydessä.



### **Trevira – pehmeä, mukava ja korkeakitkainen**

Ainutlaatuinen, palonkestävä ja pehmeä materiaali, joka hengittää hyvin. Voidaan jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai sänkyyn. Liinassa on suuri kitka, joka estää liukumisen pyörätuolissa tai sängyssä istuessa.



### **Puuvilla – kertakäyttöinen**

Kertakäyttöinen nostinliina on valmistettu vahvasta, mutta pehmeästä puuvillasta. Kertakäyttöisiä puuvillanostinliinoja ei voi pestä ja ne tulee hävittää käytön jälkeen.



### **Polyesterikuitukangas – hengittävä**

Polyesterikuitukangasmateriaalimme on uudelleenkäytettävä materiaali, joka on erittäin miellyttävä potilaan ihoa vasten. Se mahdollistaa maksimaalisen ilmanvaihdon ja hengittävyuden. Voidaan jättää potilaan alle.



### **CoolMAX – kevyt ja kosteutta säätelevä**

Tällä vallankumouksellisella kankaalla on kosteutta säätelevä ominaisuus, joka tuo kehon hikoilun kankaan läpi sen pintaan, mistä se haihtuu nopeasti. CoolMAX auttaa pitämään kehon lämpötilan alhaisena. Se myös kuivuu nopeasti ja on siksi ihanteellinen kylpemiseen. Materiaali on kehitetty käytettäväksi muotoilluissa tuotteissa..



### **Hengittävä Plus – kevyt, hengittävä ja joustava**

Tämä on kevyt, viileä ja hengittävä verkkokangas, jolla on CoolMAXin edut. Materiaali, jossa on "kaksisuuntainen jousto" mukailee kehoa pehmeänä kuin toinen iho. Tämä venyvä kangas on suunniteltu myös käyttäjille, joilla on iho-ongelmia.



## Erilaiset nostoasennot

Ihmiset ovat erilaisia ja on itsestään selvää, että kaikille ei käy sama nostinliina. Monipuoliset nostinliinat on suunniteltu käyttäjien mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen.

### 2 pisteen ripustus

Sopii useimpiin nostotilanteisiin ja antaa hyvän istuma-asennon. 2-pisteripustus sopii kiinteisiin ja siirrettäviin nostimiin.



### 3 pisteen ripustus

Tarjoaa pitkänomaisen istuimen ja tasapainoisemman painon jakautumisen. 3 pisteen ripustus sopii erityisesti potilaille, joilla on lisääntynyt painehaavojen riski. Vain siirrettäviin nostimiin.



### 4 pisteen ripustus

Tilava istuin isoille potilaille tai käytettäessä levitintä. 4 pisteen ripustus sopii sekä kiinteisiin että siirrettäviin nostimiin.




# Oikean nostinliinan valinta

## 1

Mittojen tulkinta:

A=aukko, B=vartalon leveys, C= vartalon pituus, D=vyötärölinja

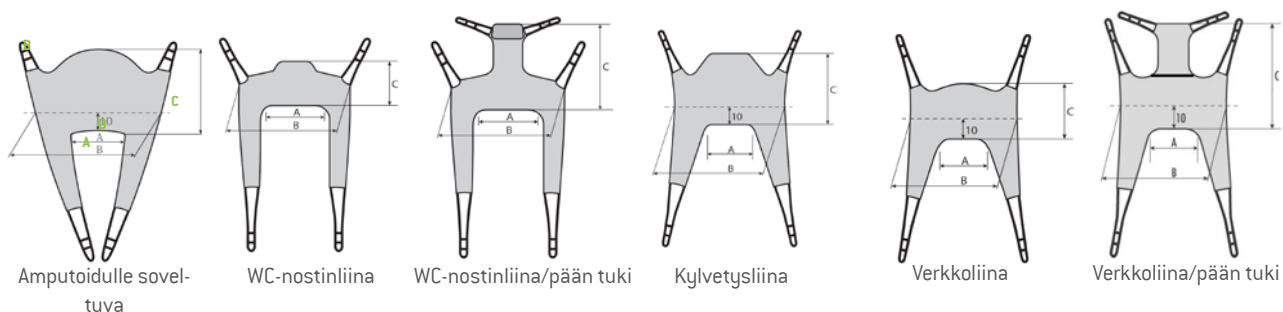

Amputoidulle soveltuva

WC-nostinliina

WC-nostinliina/pään tuki

Kylvetysliina

Verkkoliina

Verkkoliina/pään tuki

## 2

Mittaa potilas





**Liian suuri liina**

**Liian pieni liina**

Nostettava voi pudota liinasta

Nostettava voi pudota liinasta. Kunto voi huonontua.

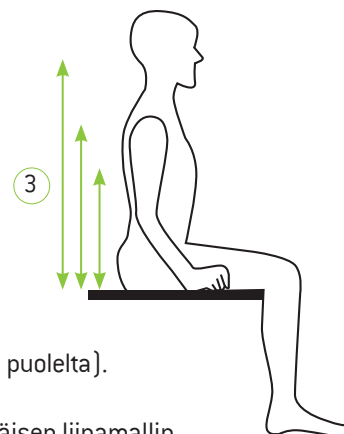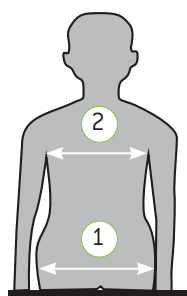

- ① Lantion alueen mittaaminen: Mittaa selän kautta mitta sivulta sivulle (ei vatsan puolelta).
- ② Mittaa selän leveys.
- ③ Mittaa selän pituudet valitessasi matalan, olkapäähän ulottuvan tai korkeaselkäisen liinamallin.

**Mittaa aina istuma-asennossa.**

## 3

Nostinliinan käyttötarkoituksen selvittäminen



Nosto pyörätuoliin tai pois pyörätuolista



Nosto sängkyyn tai pois sängystä



Nosto lattialle tai pois lattialta



WC-käynti/ Peseytyminen



Pukeutuminen/ Riisuutuminen



Kävely/ Kuntoutus

## Perusliina

### Olkapäämalli, jaetut jalkaosat

- Mukautuu potilaan vartaloon tarjoten hyvän tuen koko selälle
- Pystyasento istuttaessa
- Saatavana kolmesta eri materiaalista valmistettuna



Polyesteri Polyesteri-Trevira verkko



## Comfort-liina

### Olkapäämalli ilman jaettuja jalkaosia

Saatavana myös pidempänä mallina tukemaan päätä.

- Ei vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii potilaille, joilla on kipuja
- Mukautuu helposti potilaan vartaloon



Trevira



**Nostinliinan perusmalli** mukautuu potilaan vartaloon ja tarjoaa hyvän tuen koko selälle. Tätä liinaa voidaan käyttää useimmissa nosto-olosuhteissa, sopii useimmille potilaille ja on hyvä valinta peruskäyttöön.

**Perusliinan materiaaliveitchohdot ovat** polyesteri, polyesteriverkko ja Trevira-kangas. Trevira ja polyesteriverkkomateriaalit antavat kosteuden ja lämmön siirtyä tehokkaasti potilaasta.

Tuotenumero (verkko)	Tuotenumero (trevira)	Tuotenumero (polyesteri)	Koko	Nostokapasiteetti
HCHC25045-JS	HC25050-JS	HC25070-JS	Junior S	250 kg
HC25045-JM	HC25050-JM	HC25070-JM	Junior M	250 kg
HC25045-S	HC25050-S	HC25070-S	S	250 kg
HC25045-M	HC25050-M	HC25070-M	M	250 kg
HC25045-L	HC25050-L	HC25070-L	L	250 kg
HC25045-XL	HC25050-XL	HC25070-XL	XL	250 kg

**Comfort-liina on** pehmeä nostinliina ilman vahvikkeita kahvoja tai pehmusteita. Liina mukautuu helposti potilaan vartaloon. Pehmeä liina on suunniteltu antamaan potilaalle mukavuutta ja turvallisuuden tunnetta. Istumisliina ilman jaettuja jalkaosia, joka jakaa kehon painon tasaisesti paineen vähentämiseksi.

**Comfort-liina Trevira-kankaasta** mahdollistaa sen, että sen voi jättää hetkeksi potilaan alle tuoliin tai pyörätuoliin noston jälkeen. Liina kiinnitetään potilaan ollessa makuulla.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25060-JM	Junior M	250 kg
HC25060-S	S	250 kg
HC25060-M	M	250 kg
HC25060-L	L	250 kg
HC25060-XL	XL	250 kg

## Kokovartaloliina

### Korkea selkämalli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös matalana mallina ilman päätukea sekä verkkokankaisena.

- Tukee päätä
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Kalteva istuin-asento



Polyesteri



**Kokovartaloliina on mukava nostinliina** ilman vahvikkeita, kahvoja tai pehmusteita takana. Se tarjoaa hyvän tuen koko selälle ja tukee päätä.

**Kokovartaloliinaa voidaan käyttää** useimmissa nosto-tilanteissa ja se sopii useimmille potilaille. Vahvistettu pääntuki tekee siitä sopivan nostinliinan esim. potilaiden nostamiseen tasaisilta pinoilta, kuten lattioilta. Kokovartaloliina on valmistettu matalan kitkan polyesterikankaasta, mikä tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
HC25010-S	S	250 kg
HC25010-M	M	250 kg
HC25010-L	L	250 kg
HC25010-XL	XL	250 kg
HC25010-XXL	XXL	300 kg
HC25010-XXXL	XXXL	300 kg

## Kokovartaloliina

### Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Tuettu istuma-asento



Polyester Polyester-verkko



**Kokovartaloliina** tuntuu mukavalta ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita takana ja tarjoaa hyvän tuen koko vartalolle. Liinaa voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

**Kokovartaloliinaa** voidaan käyttää pesu- ja kylpytilanteissa, ja se voidaan myös jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi siirron päätyttyä.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25005-JM	Junior M	250 kg
25005-S	S	250 kg
25005-M	M	250 kg
25005-L	L	250 kg
25005-XL	XL	250 kg

## Kokovartaloliina, siluettiliina

- Ei vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta on heikkoa
- Sopii hyvin lapsille



Polyesteri-  
verkko



**Kokovartaloliina** on mukava ilman vahvistuksia, kahvoja tai pehmusteita. Se mukautuu henkilön koko vartaloon tarjoten hyvää tukea. Sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja sen kapea muotoilu tekee siitä optimaalisen valinnan pienemmille henkilöille.

**Kokovartaloliinaa** on saatavana kahdessa kankaassa, jotka voidaan jättää potilaan taakse lyhyeksi ajaksi.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25015-JS	Junior S	250 kg
25015-JM	Junior M	250 kg
25015-S	S	250 kg
25015-M	M	250 kg
25015-L	L	250 kg
25015-XL	XL	250 kg

## Kylvetysliina

Olkapäämalli, jaetut jalkaosat

- Vahvistetut selkä- ja jalkatuet
- Sopii potilaille, joiden keskivartalo on heikko
- Vahvistettu selkä antaa ylimääräistä tukea



Polyesteri-  
verkko



**Olkapäihin asti korkea kylvetysliina**, jossa on jaetut jalkaosat ja vahvistetut selkä- ja jalkatuet. Se on suunniteltu tukemaan potilaan selkää, mikä tekee siitä hyvän ratkaisun potilaille, joiden keskivartalon kannatuskyky on heikko.

**Kylvetysliina sopii** useimmille potilaille ja sopii parhaiten pesutilanteisiin. Kylvetysliina on valmistettu nopeasti kuivuvasta on valmistettu polyesteriverkosta, joka kuivuu nopeasti kylpemisen tai suihkun jälkeen. Selkätuki voidaan poistaa tarvittaessa. Kylvetysliina on saatavana myös polyesteristä valmistettuna..


Tuotenumero	Koko	A [mm/ inch]	B [mm/ inch]	C [mm/ inch]	Nostokapasiteetti
HC25035-JS	Junior S	90/3.5	540/21.2	520/20.4	250 kg
HC25035-JM	Junior M	150/5.9	600/23.6	580/22.8	250 kg
HC25035-S	S	300/11.8	900/35.4	630/24.8	250 kg
HC25035-M	M	360/14.2	900/35.4	630/24.8	250 kg
HC25035-L	L	420/16.5	1000/39.4	630/24.8	250 kg
HC25035-XL	XL	470/18.5	1070/42.1	630/24.8	250 kg

## WC-liina

### Matala malli, jaetut jalkaosat

Saatavana myös korkeampana mallina.

- Vahvistettu selkätuki
- Sopii potilaille, joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus
- Pehmeuste käsivarren alla lisää mukavuutta

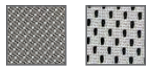

Polyester Polyesteri-verkko



**WC-liina on matala malli** jaetuilla jalkaosilla. Siinä on vahvistettu selkätuki, joka antaa hyvän selkätuen ja pehmuste käsivarsien alla lisää mukavuutta. Jalkaosien leveä väli tekee liinan käytöstä nopeaa ja yksinkertaista ja se mahdollistaa pukeutumisen ja riisumisen WC-käynnin tai pesemisen aikana.

**WC-liinan pystyasento** tekee siirtymisestä helppoa ja sopii potilaille joilla on hyvä keskivartalon ja niskan kannatus. Potilaille, joilla on heikko vartalon hallinta, suositellaan lisäksi vartalovyötä.

Tuotenumero (polyesteri)	Tuotenumero (verkko)	Koko	Nostokapasiteetti
HC25080-JS	-	Junior S	250 kg
HC25080-JM	HC25085-JM	Junior M	250 kg
HC25080-S	HC25085-S	S	250 kg
HC25080-M	HC25085-M	M	250 kg
HC25080-L	HC25085-L	L	250 kg
HC25080-XL	HC25085-XL	XL	250 kg

## WC-liina

### Korkea malli, jaetut jalkaosat

- Vahvistettu selkäosa
- Sopii henkilöille, joiden vartalon hallinta heikkoa
- Pysty istuma-asento
- Lapsille sopiva malli



Polyesteri-verkko



**WC-liinassa** on korkea vahvistettu selkätuki, joka antaa selälle lisää tukea ja pehmusteet käsivarsien alla lisämukavuutta. Nostinliinassa on myös pehmustettu ja säädettävä niskatuki, joka antaa lisävakautta pään hallintaan. Jalkaosien leveä välisoa tekee WC-liinasta nopean ja yksinkertaisen käyttää ja mahdollistaa pukeutumisen ja riisuutumisen wc-käynnin tai kylpemisen aikana.

**Pystyasento helpottaa** siirtymistä WC:hen ja takaisin ja sopii henkilöille, jotka tarvitsevat erityistukea vartalon ja pään hallinnassa. Potilaille, joiden vartalonhallinta on heikkoa, suositellaan lisäksi tukivyötä. WC-liina on saatavilla nopeasti kuivuvana verkkokankaana.


Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25090-JM	Junior M	250 kg
25090-S	S	250 kg
25090-M	M	250 kg
25090-L	L	250 kg
25090-XL	XL	250 kg



# Istumaliina

## Ylimääräistä selkätukea

- Olkapäille ulottuva malli, jossa on jaetut jalkaosat
- Vahvistettu selkä- ja jalkaosat
- Sopii henkilöille, joiden keskivartalo on heikko
- Pystyasento

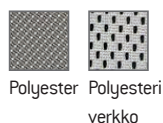

**Istumaliina** on suunniteltu antamaan henkilölle ylimääräistä selkätukea, ja sitä voidaan käyttää useimmissa nostotilanteissa ja se sopii useimmille henkilöille.

**Vahvistettu selkäosa ja polyester** kankaan kitkattomuus tekee nostotilanteista nopeita ja yksinkertaisia.

Tuotenumero	Koko	Nostokapasiteetti
25030-JS	Junior S	250 kg
25030-JM	Junior M	250 kg
25030-S	S	250 kg
25030-M	M	250 kg
25030-L	L	250 kg
25030-XL	XL	250 kg

# Monikäyttöliina

## Kävelyn harjoitteluun ja kuntoutukseen

- Täydellinen liina kävelyharjoitteluun ja kuntoutukseen
- Sopii potilaille, joilla on jonkin verran kehon hallintaa
- Voidaan käyttää pukeutumisen ja riisumisen aikana



**Monikäyttöliina** on monipuolinen liina erilaisiin käyttötarkoituksiin. Yhdessä laajan lisävarustevalikoiman kanssa liina tukee seisomista ja kävelyä tasapainoharjoitteissa, WC-käynneillä sekä pukeutumisen ja riisumisen yhteydessä.

**Monikäyttöliina sopii potilaille** joilla on jossain määrin kehon hallintaa. Lisätukea varten hihnaa voidaan käyttää lantiovyön kanssa (kuvassa).

Koko	Tuotenumero	Nostokapasiteetti
S	HC25105-S	150 kg
M	HC25105-M	150 kg
L	HC25105-L	150 kg
XL	HC25105-XL	150 kg

